

BEDIENUNGSANLEITUNG

RS PRO Wi-Fi & USB Mikroskop und Digitalkamera

Lagernummer: 913-2493



CE

1. Warnungen	3
2. Inhalt der Packung	3
3. VERWENDUNG DES GERÄTS	4
3.1 ANWEISUNGEN ZUM LADEN DES AKKUS	4
4. WI-FI MODUS.....	5
4.1. SIMULTANE VERWENDUNG DES GERÄTES MIT ANDEREN WLAN-NETZEN.....	5
4.2. SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	6
5. Mic-Fi auf iPad / iPhone.....	7
5.1 Installation und Toolbar am iPad / iPhone.....	7
5.2 Eichung an iPhone / i Pad	7
5.3 Messung an iPhone / i Pad.....	8
6. „Mic-Fi“ auf Android-Tablet / -Smartphone	9
6.1 Installation und Toolbar am Tablet / SmartPhone Android	9
6.2 Kalibrierung an Android Geräten.....	11
6.3 Messung an Android Geräten	11
7. NEU „Mic-Fi“ WLAN und USB für Windows (All in ONE).....	12
7.1 Symbolleiste.....	13
Kalibrierungsmenü	15
7.2 Kalibrierung.....	15
7.3 Datei.....	16
7.4 Einstellungen.....	17
Messeinstellungen	17
Video-Einstellungen.....	18
7.5 Snapshot aktivieren	18
8. NEUE SOFTWARE „Mic-Fi“ WLAN und USB für MAC OS (All in ONE)	20
8.1 INSTALLATION	20
8.2 VERWENDUNG.....	22
8.3 Einstellungen.....	23
8.4 Kalibrierung.....	24
9. Technische Spezifikationen	25
10. Problemlösung.....	26
11. ENTSORGUNG	27
12. GARANTIE.....	28

Herzlich willkommen

Danke, dass Sie sich für ein Mic-Fi Wi-Fi entschieden haben.

Das Mikroskop oder die Kamera kann über ein Wi-Fi-Netzwerk, aber auch über eine USB-Verbindung verwendet werden.

Durch die jeweilige Anwendung kann das analysierte Detail übersichtlich dargestellt und mit anderen Nutzern mit Wi-Fi-Verbindung geteilt werden.

1. Warnungen

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTES AUFMERKSAM DAS HANDBUCH LESEN

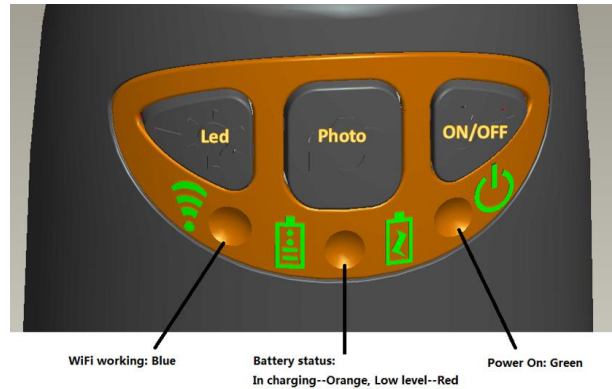
RS PRO haftet nicht für Verletzungen oder gesetzeswidrige und unsachgemäße Verwendungen des Produktes, die auf die Nichtachtung der Anleitungen, Warnungen, Anweisungen oder Hinweise zur Verwendung dieses Handbuchs zurückzuführen sind.








- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Berühren Sie die Linse nicht.
- Richten Sie das Licht nicht auf die Augen (ausser auf das Iridoskop)
- Schützen Sie das Gerät vor statischer Aufladung.
- Nehmen Sie das Gerät nie auseinander.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, da das Öffnen des Geräts den Benutzer Spannungspunkten oder anderen Risiken aussetzen kann.
- Lagerung und Gebrauch: -20 ~ 45°C, Feuchtigkeit: 45% ~ 85%, Einsatz ausserhalb der angegebenen Parameter kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten benetzt werden. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, muss es sofort ausgeschaltet werden, bei längerem Gebrauch kann es unter diesen Bedingungen zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel oder Lösungen, die das Produkt beschädigen könnten. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen platzieren oder direktem Feuer aussetzen
- Sollte das Objektiv schmutzig sein, verwenden Sie einen Pinsel, der mit einem weichen Tuch umhüllt ist, um das Objektiv nicht mit den Fingern zu berühren. Achten Sie darauf, die Linse nicht zu zerkratzen.
- Computer ausschalten, bevor das Gerät abgeschaltet wird
- Produkt während der Aufladung mit Netzteil nicht verwenden

2. Inhalt der Packung



1. Mikroskop oder Wi-Fi-Kamera
2. Netzteil für USB-Anschluss
3. USB Kabel
4. Halterung aus Kunststoff
5. Justiernetz (abhängig von Modellen)
6. Front Cover (kommt auf Modelle an)

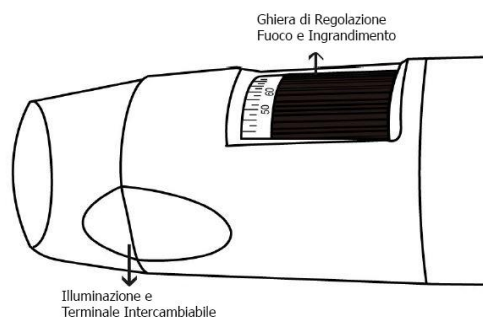
3. VERWENDUNG DES GERÄTS



- **WLAN:** Drücken Sie die Taste  für 2 Sekunden, das Gerät stellt ein WLAN-Netzwerk (AP) für den Zugriff zur Verfügung.
- **USB:** Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den USB-Anschluss Ihres Computers an.
- **WLAN-Anzeige**  (**blaue LED**): Blinken zeigt die korrekte Datenübertragung an; durchgehendes Leuchten zeigt an, dass keine Datenübertragung vorhanden ist
- **Power-Anzeige**  (**grüne LED**): Die LED leuchtet, wenn sich das Gerät im WLAN-Modus befindet oder wenn es über ein Mini-USB-Kabel mit dem PC oder der Stromversorgung verbunden ist.
- **LED-Taste**  : Halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um zwischen Weißlicht und UV-Licht oder polarisiertem Licht (soweit vorgesehen) zu wechseln; drücken Sie + und - , um die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern, und schalten Sie ggf. auf eine andere Beleuchtungsart um (soweit vorgesehen).
HINWEIS: Die LED-Taste ist für MIFIEYE/EYE5M nicht aktiv.
- **Foto-Taste** : Drücken Sie die Taste  um das Bild direkt vom Gerät aus aufzunehmen

3.1 ANWEISUNGEN ZUM LADEN DES AKKUS

1. Verbinden Sie das Mini-USB-Kabel mit dem Gerät, das andere Ende mit der Stromversorgung oder dem PC.
Es wird empfohlen, das Gerät nicht aufzuladen, während Sie den WLAN-Modus verwenden.
2. **Akkuanzeige**  (**orange LED** oder **rote LED**): **Rote LED**, wenn der Akkustand niedrig ist; **orange LED blinking**, wenn der Akku geladen wird.
3. **Ladeanzeige** : **orange LED fix**, wenn der Akku vollständig geladen ist.






ACHTUNG:

FEHLENDE BILDER ODER LANGSAME UND NICHT FLÜSSIGE WIEDERGABE VON VIDEOS SIND DAS ERGEBNIS EINER NIEDRIGEN AKKULADUNG. WENN DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL BENUTZT WIRD, LADEN SIE ES MINDESTENS 12 STUNDEN LANG AUF.

4. WI-FI MODUS

1. Installation der „Mic-Fi“-App:
 - a) Für **iPad** und **iPhone**: Suchen Sie im **App Store** nach „**Mic-Fi**“ und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.
 - b) Für **Smartphone** und **Android-Tablet**: Suchen Sie „**Mic-Fi Plus 2**“ in **Google Play** und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.
 - c) Für **Windows** und **Mac PC**: Installieren Sie die Software, „**Mic-Fi.exe**“ (für Windows) oder „**Mic-Fi.dmg**“ (MAC OS).
 - d) Neue Version von „**Mic-Fi**“ für Windows und MAC verfügbar.
Eine einzige Software zur Verwaltung des Geräts über WLAN oder USB

Die SW kann auch über folgende Seite heruntergeladen werden: www.mic-fi.com

2. Drücken Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang, die grüne LED-Anzeige  leuchtet auf. Nach ca. 20 Sekunden beginnt die WLAN-Anzeige zu blinken. .
3. Wählen Sie aus den auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC verfügbaren Netzwerken das SSID-Netzwerk „WI-FI2SCOPE_xxxxx“ aus; geben Sie das Passwort **12345678** ein und drücken Sie auf Ok.
4. Warten Sie nach dem Verbinden 5 Sekunden lang und öffnen Sie die App „Mic-Fi“. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt und kein Bild erscheint, schließen Sie die App und starten Sie sie erneut. Sie können das Bild auf mehreren Geräten gleichzeitig anzeigen lassen: Die Bildrate wird in diesem Fall niedriger sein als normal.

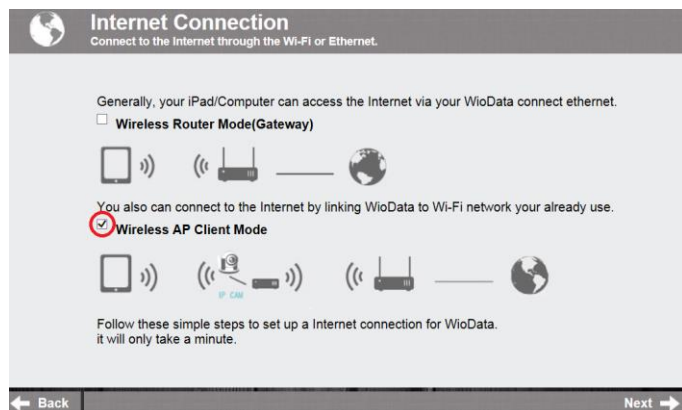
4.1. SIMULTANE VERWENDUNG DES GERÄTES MIT ANDEREN WLAN-NETZEN

Sie können das WLAN-Netzwerk des Geräts und das Netzwerk von PC/Smartphone/Tablet gleichzeitig verwenden.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie <http://10.10.1.1> ein und drücken Sie die Eingabetaste. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie nach Benutzernamen und Passwort gefragt werden: Geben Sie **admin** und **admin** ein. Es öffnet sich folgendes Fenster:




2. Drücken Sie  und es öffnet sich folgendes Fenster:



3. Wählen Sie „Wireless AP Client Mode“ und drücken Sie auf **Next** →:

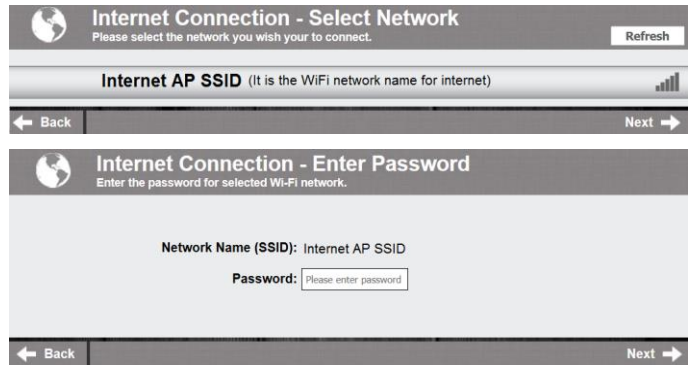4. Drücken Sie **Refresh** bis Ihre SSID erscheint. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie auf „Next“. Sie können gleichzeitig die Anwendung Wi-Fi micro und das Internet nutzen.




4.2. SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

So ändern Sie das Kennwort für den Zugriff auf das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts:

1. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie <http://10.10.1.1> ein und drücken Sie die Eingabetaste. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie nach Benutzername und Passwort gefragt werden: Geben Sie **admin** und **admin** ein. Es öffnet sich folgendes Fenster:



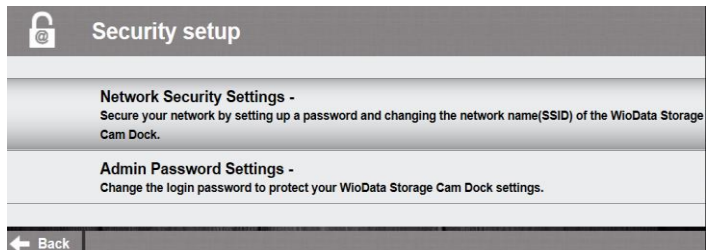2. Drücken Sie  und wählen Sie „Network Security Settings“.




3. Geben Sie den gewünschten Netzwerknamen (SSID) und das Passwort unter „WPA-PSK Key“ ein und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie auf „Weiter“, bis die Einstellung abgeschlossen ist.
5. Verbinden Sie das WLAN-Netzwerk erneut mit neuer SSID und neuem Passwort.




5. Mic-Fi auf iPad / iPhone

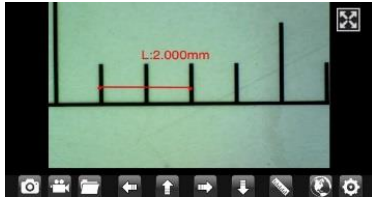5.1 Installation und Toolbar am iPad / iPhone



Mic-Fi“ im App Store suchen und installieren. Wi-Fi Netzwerk gemäss Punkt 4 verbinden

Durch Druck der Ikone  starten

Ist das Video schwarz oder langsam, schließen und die Anwendung "Mic-Fi" erneut starten.

Fotos aufnehmen

Navigation während der Messung und der Eichung

Den Foto-/Videordner öffnen

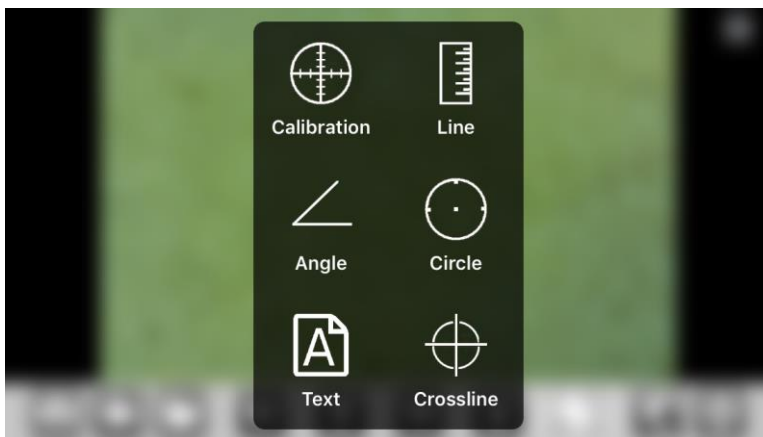
Messung und Eichung

Video aufnehmen, aufnehmen um ein Video aufzunehmen muss die Auflösung auf 640x480 pixel eingestellt sein)


Zugriff auf ein Remote-Einrichtung im Intranet: Geben Sie die LAN-IP des Remote-Einrichtung ein



5.2 Eichung an iPhone / i Pad

Um die exakten Messungsdaten zu erhalten, muss man das Instrument vor jedem Messen und zum Vergrößern kalibrieren.



Das mitgelieferte Kalibrierungslinial aufnehmen. Die Schärfe des Bildes einstellen, indem man Vergrößerungsverstellung dreht.

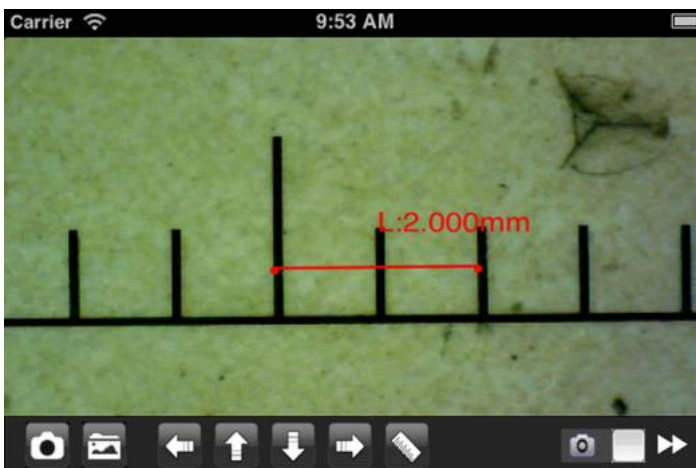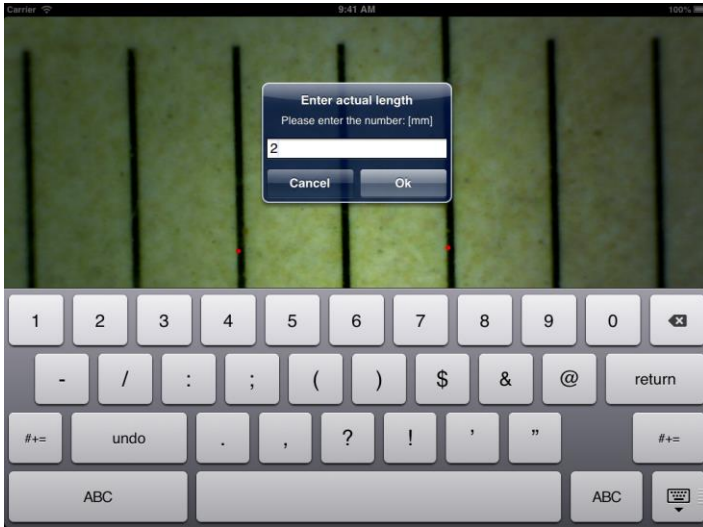Auf  drücken und "Calibration" auswählen und man kehrt auf das direkte Bild zurück.



1. Mit einem Klick einen Punkt auswählen und die Wahl durch Bewegungen der Pfeile verfeinern.
-
2. Auf dieselbe Weise einen zweiten Punkt mit bekanntem Abstand wählen; auf diese Weise zieht man eine Linie mit bekannter Länge
 3. Einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm drücken.
 4. Den Abstand eingeben und "OK" drücken.

Die Kalibrierung ist beendet.

Auf den Bildschirm klicken, um auf das direkte Bild zurückzukehren.

Man kann jetzt Präzisions-Messfunktionen ausführen; die Messungen werden im gewünschten Bild gespeichert

Den Fokus- und Vergrößerungswert nicht mit dem Einstellring verändern.

Sollte man ein anderes Objekt aufnehmen und dies ist nicht scharf, ändert man den Abstand bis das Bild scharf ist.


5.3 Messung an iPhone / i Pad


Line Zur Messung des linearen Abstands zwischen zwei Punkten.

Man wählt einen Punkt mit einem Klick und zieht auf die gewünschte Länge. Mit einem weiteren Klick beenden.

Angle Zur Messung des Winkels, wählt man drei Punkte mit einem Klick


Circle Zur Messung der Fläche, des Umfangs und des Radius des Kreises, wählt man drei Punkte mit einem Klick.

z. B. wählt man die Lineal-Ikone  und wählt "Line".

Auf dem Bildschirm die beiden Punkte, deren Abstand man messen möchte auswählen und auf den Bildschirm drücken. Das Maß erscheint.  drücken, um das Bild zu erfassen (nicht den "Fokus- & Vergrößerungswert" Einstellring berühren). Wenn das angezeigte Objekt nicht scharf ist, regelt man nur den Abstand zwischen dem Gerät und dem Objekt bis man ein scharfes Bild erhält. Die Messungsdaten können im geschossenen Foto gespeichert werden.


6. „Mic-Fi“ auf Android-Tablet / -Smartphone

Die App Mic-Fi plus 2“ bei Google Play suchen und installieren

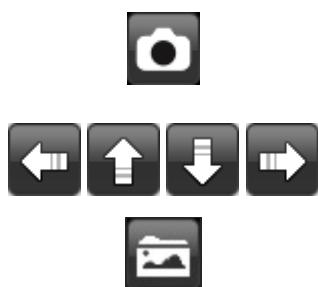
Werkzeug an Wifi-Netzwerk anschliessen gemäss Punkt 4. Icon drücken 



6.1 Installation und Toolbar am Tablet / SmartPhone Android

Die Anwendung “Mic-Fi Plus 2” in Google Play suchen und installieren; starten, indem man die Ikone drückt  +

Ist das Video schwarz oder langsam, schließen und die Anwendung "Mic-Fi" erneut starten.



Ein Foto aufnehmen.

Navigation während der Messung und der Kalibrierung

Den Fotoordner öffnen



Wählen Sie ein Foto aus, um es zu bearbeiten. Es ist möglich, Messungen vorzunehmen oder Texte zu schreiben und zu speichern.



Messung und Eichung



Video-Auflösung einstellen. (Ändert man die Auflösung, muss man auf das Aus- und Einschalten der Leds des Gerätes warten)

Resolution	FPS	Unit	Decimal	Color	Line Size	Text Size
<input checked="" type="radio"/> 640X480	<input type="radio"/> 30 fps	<input checked="" type="radio"/> um	<input type="radio"/> 0.00	<input type="radio"/> Red	5	
<input type="radio"/> 1280X1024	<input type="radio"/> 25 fps	<input type="radio"/> mm	<input type="radio"/> 0.000	<input checked="" type="radio"/> Green		20
<input type="radio"/> 320X240	<input type="radio"/> 20 fps	<input type="radio"/> mil	<input checked="" type="radio"/> 0.0000	<input type="radio"/> Blue		
		<input type="radio"/> inch	<input type="radio"/> 0.00000			

CLOSE SNAP: Symbol zum Aktivieren / Deaktivieren des Schnappschusses

OPEN RENAME: Ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren des Termins des aufgenommenen Fotos

INTERNET: Ermöglicht die direkte Einstellung des Instruments (siehe Kapitel 4.1).



: Ermöglicht das Einfügen / Entfernen eines Gitters




: Löschen Sie Messungen und Texte im Bild

6.2 Kalibrierung an Android Geräten

Um die exakten Messungsdaten zu erhalten, muss man das Instrument vor jedem Messen und zum Vergrößern kalibrieren.

Das mitgelieferte Kalibrierungslineal aufnehmen.

Die Schärfe des Bildes einstellen, indem man Vergrößerungsverstellung dreht.

Auf  drücken und "Calibration" auswählen und man kehrt auf das direkte Bild zurück.

1. Mit einem Klick einen Punkt auswählen und die Wahl durch Bewegen der Pfeile verfeinern.



2. Auf dieselbe Weise einen zweiten Punkt mit bekanntem Abstand wählen; auf diese Weise zieht man eine Linie mit bekannter Länge
3. Einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm drücken.
4. Den Abstand eingeben und "OK" drücken.

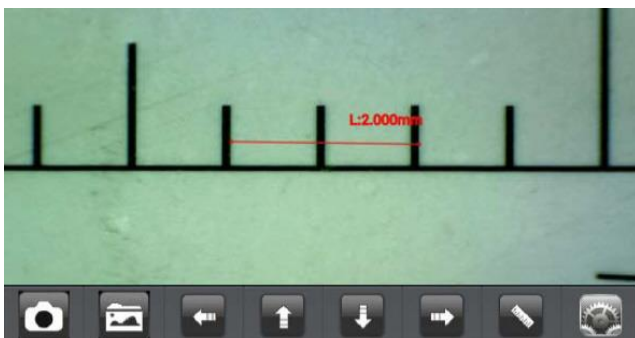
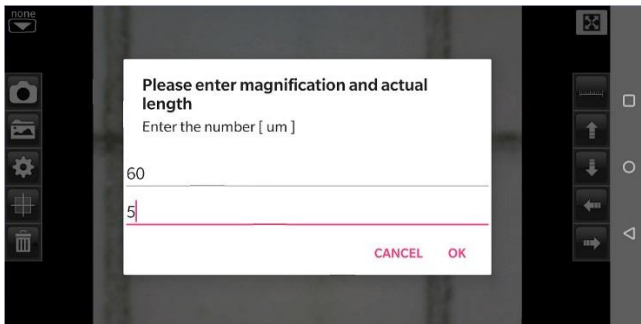
Die Kalibrierung ist beendet.

Auf den Bildschirm klicken, um auf das direkte Bild zurückzukehren.

Man kann jetzt Präzisions- Messfunktionen ausführen; die Messungen werden im gewünschten Bild gespeichert

Den Fokus- und Vergrößerungswert nicht mit dem Einstellring verändern.

Sollte man ein anderes Objekt aufnehmen und dies ist nicht scharf, ändert man den Abstand bis das Bild scharf ist.



6.3 Messung an Android Geräten

Line Zur Messung des linearen Abstands zwischen zwei Punkten. Man wählt einen Punkt mit einem Klick und zieht auf die gewünschte Länge. Mit einem weiteren Klick beenden.

Angle Zur Messung des Winkels, wählt man drei Punkte mit einem Klick

Circle Zur Messung der Fläche, des Umfangs und des Radius des Kreises, wählt man drei Punkte mit einem Klick.

z. B. wählt man die Lineal-Ikone  und wählt "Circle".

Auf dem Bildschirm die beiden Punkte auf dem Kreis auswählen, die man messen möchte und auf den Bildschirm drücken. Das Maß erscheint.




drücken, um das Bild zu erfassen (nichtden "Fokus- & Vergrößerungs" Einstellring berühren").

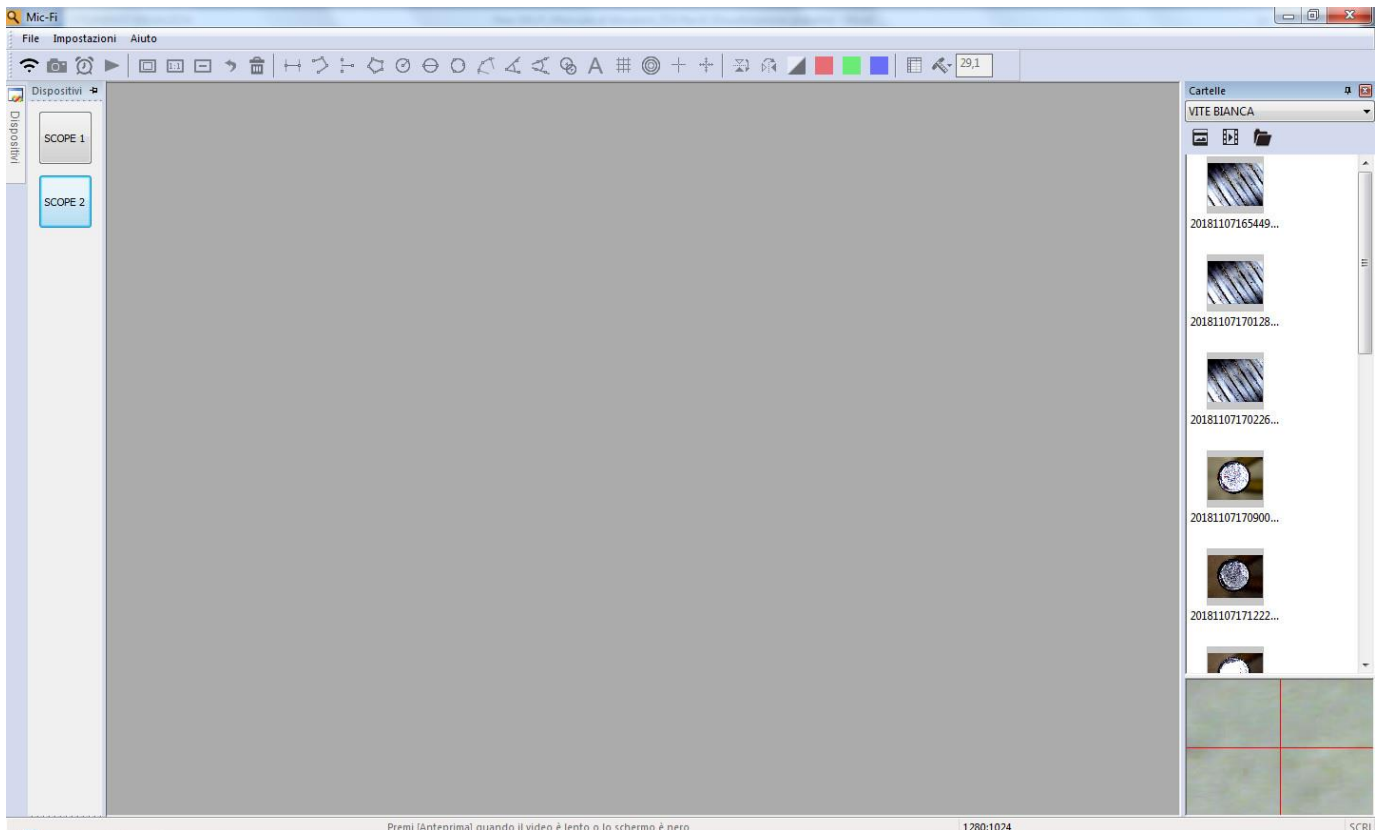
Wenn das angezeigte Objekt nicht scharf ist, regelt man nur den Abstand zwischen dem Gerät und dem Objekt bis man ein scharfes Bild erhält.

Die Messungsdaten können im geschossenen Foto gespeichert werden.

Um die exakten Messungsdaten zu erhalten, muss man das Instrument vor jedem Messen und zum Vergrößern kalibrieren.

7. NEU „Mic-Fi“ WLAN und USB für Windows (All in ONE)


Nach der Installation der SW „Mic-Fi.exe“ erscheint auf dem Desktop das Symbol , Öffnen Sie die SW durch einen Doppelklick auf das Symbol. Die SW kann über die folgende Seite heruntergeladen werden: www.mic-fi.com




7.1 Symbolleiste

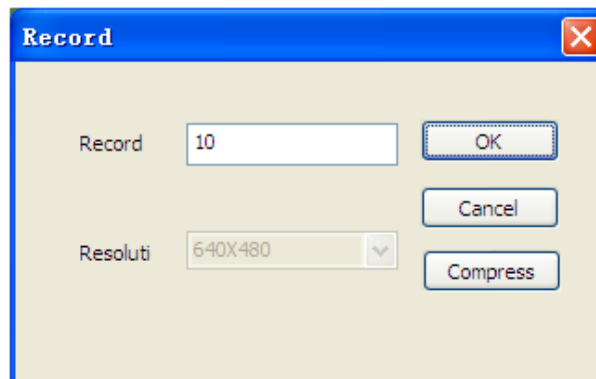



USB modus: Schließen Sie das Einrichtung mit dem USB/MiniUSB-Kabel an den PC an ; Drücken Sie

auf , um das Einrichtung im USB-Modus zu verwenden. Es können bis zu 4 USB- und 1 Wi-Fi-Einrichtung angeschlossen werden.

Wi-Fi modus: Schließen Sie das Gerät gemäß Schritt 4 an das WLAN an und drücken Sie auf , um das Einrichtung im WLAN-Modus zu verwenden

: Foto aufnehmen



: Video aufnehmen (Start/Stop)

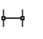
: Vollbild


: Normale Anzeige

: Live-Fenster verkleinern.


: Rückgängig

: Alles löschen.


: Linienmessung: Klicken Sie auf einen Punkt und dann auf einen zweiten gewünschten Punkt. Klicken Sie erneut auf den Desktop und die Länge wird angezeigt.

: Durchgehende Linie


: Von Punkt zu Linie (90°)

: Polygon

: Kreisradius

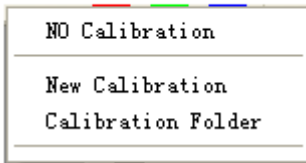
: Kreisdurchmesser

: Kreis aus drei Punkten

: Bogen aus drei Punkten



: Winkel aus drei Punkten

Kalibrierungsmenü




7.2 Kalibrierung

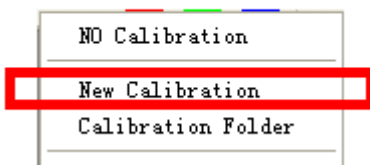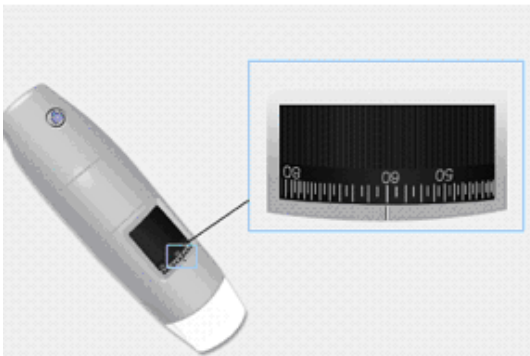Um die genauen Messdaten zu erhalten, kalibrieren Sie das Gerät vor jeder Messfunktion und bei jeder Vergrößerung.





1. Wählen Sie einen bekannten Messstandard aus. Verwenden Sie z.B. das im Lieferumfang enthaltene Kalibrierlineal oder ein normales Lineal.
2. Stellen Sie das Bild scharf, indem Sie das Fokussierad drehen
3. Lesen Sie den Vergrößerungsgrad auf der Skala des Fokussierrades ab

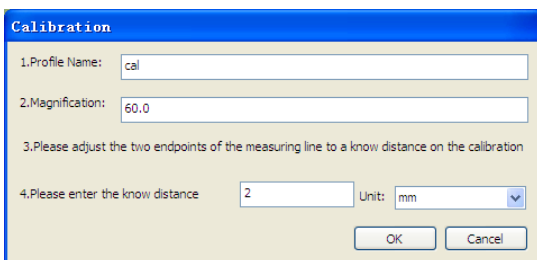4. Klicken Sie auf: Neue Kalibrierung
5. Benennen Sie die Kalibrierung
6. Geben Sie den Vergrößerungswert in das entsprechende Feld ein



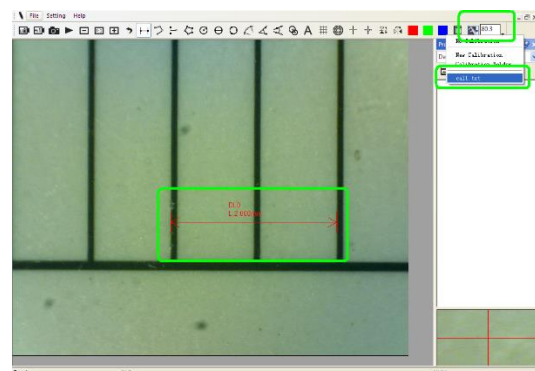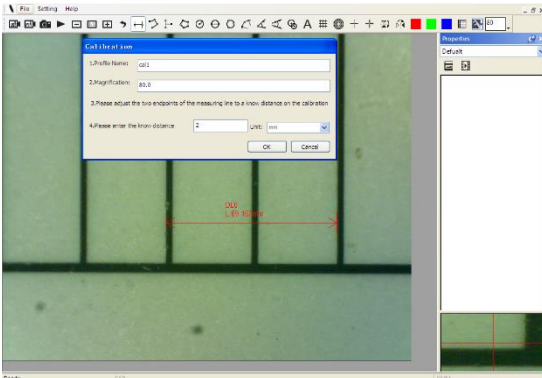7. Wählen Sie mit einem Klick den ersten Punkt aus und ziehen Sie die Linie, bis der gewünschte Abstand erreicht ist.
8. Geben Sie den Distanzwert ein und drücken Sie auf „OK“.




Die Software hat jetzt die Kalibrierung dem Vergrößerungswert entsprechend durchgeführt und der richtige Vergrößerungswert erscheint im linken Feld.

Jetzt können Sie die Messung mit höchster Präzision auf aufgenommenen Fotos oder bei Videos in Echtzeit durchführen.

Sollte das neue Objekt, das Sie analysieren möchten, nicht scharfgestellt sein, stellen Sie nur den Abstand zwischen Einrichtung und Objekt ein, bis Sie ein scharfes Bild erhalten, ohne das Vergrößerungsrad zu drehen, da sonst die Kalibrierdaten nicht mehr gültig sind.

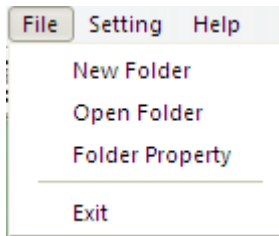
7.3 Datei



Datei.

Neuer Ordner: Erstellen Sie neue Ordner, um Fotos/Videodateien zu speichern.

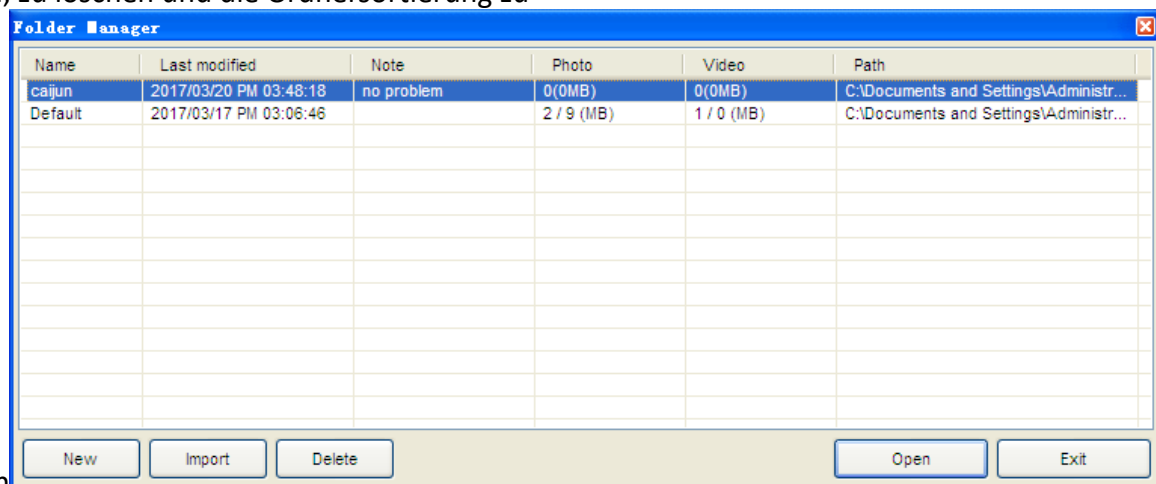Ordner verwalten: „Ordner verwalten“ ermöglicht es Ihnen Ordner zu importieren, zu erstellen, zu öffnen, zu löschen und die Ordnersortierung zu




ändern

Ordneigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Speicherordners an und ermöglicht es Ihnen, den Namen und die Notizen zum aktuellen Speicherordner zu bearbeiten.


Exit: Zurück .

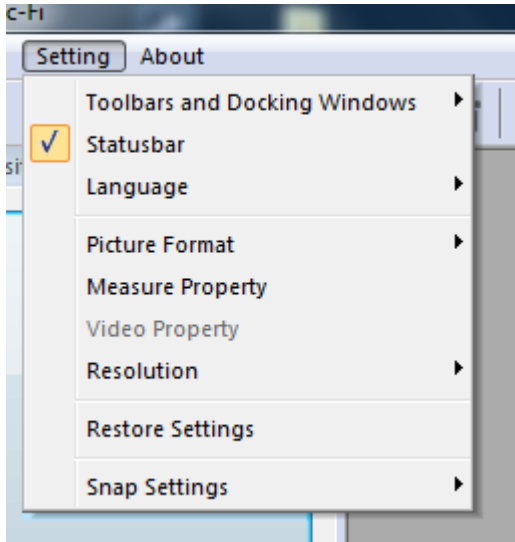7.4 Einstellungen




Messeinstellungen

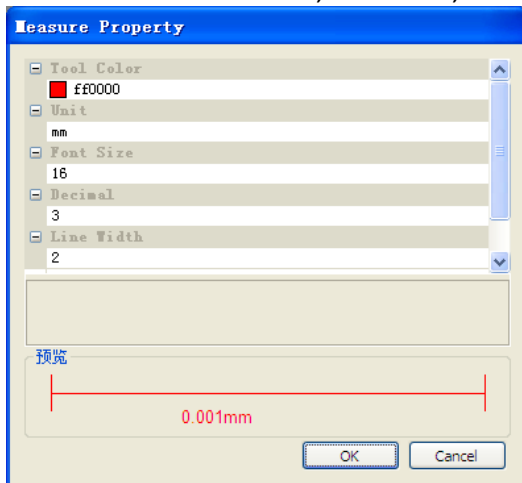Wählen Sie Maßeinheit, Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke und Schriftfarbe aus



Video-Einstellungen

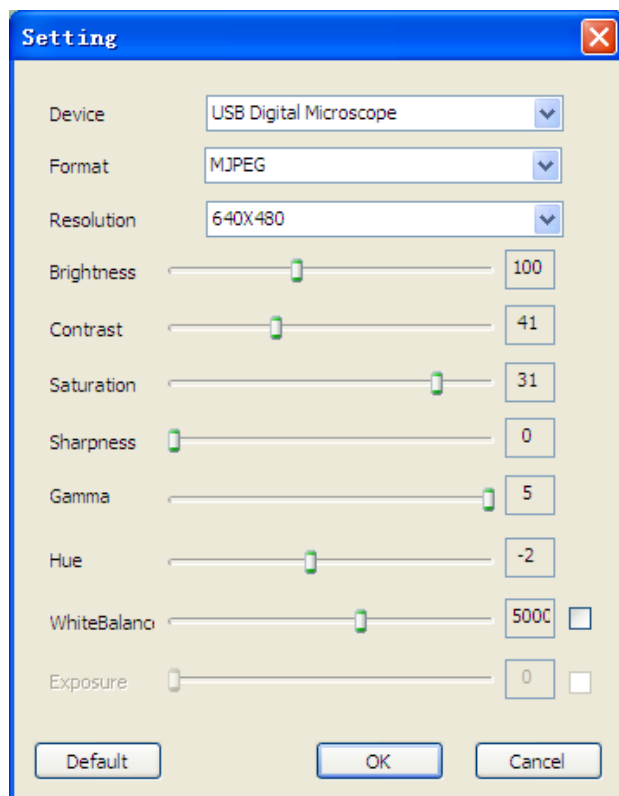

- Wenn kein Live-Bild vorhanden ist, drücken Sie auf Zurücksetzen im Menü Einstellungen und folgen Sie dem Vorgang; Software schließen und wieder öffnen"

7.5 Snapshot aktivieren

Snapshot aktivieren: Foto-Taste für Gerät aktivieren. Drücken Sie auf "EINSTELLUNGEN" und dann auf "Snapshot".

N.B, wenn Windows-Schutzhinweis erscheint



müssen Sie die beiden Kontrollkästchen „Private Netzwerke“ und „Öffentliche Netzwerke“ auswählen und auf „Zugriff erlauben“ klicken, damit das Programm „Snapshot“ in diesen Netzwerken kommunizieren kann, andernfalls wird die Snapshot-Taste nicht funktionieren. Klicken Sie alternativ auf „Systemsteuerung -> Windows Firewall -> Standard-Einstellungen wiederherstellen“, starten Sie die Mic-Fi-Software neu und klicken Sie auf „Snapshot aktivieren“, um die Taste einsatzbereit zu machen.

Anmerkungen:

Um mehrere aufgenommene Bilder auszuwählen:

CTRL + Linker Mausklick

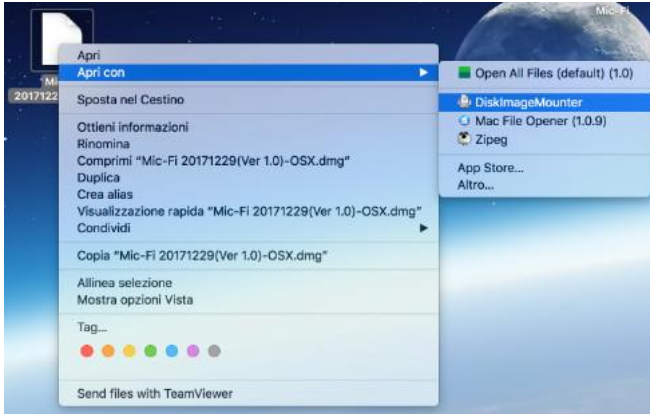


8. NEUE SOFTWARE „Mic-Fi“ WLAN und USB für MAC OS (All in ONE)

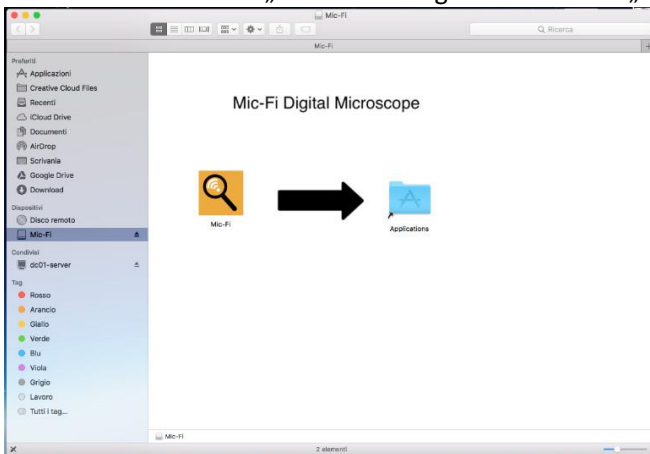
8.1 INSTALLATION

Installieren Sie die Software „Mic-Fixxx.dmg“, indem Sie sie von folgender Webseite herunterladen www.mic-fi.com .

Kopieren Sie sie auf den Desktop und öffnen Sie sie mit „DiskImageMounter“




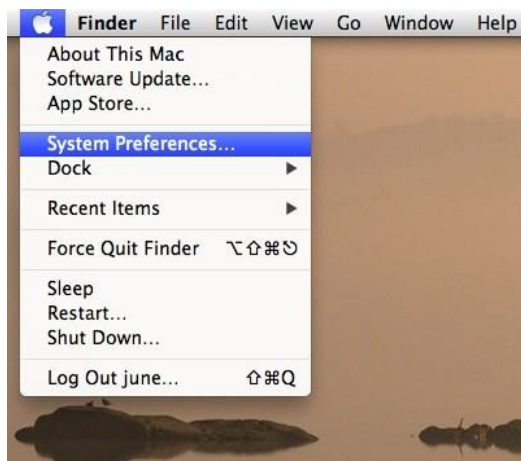
Ziehen Sie den Ordner „Mic-Fi xxx.dmg“ in den Ordner „Programme“, um die Installation abzuschließen.



Hinweis: Wenn das Popup-Fenster zur Security&Privacy für die Verwendung dieser Software erscheint, befolgen Sie die Anweisungen



Klicken Sie in diesem Fall auf  und klicken Sie auf system preferences



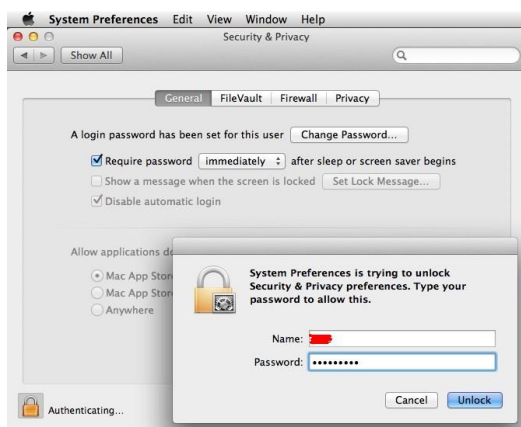
Wählen Sie „Security&Privacy“ und stellen Sie Ihren Computer wie folgt ein:



Klicken Sie auf „Click the lock to make changes“, um auf die Änderungen zuzugreifen




Geben Sie Benutzernamen und Passwort Ihres MACs ein und drücken Sie auf „Unlock“.




Wählen Sie „Anywhere“ aus, um die Einstellung abzuschließen.

Jetzt können Sie die Software „WI-FIMic-Fi“ installieren




Machen Sie einen Doppelklick auf das Mic-Fi Symbol  , nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben

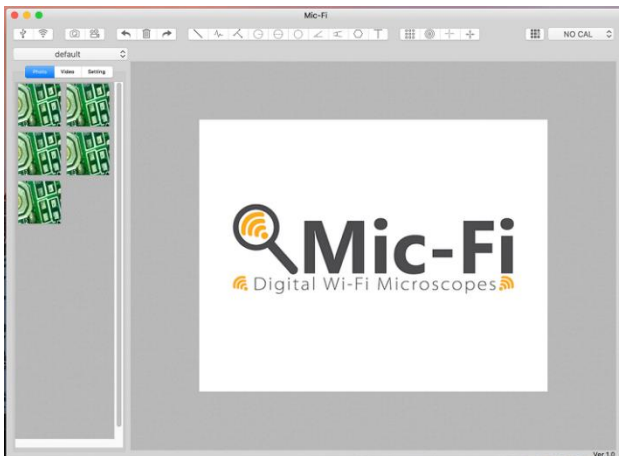8.2 VERWENDUNG



USB modus: Schließen Sie das Einrichtung mit dem USB/MiniUSB-Kabel an den PC an ; Drücken Sie auf  um das Einrichtung im USB-Modus zu verwenden.

Wi-Fi modus: Schließen Sie das Gerät gemäß Schritt 4 an das WLAN an und drücken Sie auf  Wi-Fi, um das Einrichtung im WLAN-Modus zu verwenden.



- 1) Foto aufnehmen
- 2) Video starten/stoppen



- 1) Rückgängig
- 2) Löschen
- 3) Wiederholen



- 1) Linie
- 2) Durchgehende Linie

- 3) Von Punkt zu Linie
- 4) Kreisradius
- 5) Kreisdurchmesser
- 6) Kreis aus drei Punkten
- 7) Winkel aus drei Punkten
- 8) Winkel aus vier Punkten
- 9) Polygon
- 10) Text hinzufügen



- 1) Raster
- 2) Rundraster
- 3) Fadenkreuz
- 4) Fadenkreuz mit Skala

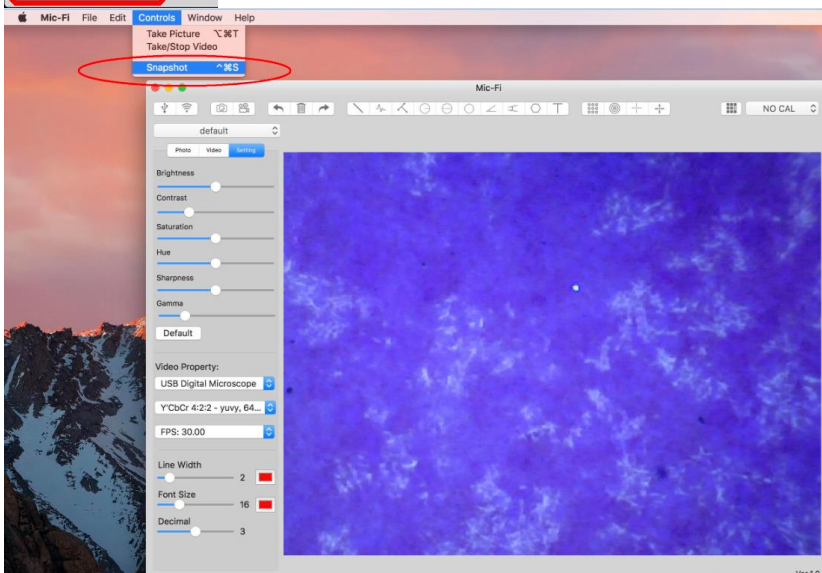
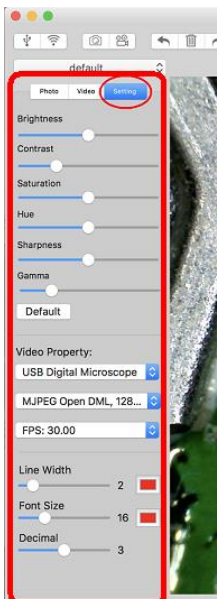


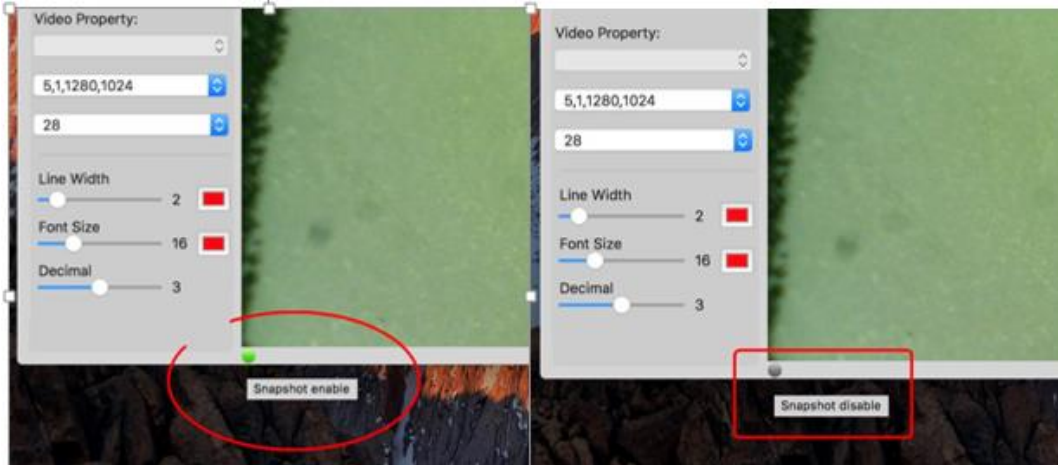
- 1) Kalibrierung



- 1) Foto-/Video-Ordner

8.3 Einstellungen






Hinweis: Snapshot ist nur im WLAN-Modus aktiv.

8.4 Kalibrierung

1) Verwenden Sie das Kalibrierungsraster, indem Sie es unter das Einrichtung legen. Stellen Sie das Bild scharf

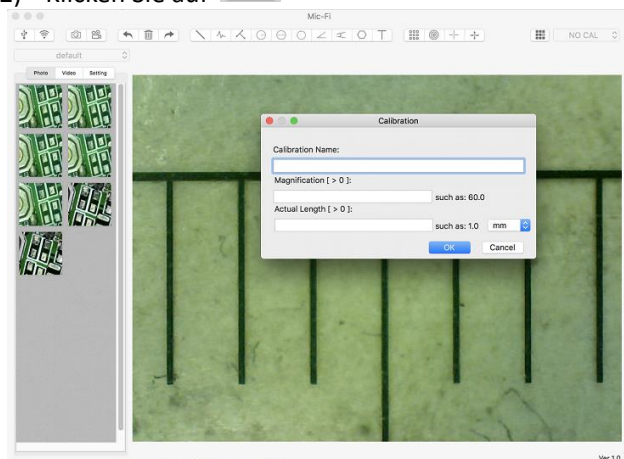2) Klicken Sie auf 



- 1) Benennen Sie die Kalibrierung.
- 2) Lesen Sie den Vergrößerungsgrad auf der Skala des Fokussierendes ab und tragen Sie ihn in das entsprechende Feld ein.
- 3) Geben Sie den Wert des Abstands ein, die Sie als Referenz haben möchten.
- 4) Drücken Sie auf OK
- 5) Wählen Sie mit einem Klick den ersten Punkt aus und ziehen Sie die Linie, bis der gewünschte Abstand erreicht ist.

Die Software hat jetzt die Kalibrierung dem Vergrößerungswert entsprechend durchgeführt.

Wählen Sie die durchgeführte Kalibrierung im Menü aus. 

Jetzt können Sie die Messung mit höchster Präzision auf aufgenommenen Fotos oder bei Videos in Echtzeit durchführen.

Sollte das neue Objekt, das Sie analysieren möchten, nicht scharfgestellt sein, stellen Sie nur den Abstand zwischen Einrichtung und Objekt ein, bis Sie ein scharfes Bild erhalten, ohne das Vergrößerungsrad zu drehen, da sonst die Kalibrierdaten nicht mehr gültig sind.

9 Technische Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 7/10/Mac 10.7 und danach/IOS/Android

Einrichtung

Linsen mit hoher Auflösung

Betriebstemperatur: 60 °C,

Kamera

Kamerasensor: CMOS

Ausstellung: Auto

Gamma: Auto

Auswuchten des weißen Elements: Auto

Balancieren von Schwarz: Auto

Zum Schutz vor Stau: Auto

Feststellung von Mängeln: Auto

Farbsättigung: auto

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standards compliant

Übertragungsweg: größer als 5m

Leistung für die Übertragung:

- 11n HT40 MCS7: +13 dBm
- 11b CCK: +18 dBm
- 11g OFDM: +15 dBm

Geschwindigkeit der Übertragung bei:

- 802.11n: up to 150Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

Frequenzbereich: 2.400 ~ 2.4835GHz

Verbrauch: Max 2.5W

Lithium-Akku : Ca. 2 Std. Betriebsdauer

Einsatz: DC5.0V/1A

USB

Schnittstelle: USB 2.0

Kabellänge Miniusb: 1.2m

10 Problemlösung

10.1 Wifi-Modus

1. Es gibt kein Live-Bild, nachdem die Auflösung auf 1280 x 1024 geändert wurde, aber es funktioniert gut bei 640x480.
 - a) Akku leer, bitte laden Sie Ihr Gerät auf.
2. Video-Wi-Fi-Gerät startet nicht, nachdem lange gearbeitet wurde:
 - a) Prüfen, ob die Batterie leer ist.
 - b) Das WLAN-Gerät ist abzuschalten und wieder einzuschalten.
3. Die Live-Frame-Rate des Wi-Fi-Geräts ist langsam:
 - a) Klicken Sie auf das "Wi-Fi"-Icon aus der "Mic-Fi"-Software, wenn Sie den PC oder Mac verwenden.
 - b) Mic-Fi App für Smartphone oder Tablet schliessen und neu starten.
 - c) Setzen Sie die Videoauflösung auf 640 x 480, wenn die aktuelle Auflösung 1280 x 1024 beträgt.
 - d) Prüfen Sie, ob die Batterie fast erschöpft ist oder viele weitere Wi-Fi-Netze in der Umgebung störend sind.
 - e) Das WLAN-Gerät wird ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
4. Es gibt kein Live-Bild nach Programmöffnung "Mic-Fi":
 - a) Falls sich die Leuchtdioden nicht einschalten, schalten Sie bitte das Wifi aus, schliessen Sie die Anwendung "Mic-Fi" und starten Sie es erneut.
 - b) Schalten Sie die Mic-Fi " wieder ein, wenn Sie das Gerät auf Smart-Phone oder Tablet einsetzen. ; Klicken Sie auf das Symbol "Vorschau" wenn Sie es auf Windows PC oder Mac PC verwenden. Schalten Sie es aus und wieder ein.
5. Warum wird das Live-Bild nach der Auflösung unterbrochen?
 - a) Wenn sich die Auflösung ändert, muss gewartet werden, bis die Leuchtdioden erlöschen. Das dauert etwa fünf Sekunden.
6. Warum ist das Gerät warm?
 - a) Die Leistungsaufnahme des Wifi-Geräts beträgt ca. 2,5 W, so dass die höchste Kerntemperatur des Geräts ca. 60° C erreicht.
7. Wie lange kann das Gerät arbeiten, ohne es neu zu laden?
 - a) Ca. 2 Stunden bei einer Auflösung von 640x480. Volle Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
8. Bild fällt aus oder die App hört auf zu funktionieren? Interferenzproblem
Interferenzen mit anderen Geräten können auftreten, wenn andere drahtlose Quellen wie FM Wireless 2.4GHz analog, Wi-Fi-Signal, Cordless-Telefon und Bluetooth vorhanden sind; oder in der Nähe von elektromagnetischen Quellen wie Hochspannungsleitungen, Hochspannungskabel usw. liegen.
Halten Sie das Gerät daher während des Gebrauchs von diesen Störquellen fern.

10.2 USB Modus

1. Die Mic-Fi App war am Arbeiten und plötzlich hört sie auf zu funktionieren:
 - a) Gerät vom PC trennen, Programm Mic-Fi“ schliessen.
 - b) Nachdem Sie 1 Minute gewartet haben, Gerät wieder anschließen und Programm “Mic-Fi” wieder öffnen
2. Nach Wiederründen der Pendel-PC funktioniert das Gerät nicht: Anwendung schliessen und wieder öffnen.
3. Alles ist korrekt installiert, funktioniert aber nicht: Gerät trennen und wieder anschließen, PC erneut starten lassen und bei Problemen Deinstallieren und SW wieder installieren.

11. ENTSORGUNG



Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss.

RS PRO erfüllt die Verpflichtungen des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014 (Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

Der Benutzer muss das Gerät daher entweder am Ende seiner Lebensdauer an die entsprechenden spezifischen Müllsammelzentren für elektronische und elektrotechnische Abfälle abgeben oder es beim Kauf eines neuen Geräts eines gleichwertigen Typs eins zu eins an den Händler zurückgeben.

Die sachgemäße getrennte Sammlung dieser Geräte sowie umweltgerechte Behandlung und Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen und die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien zu fördern.

Bei unsachgemäßer Entsorgung des Geräts durch den Nutzer drohen Verwaltungsstrafen gemäß den einschlägigen Bestimmungen.



ANGABEN ZUR ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND/ODER AKKUMULATOREN

Umsetzung der Richtlinie 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Alttakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG. Die Sammlung und das Recycling von Batterien trägt dazu bei, die potenziellen Auswirkungen der in diesen Komponenten verwendeten Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren.

ACHTUNG! Altbatterien gelten als Sondermüll! Entsorgen Sie sie nicht zusammen mit dem Hausmüll. Die Verbraucher sind verpflichtet, sie an einer Verkaufs- oder Sammelstelle abzugeben.

Die Verpflichtung zur kostenlosen Rücknahme von Altbatterien gilt für alle Verkaufs- und Sammelstellen und ist nicht an den Kauf neuer Batterien gebunden. Das Symbol auf Batterien und Akkumulatoren weist darauf hin, dass Batterien gemäß der EU-Richtlinie 2013/56/EU und den örtlichen Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Wenn unterhalb des Symbols ein chemisches Symbol angezeigt wird, weist dieses Symbol in Übereinstimmung mit der Richtlinie auf das Vorhandensein eines Schwermetalls (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in der Batterie hin, dessen Konzentration über einem in der Richtlinie festgelegten Grenzwert liegt. Die unautorisierte Entsorgung von Batterien durch den Benutzer beinhaltet die Anwendung von Verwaltungsstrafen im Sinne des Gesetzesdekrets Nr. 22/1997 "(Artikel 50 ff. des Gesetzesdekrets Nr. 22/1997)

12. GARANTIE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Produktes.

Dieses Produkt erfüllt die anspruchsvollsten Kriterien für die Auswahl hochwertiger Fertigungsmaterialien und die Endkontrolle.

RS PRO garantiert, dass dieses Produkt ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Damit Sie die Garantie in Anspruch nehmen können, muss der Kaufbeleg aufbewahrt werden.

Wenn Sie Informationen und/oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Mic-Fi:

assistance@mic-fi.com

Tel +39 (0)11 5690295

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit oder Missbrauch verursacht wurden.

Es besteht kein Anspruch auf Entschädigung für den Ausfall des Gerätes.

Darüber hinaus verlängert die während der Garantiezeit durchgeführte Ersatzlieferung oder Reparatur nicht die Dauer der Garantiezeit.

Die Garantie verfällt in folgenden Fällen:

- Das Produkt wurde manipuliert oder das Etikett auf dem USB-Kabel mit der Seriennummer wurde entfernt, beschädigt oder unleserlich gemacht.
- Das Produkt wurde beschädigt oder missbraucht.
- Das Produkt wurde von nicht autorisiertem Personal geöffnet oder repariert.
- Das Produkt ist durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung beschädigt worden.

Das Produkt wird nach unserem Ermessen repariert oder ersetzt.