



Balances Ranger[®] 7000

Manuel d'instructions



TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	4
1.1 Description	4
1.2 Caractéristiques	4
1.3 Définition des symboles et des indicateurs d'avertissements	4
1.4 Précautions de sécurité	4
2. INSTALLATION	5
2.1 Déballage	5
2.2 Installation des composants	6
2.2.1 Configuration du terminal	6
2.2.2 Installation de la virole, de la plateforme de pesage	6
2.3 Sélection de l'emplacement	6
2.4 Connexion de l'alimentation et mise SOUS TENSION de la balance	6
2.5 Connexion de l'interface	7
2.6 Mise de niveau de la balance	7
2.7 Fonctionnement du Terminal à distance	7
2.8 Séparation du terminal de la base de pesage	8
2.9 Montage du terminal	8
2.10 Étalonnage initial	8
2.10.1 Étalonnage interne	8
2.10.2 Étalonnage externe	8
3. FONCTIONNEMENT	9
3.1 Aperçu général de l'affichage et de l'écran d'accueil	9
3.2 Fonctions principales et Menu principal	10
3.3 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques	11
4. APPLICATIONS	12
4.1 Pesage	12
4.1.1 Paramétrage d'une application	12
4.1.2 Accumulation	13
4.1.3 ID de pesée	14
4.1.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	14
4.2 Comptage	15
4.2.1 Définition du poids moyen des pièces (APW)	15
4.2.2 Paramétrage d'une application	17
4.2.3 Intelligente Échantillonnage	17
4.2.4 Accumulation	19
4.2.5 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	19
4.2.6 Processus d'analyse STR	19
4.3 Vérification	20
4.3.1 Pesage de vérification (par défaut)	20
4.3.2 Comptage de vérification	21
4.3.3 Paramétrage d'une application	22
4.3.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	23
4.4 Formulation	24
4.4.1 Formulation libre (par défaut)	24
4.4.2 Formulation de la recette	25
4.4.3 Configuration du facteur et de la tolérance	26
4.4.4 Paramétrage d'une application	27
4.4.5 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	27
4.5 Pesage en pourcentage	28
4.5.1 Définition d'un Poids de référence	29
4.5.2 Paramétrage d'une application	29
4.6 Remplissage	30
4.6.1 Remplissage pondéral	30
4.6.2 Remplissage des pièces	31
4.6.3 Paramétrage d'une application	33
4.6.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	34
4.7 Pesage dynamique	35
4.7.1 Paramétrage d'une application	35
4.7.2 Réglage de la durée moyenne	36
4.7.3 Configuration des Entrées/sorties (E/S)	36
4.8 Détermination de la densité	38
4.8.1 Paramétrage d'une application	38
4.8.2 Configuration de la température de l'eau/de la densité du liquide	39
4.9 Pesage différentiel	40

4.9.1	Configuration d'une application.....	40
4.9.2	Fonctionnement en différentiel	41
4.10	Tamis de pesage.....	41
4.10.1	Réglage d'application	42
4.10.2	Opération du tamis.....	42
4.11	Bibliothèque.....	45
4.11.1	Création d'un enregistrement de bibliothèque	45
4.11.2	Récupération d'un enregistrement de bibliothèque	46
4.11.3	Modification d'un enregistrement mémorisé en bibliothèque	46
4.11.4	Suppression d'un enregistrement mémorisé dans la bibliothèque	47
4.12	Autres fonctions.....	47
4.12.1	Pesée sous la balance.....	47
5.	PARAMÈTRES DU MENU.....	48
5.1	Navigation dans le menu	48
5.2	Menu principal	49
5.3	Étalonnage	49
5.3.1	Sous-menu d'étalonnage	49
5.3.2	Étalonnage du zéro.....	49
5.3.3	Étalonnage de la portée	49
5.3.4	Étalonnage de la linéarité	49
5.3.5	Étalonnage interne (modèles R71MHD)	50
5.3.6	Étalonnage automatique (modèles R71MHD).....	50
5.3.7	Ajustement GEO AutoCal™ Adj (Le réglage).....	50
5.3.8	Ajustement GEO	51
5.4	Configuration.....	51
5.4.1	Sous-menu de configuration de la balance	51
5.4.2	Réinitialisation	51
5.4.3	Langue	51
5.4.4	Mise sous tension de l'unité	52
5.4.5	Power On Zéro	52
5.4.6	Bip de touche	52
5.4.7	Expand Display Agrandir l'affichage	52
5.4.8	Règle du Code à barres.....	52
5.4.9	Confirmation du code-barres	53
5.4.10	Type d'E/S.....	53
5.5	Visualisation de l'affichage.....	54
5.5.1	Réinitialisation	54
5.5.2	Stabilité	54
5.5.3	Plage du zéro.....	54
5.5.4	Niveau du filtre	54
5.5.5	Suivi automatique du zéro	54
5.5.6	Luminosité.....	55
5.5.7	Réduction automatique de l'éclairage (minutes).....	55
5.5.8	Veille automatique (minutes).....	55
5.5.9	Fenêtre en haut	55
5.6	Mode de l'application	55
5.6.1	Activation/désactivation d'une application.....	55
5.7	Unités de pesage.....	55
5.7.1	Sous-menu des unités	56
5.7.2	Réinitialisation	56
5.7.3	Activation/Désactivation d'une unité.....	56
5.8	Données BPL et BPF	56
5.8.1	Réinitialisation	57
5.8.2	Format de la date	57
5.8.3	Date	57
5.8.4	Format de l'heure.....	57
5.8.5	Heure.....	57
5.8.6	Identification du projet	57
5.8.7	ID de la balance.....	57
5.9	Communications	57
5.9.1	Réinitialisation	58
5.9.2	Débit en bauds	58
5.9.3	Parité	58
5.9.4	Bits d'arrêt	58
5.9.5	Établissement de liaison.....	58

5.9.6	Commande alternative	58
5.9.7	Balance de la Référence	58
5.9.8	Réinitialisation	58
5.9.9	Poids stabilisé seulement	58
5.9.10	SICS	58
5.9.11	Options d'impression	59
5.9.12	Impression automatique	59
5.9.13	Imprimer les données de Cal	60
5.9.14	Modèle Sélectionner	61
5.9.15	Modification d'un modèle	61
5.9.16	Modifier une série	62
5.9.17	Transferts données	62
5.10	Utilisateur	63
5.10.1	Profils des utilisateurs	64
5.10.2	Autorité de surveillance	66
5.10.3	Règle du mot de passe	66
5.11	Clé de verrouillage	66
5.12	Mémoire	67
5.12.1	Log Memory	67
5.12.2	Mémoire USB	68
5.12.3	Mémoire Alibi	68
5.13	Maintenance	71
5.13.1	Exportation de la bibliothèque	71
5.13.2	Exportation du profil de l'utilisateur	71
5.13.3	Importation des lecteurs de la bibliothèque	71
5.13.4	Importation du profil de l'utilisateur	71
6.	COMMUNICATIONS SÉRIE	72
6.1	Commandes de l'interface	72
6.2	Interface RS232	73
6.2.1	Connexion à un ordinateur	73
6.2.2	Connexion à une imprimante série	74
6.2.3	Spécifications du système	74
6.2.4	Connexion USB	74
6.2.5	Installation du logiciel du port virtuel	74
6.3	USB hôte	75
6.4	Format de l'impression	75
6.5	Exemples d'impression	76
7.	MÉTROLOGIE LÉGALE	77
7.1	Réglages	77
7.2	Vérification	77
7.3	Plombage	77
8.	MAINTENANCE	78
8.1	Étalonnage	78
8.2	Informations	78
8.3	Nettoyage	78
8.4	Dépannage	79
8.5	Informations de maintenance	79
8.6	Mises à jour du logiciel	79
9.	DONNÉES TECHNIQUES	80
9.1	Spécifications	80
9.2	Schémas et dimensions	81
9.3	Tableau des valeurs GEO	82
9.4	Options	83
9.5	Liste des icônes des boutons	84
10.	CONFORMITÉ	88

1. INTRODUCTION

1.1 Description

La balance Ranger 7000 est un instrument de pesage de précision qui offrira de longues années de service si son entretien est correctement assuré. Les balances Ohaus Ranger 7000 sont disponibles selon des capacités évoluant entre 3000 grammes et 60 kilogrammes.

1.2 Caractéristiques

Conception modulaire : Les balances Ohaus Ranger 7000 se composent de deux modules interconnectés : un Terminal et une Base. L'unité peut être utilisée en fonction des besoins de l'utilisateur avec le Terminal fixé sur la Base ou à distance au moyen d'un cordon d'interconnexion de 2 mètres. En option, un kit de tour et un cordon allongé sont aussi disponibles en tant qu'accessoires.

1.3 Définition des symboles et des indicateurs d'avertissements

Les remarques de sécurité sont marquées par des mots indicateurs et par des symboles d'avertissement. Elles présentent les problèmes et les avertissements de sécurité. Ne pas respecter les remarques de sécurité peut conduire à des accidents, à l'endommagement de l'instrument, à des dysfonctionnements et à des résultats erronés.

Mots indicateurs

AVERTISSEMENT	pour une situation dangereuse avec un risque moyen pouvant être à l'origine d'un accident ou d'un décès, s'il n'est pas évité.
PRÉCAUTIONS	pour une situation dangereuse avec un faible risque pouvant être à l'origine de dommages au dispositif ou aux biens, à une perte des données, ou à un accident, s'il n'est pas évité.
Attention	Pour des informations importantes sur ce produit
Remarque	Pour des informations utiles sur le produit

Symboles d'avertissement



Danger général



Danger de choc électrique



Courant alternatif



Information

1.4 Précautions de sécurité










Attention : Lire tous les avertissements de sécurité avant d'effectuer l'installation, les connexions ou les réparations de cet équipement. Si ces avertissements ne sont pas respectés, des accidents et/ou des dommages matériels peuvent en résulter. Conserver toutes les instructions pour référence ultérieure.

- Vérifier que la plage de tension d'entrée imprimée sur l'étiquette des données et que le type de connecteur correspondent à l'alimentation CA locale devant être utilisée.
- Ne connecter que des modèles fournis avec un cordon d'alimentation relié à la terre sur une prise murale à la terre.
- Positionner la balance pour qu'il soit facile de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise murale.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas un obstacle potentiel ou ne présente pas de danger de chute.
- Cette balance est exclusivement destinée à un usage en intérieur.
- Utiliser seulement la balance dans des lieux secs.
- Ne pas laisser tomber de charges sur le plateau.
- Utiliser uniquement les accessoires et les périphériques approuvés.
- Faire fonctionner l'équipement uniquement dans les conditions ambiantes spécifiées dans ces instructions.
- Déconnecter l'équipement de l'alimentation électrique pour le nettoyer.
- Ne pas utiliser l'équipement dans des environnements dangereux ou instables.
- L'entretien doit être exécuté exclusivement par un personnel autorisé.

2. INSTALLATION

2.1 Déballage

Sortir avec précaution la balance Ranger 7000r et chacun de ses composants hors de l'emballage. Les composants inclus varient en fonction du modèle de balance (voir le tableau ci-dessous). Conserver l'emballage afin d'assurer un stockage et un transport en toute sécurité.

Les composants comprennent		Photo	R71MHD 3 R71MHD 6	R71MD 3 R71MD 6	R71MHD1 5 R71MHD3 5	R71MD1 5 R71MD3 5 R71MD6 0
Terminal			X	X	X	X
Housse de protection			X	X	X	X
Base de pesage			X	X	X	X
Plateform e de pesage	210 x 210 mm		X			
Plateform e de pesage	280 x 280 mm			X		
Plateform e de pesage	311 x 371 mm				X	X
Pare-vent			X			
Disque compact	Manuel d'instruction s		X	X	X	X

2.2 Installation des composants

Se reporter aux illustrations et aux instructions ci-dessous pour identifier et assembler la balance Ranger 7000 avec ses composants. Tous les composants doivent être assemblés avant d'utiliser la balance.


2.2.1 Configuration du terminal

Lorsque la balance Ranger 7000 est livrée, le terminal est déjà fixé (arrimé) à la base. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. Se reporter aux illustrations et aux instructions ci-dessous pour identifier et assembler la balance Ranger 7000.

Remarque : Le terminal est identique pour tous les modèles de balance Ranger 7000.


2.2.2 Installation de la virole, de la plateforme de pesage

1. Mettre la virole en position (R71MHD3, R71MHD6).
2. Placez la plateforme sur la base de pesée.

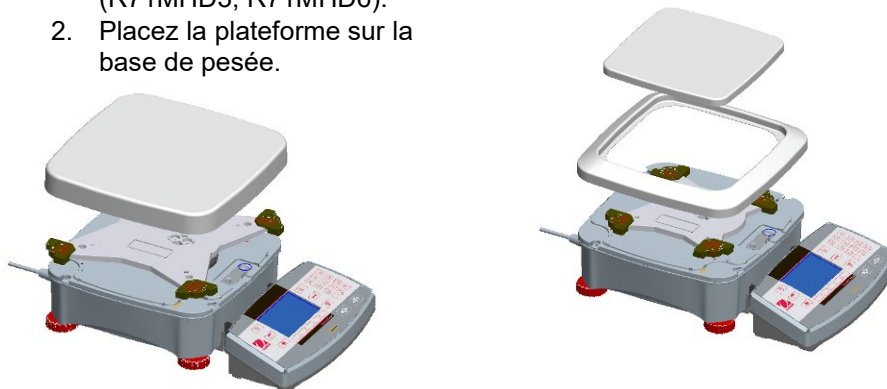

2.3 Sélection de l'emplacement

Éviter les vibrations excessives, les sources de chaleur, les courants d'air ou les variations rapides de température. Fournir suffisamment d'espace.

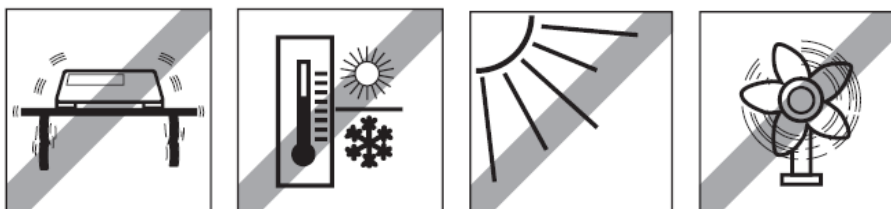

Remarque : Les câbles d'interface se connectent au terminal. Le terminal peut être séparé et monté sur un mur ou installé sur une table éloignée de la balance.

2.4 Connexion de l'alimentation et mise SOUS TENSION de la balance

La Ranger 7000 est livrée avec un cordon d'alimentation CA. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale correctement mise à la terre et appuyer sur le bouton MARCHE sur le côté de la base (voir la figure ci-dessous).



Bouton MARCHE

Bouton MARCHE sur le côté de la base




Attention : Laisser l'équipement se réchauffer pendant 60 minutes pour des performances optimum de pesage.


2.5 Connexion de l'interface

Ranger 7000 dispose de 4 interfaces à l'arrière du terminal:

- RS422: utilisé pour communiquer avec la base
- RS232: utilisé pour se connecter à un ordinateur ou une imprimante
- USB hôte
- USB esclave

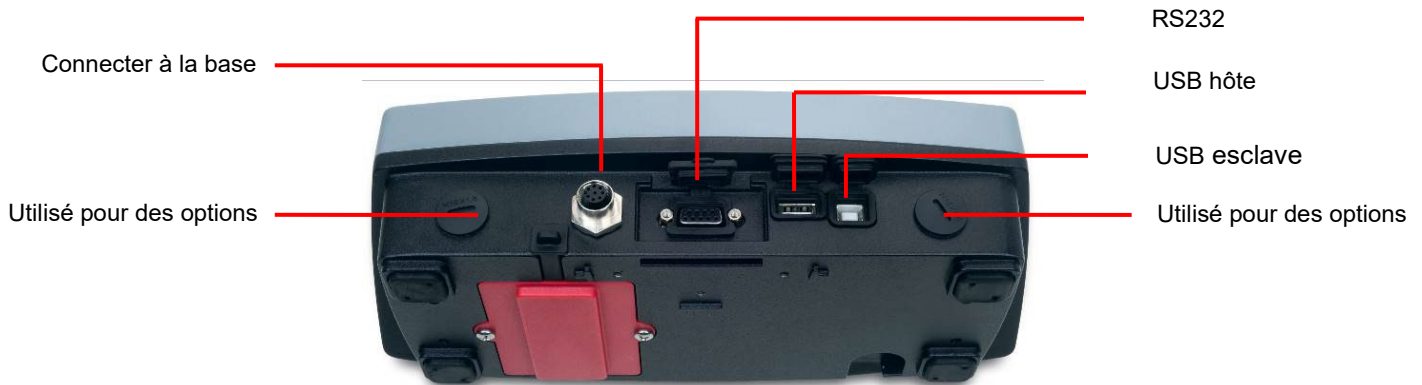


Connexions de l'interface à l'arrière du terminal.

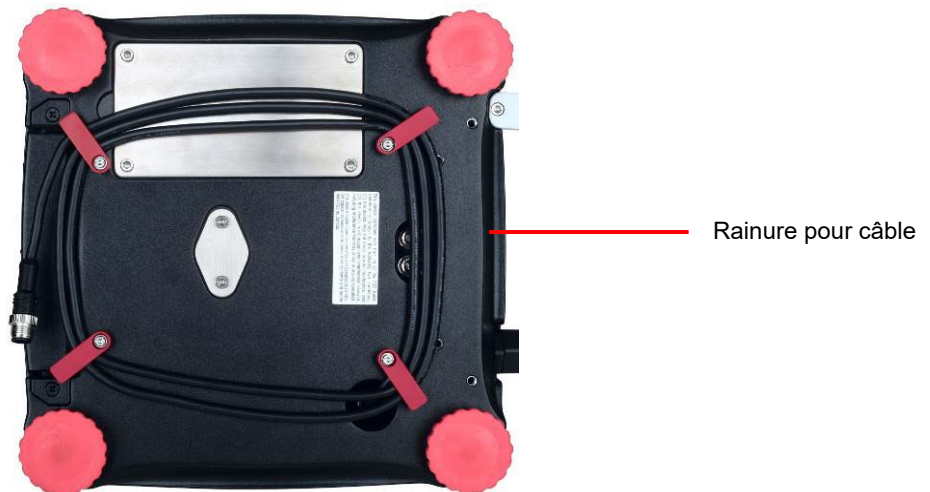

Enfiler le câble de l'imprimante avec les autres câbles en partie inférieure de la balance.
Sinon, passer le câble dans la rainure à proximité du bouton de libération.

2.6 Mise de niveau de la balance

Seules les balances ayant été mises de niveau avec précision sur le plan horizontal fournissent des résultats précis du pesage. Les balances certifiées possèdent un niveau à bulle pour simplifier l'alignement.

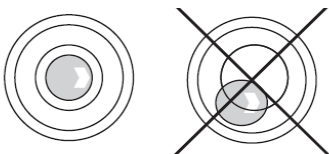

Faire tourner le pied réglable de la balance jusqu'à ce que la bulle du niveau se trouve dans le cercle interne.

2.7 Fonctionnement du Terminal à distance

Le terminal communique avec la base de pesage au moyen du câble du terminal. Ce câble doit être branché dans le terminal pour que l'affichage de la Ranger 7000 fonctionne correctement. Au besoin, la balance Ranger 7000 peut fonctionner avec le terminal attaché, ou à distance (1.5 m maximum).

2.8 Séparation du terminal de la base de pesage

1. Pour détacher, appuyer sur les boutons de libération vers l'intérieur (les deux simultanément) et tirer avec précaution le terminal vers l'extérieur jusqu'à sa séparation. Ces boutons de libération débloquent les deux crochets maintenant le terminal sur la base. Un câble est fixé au terminal. Prendre garde à ne pas endommager ou à déconnecter ce câble.
2. Pour rattacher le terminal, appuyer sur les deux boutons de libération et le faire glisser dans la base jusqu'à ce que les crochets s'encliquettent en position pour maintenir le terminal en place.

Boutons de libération





Base et terminal



2.9 Montage du terminal

Selon le besoin, le terminal peut être monté sur un mur ou sur une table en utilisant des systèmes de fixation (non fournis) qui sont adaptés à ce type de surface d'installation.

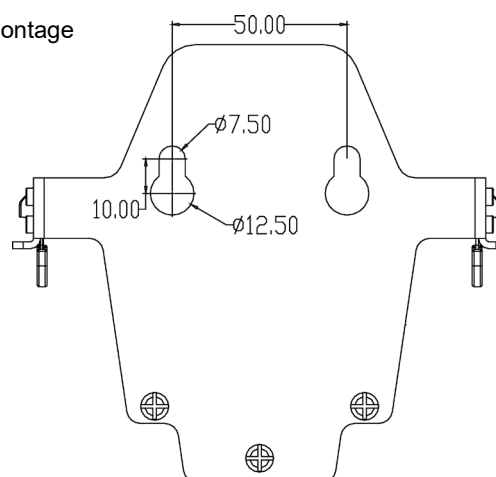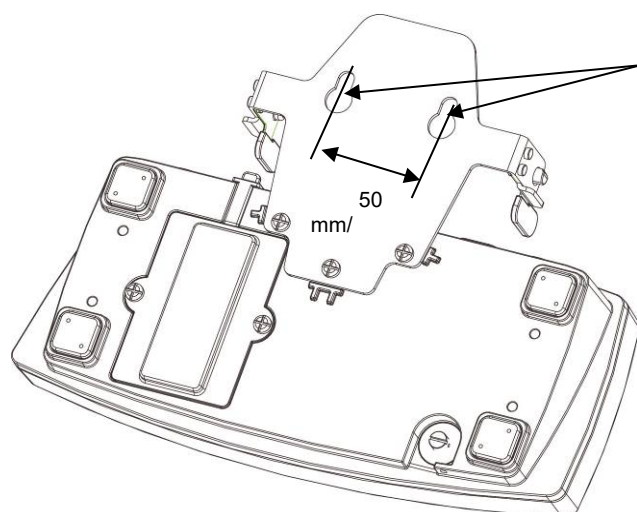

2.10 Étalonnage initial

Lorsque la balance est installée pour la première fois, ou si elle est déplacée vers un autre emplacement, elle doit être étalonnée afin d'assurer des résultats précis de pesage.

2.10.1 Étalonnage interne


Les modèles R71MHD sont équipés d'un système AutoCal qui peut étalonner automatiquement la balance sans devoir utiliser de masses d'étalonnage. Pour cette préférence, la balance peut être étalonnée manuellement avec des masses externes. Avoir à disposition les masses d'étalonnage appropriées avant de commencer cette opération. Se reporter à la section Étalonnage pour les procédures en matière de masse et d'étalonnage.

2.10.2 Étalonnage externe

Les modèles R71MD ne peuvent être étalonnés que manuellement avec des masses externes.

3. FONCTIONNEMENT

3.1 Aperçu général de l'affichage et de l'écran d'accueil

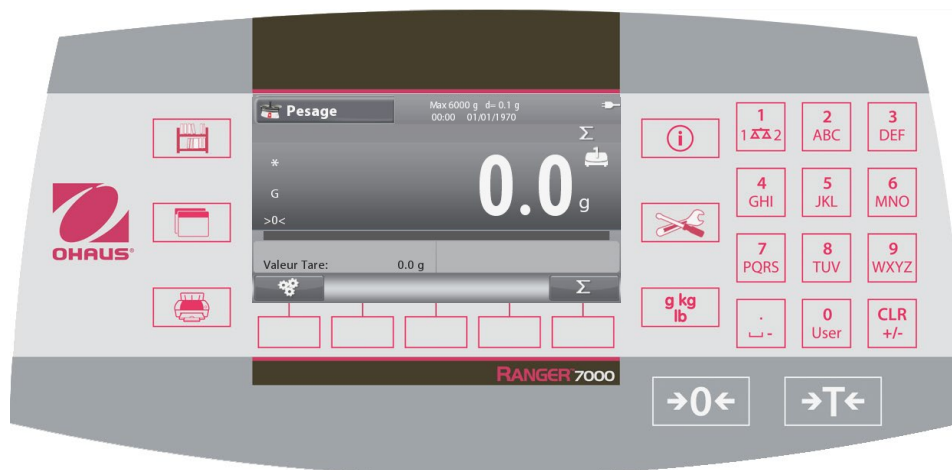

CONTRÔLES

Bouton	Action	
	Entrer/Quitter le menu de la bibliothèque	
	Commutation entre les modes d'application disponibles	
	Envoi des données de mesurage vers les ports de communication disponibles conformément aux paramètres en cours	
	Affichage des informations sur le mode Application, la bibliothèque, l'utilisateur et le menu	
	Entrer/Quitter le menu Utilisateur	
	Commutation entre l'unité de pesage principale et les autres unités disponibles	
	 	Appui court : Entrée 2-9 Pour entrer A, appuyer 2 fois. Pour Z en minuscules, appuyer 5 fois.
		Appui court : Entrée 0 Appui long : Rendez-vous sur l'écran de connexion de l'utilisateur
		Appui court : Entrée 1 Appui long : Commutation de plateforme entre la balance 1 et la balance 2
		Appui court : Effacement d'un caractère/de la chaîne de caractères lors de la modification d'une chaîne de caractères Si aucune entrée n'est active, effacement de la bibliothèque active en cours Si aucune valeur n'est ajoutée, une pression sur ce bouton permettra de commuter le signe de la valeur entre positif et négatif.
		Appui court : Entrée ., Espace, _ Pour entrer _, appuyer 3 fois.
	Fonctionnement du zéro	

Fonctionnement de la tare

En entrant la valeur en premier et en appuyant sur ce bouton, l'entrée du nombre sera réglée sur la prédéfinition de la valeur de la tare.

Mode en cours

Capacité

Stabili

Brut (NET pour indicateur net)

Champs de référence

Informations d'assistance

Champ du poids principal

Capacité ou guides d'état : Varient en fonction des applications

Icônes de fonction relatives aux boutons intelligents

3.2 Fonctions principales et Menu principal

NAVIGATION PARMI LES MENUS ET LES ÉCRANS

Appuyer sur le bouton **Menu** pour ouvrir la liste du menu.

Appuyer sur le bouton ci-dessous et sur pour descendre et monter dans la liste

Pour sélectionner l'élément en surbrillance, appuyer sur . Appuyer sur pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez également sélectionner chaque élément en appuyant sur le numéro du clavier qui correspond au numéro précédant chaque élément.


Par exemple, appuyer sur 1 sur le clavier pour sélectionner Calibration.

	Étalonnage : Sélectionner pour consulter les options d'étalonnage.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc; margin: -5px -5px 5px -5px;">Menu principal</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 1.Étalonnage </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 2.Paramétrage </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 3.Affichage </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 4.Applications </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 5.Unités de pesée </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> 6.Données BPL et BPF </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> </div> </div> </div> </div>	
	Configuration : Sélectionner pour examiner les préférences utilisateur.		
	Extraction : Sélectionner pour consulter les paramètres de la balance.		
	Modes application : Sélectionner pour voir les modes d'application.		
	Unités de pesage : Sélectionner pour voir les unités de pesage.		
	Données BPL et BPF : Insérer les données utilisateur pour la traçabilité.		
	Communications : Sélectionner pour consulter les paramètres de communication.		Clé de verrouillage Sélectionner pour modifier les paramètres de la clé de verrouillage
	Utilisateur Sélectionner pour afficher et modifier les paramètres de l'utilisateur.		Mémoire : Sélectionner pour consulter les paramètres de Mémoire USB et Mémoire Alibi.
			Maintenance : Sélectionner pour consulter les paramètres de maintenance.

3.3 Vue d'ensemble des pièces et des caractéristiques



4. APPLICATIONS

La balance peut être configurée pour fonctionner dans divers modes d'Application, se reporter à la section 5.6 pour des informations sur l'activation/la désactivation de chacun des modes d'application. Appuyer sur  pour sélectionner une application active. L'application en cours s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil (voir la section 3.1).

La Ranger 7000 incorpore les applications suivantes



Pesage



Comptage



Vérification



Formulation



Pesage en pourcentage



Remplissage



Dynamique (animaux)



Détermination de la densité



Différentiel




Test de gradation

Remarque : Avant d'utiliser une application, s'assurer que la balance est de niveau et étalonnée.

4.1 Pesage


Utiliser cette application pour déterminer le poids des articles dans l'unité de mesure retenue.

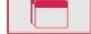Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Pesage** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil (il s'agit de l'application par défaut).

Appuyer au besoin sur **Tare** ou sur **Zéro** pour commencer.

Placer des objets sur le plateau pour en afficher le poids. Une fois la stabilité obtenue, * apparaîtra.

La valeur résultante est affichée sur la Ligne de pesage dans l'unité active de mesure.

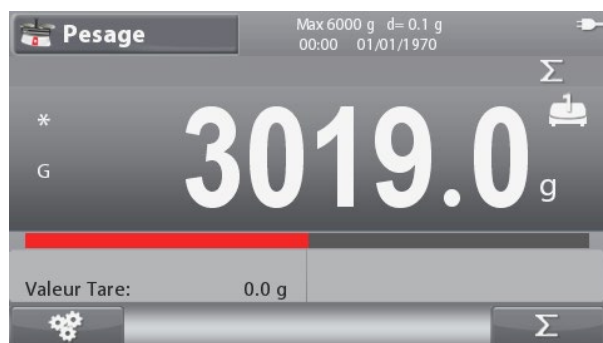

Écran d'accueil de **PESAGE**

Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions




Icône de l'application

Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.

4.1.1 Paramétrage d'une application


L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.





Appuyer sur la touche qui correspond à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.

L'écran **Configuration** est maintenant affiché.

Sélectionner la liste et appuyer sur le bouton

correspondant à , pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .


Configuration	
1.Auto tare	Inactif
2.Chaine Tare	Actif
3.Totaliser	Manuel
4.Statistiques	Inactif
   	


Les **Configurations de pesage** sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Tare automatique	Actif, Inactif	Pour activer la tare automatique
Tare continue	Actif , Inactif	Pour activer la tare continue
Accumulation	Inactif, Automatique, Manuel	Pour activer l'accumulation/la totalisation
Statistiques	Marche, Arrêt	Pour activer les statistiques

4.1.2 Accumulation

Pour démarrer l'Accumulation des données de pesage, placer l'article sur le plateau et appuyer sur le bouton


correspondant à l'icône . L'icône supérieure d'accumulation commencera à clignoter. La charge devant être accumulée doit être $\geq 5d$ et l'accumulation suivante ne peut démarrer que si le plateau est vide.

Remarque : L'icône Accumulation  ne sera visible que si Accumulation est défini sur Manuel (voir section 4.1.1).




Visualisation des résultats statistiques

Lorsque Statistiques est définie sur MARCHE, appuyer sur

le bouton info  pour consulter les résultats des statistiques.

Consultation des résultats de l'Accumulation

Pour afficher les résultats de l'accumulation, appuyer sur le bouton

info  et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à





l'icône .

L'écran **Accumulation Résultats** s'affiche.

Remarque : Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyer sur

le bouton .



Appuyer sur le bouton  pour imprimer le résultat de l'accumulation.


Résultat accumulation
Nb d'échantillons : 0
Total : 0.0 g
Moyenne : 0.0 g
Minimum : 0.0 g
Maximum : 0.0 g
Portée : 0.0 g
Presser touche [CLR] pour effacer les données d'accumulation
Presser touche impression pour imprimer les accumulations
   

Effacement des statistiques/des résultats de l'accumulation

Pour effacer les statistiques/les résultats de l'accumulation, appuyer

sur le bouton .


Un message d'avertissement apparaît. Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour confirmer la suppression ou appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour annuler la suppression et revenir à l'écran précédent.

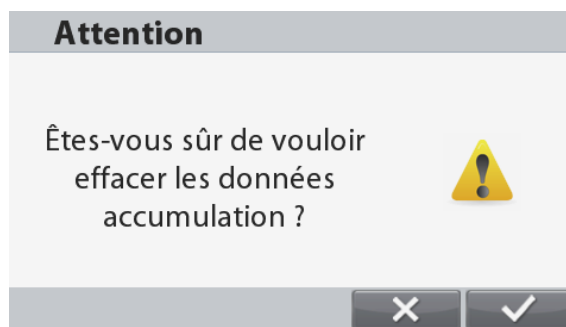



Remarque: Les informations accumule/statistique s'effacent automatiquement lorsque vous sélectionnez une nouvelle bibliothèque

4.1.3 ID de pesée

Pour configurer l'ID de pesée :

1. Appuyez sur le bouton correspondant à l'icône [ID].
2. Saisissez l'ID de pesée et appuyez sur le bouton correspondant à l'icône  pour confirmer. L'ID sera affiché à l'écran.

Note : Seul un identifiant peut être stocké dans cette fonction. La nouvelle entrée d'ID remplacerait les données précédentes.

Enter ID	
ID	TestID 001
 	

4.1.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)

Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.


Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut **Gras**).


Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Entrée discrète 2	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Sortie discrète 1	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 2	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 3	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 4	Inactif , Surcharge, Sous-charge

Remarque : Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations.


Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.



Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.

Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône

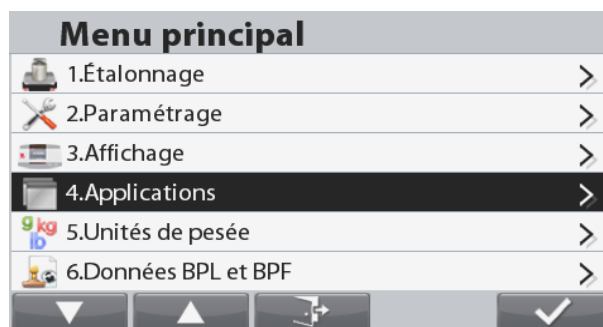

Dans le menu Mode de l'application, entrer dans le sous-menu **Pesage**.

Le sous-menu Pesage s'affiche alors.
Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

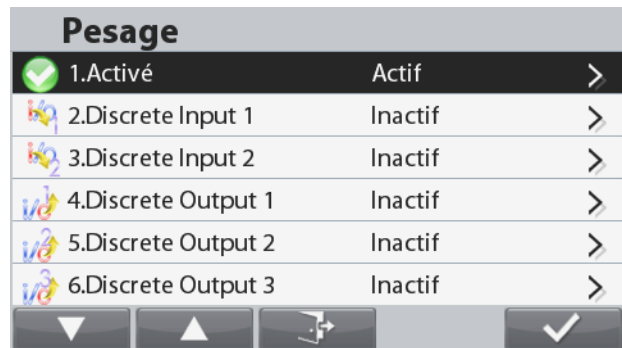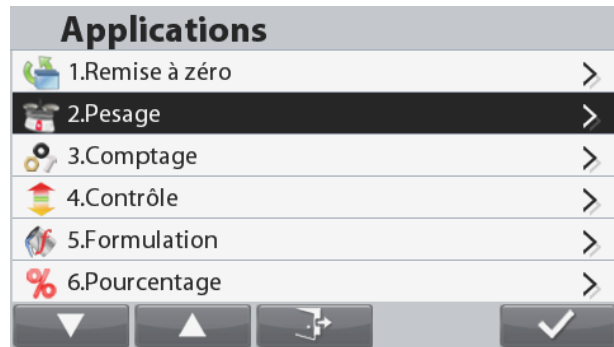

4.2 Comptage

Utiliser cette application pour compter les échantillons d'un poids uniforme.

Comptage

Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Comptage** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Le poids moyen unitaire (APW) par défaut (ou le dernier entré) s'affiche.

Régler la valeur APW conformément à la section 4.2.1 et placer ensuite les objets sur le plateau afin d'afficher le nombre de pièces.



Écran d'accueil **COMPTAGE**

Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions



Icône de l'application

Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.




4.2.1 Définition du poids moyen des pièces (APW)



Remarque : Il est recommandé que l'APW soit supérieur à 1d. Si l'APW se trouve entre 0,05d et 1d, un écran d'avertissement s'ouvrira et la ligne d'information affichera « APW faible ». Si l'APW est inférieur à 0,05d, un écran d'erreur s'ouvrira et la valeur APW ne pourra pas être mémorisée.


Trois moyens sont offerts pour le réglage de l'APW :

1. Échantillonnage positif

Placer l'échantillon sur le plateau, introduire le nombre de pièces en utilisant le clavier numérique et appuyer sur le bouton

correspondant à l'icône  pour confirmer.
 À titre d'alternative, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Un écran d'entrée numérique apparaît. Introduire le nombre de pièces désiré en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône .
 L'affichage revient à l'écran d'accueil.


Entrer PCS	
Échantillons	PCS
<div>   </div>	


Placez 10 pièces d'échantillon sur le plateau et appuyez sur le bouton correspondant à l'icône  pour effectuer l'échantillonnage avec la taille de référence par défaut.


Remarque:

La taille de référence peut être modifiée dans la configuration de comptage.

2. Échantillonnage négatif


Placer le récipient avec les échantillons sur le plateau et tarer la balance, un 0 NET s'affichera. Retirer les échantillons du récipient ; une valeur nette négative s'affichera. Introduire la taille de l'échantillon avec le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône . Les valeurs s'affichent à l'écran.



À titre d'alternative, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Un écran d'entrée numérique apparaît. Introduire le nombre de pièces désirées en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône .

L'affichage revient à l'écran d'accueil.

L'échantillonnage peut également être effectuée en


appuyant sur le bouton correspondant à l'icône  de la taille de référence prédéfinie.


Entrer PCS	
Échantillons	PCS
<div>   </div>	

3. Introduction d'un poids moyen unitaire (APW) connu :

Introduire le poids de la pièce en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône

 pour confirmer et mémoriser l'APW.

À titre d'alternative, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Un écran d'entrée numérique apparaît. Introduire le poids de la pièce en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône .

L'affichage revient à l'écran d'accueil avec la nouvelle valeur APW affichée dans le champ de référence.


Entrer APW	
Poids Unit	g
<div>   </div>	

Remarques :

Lorsque l'unité courante est métrique (g, kg), l'unité APW sera g.
 Lorsque l'unité courante est impériale (lb, oz), l'unité APW sera lb.


4.2.2 Paramétrage d'une application






L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.

Appuyer sur la touche qui correspond à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.

L'écran **Configuration** est maintenant affiché.

Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .

 Configuration	
1.Auto tare	Inactif
2.Chainé Tare	Actif
3.Totaliser	Manuel
4.Auto Opt.	Actif
5.APW Auto Save	Actif
6.Opt. Beep	Actif
   	

Les Configurations de comptage sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Tare automatique	Actif, Inactif	Mise sur marche/arrêt automatique de la tare
Tare continue	Actif , Inactif	Pour activer la tare (continue)
Accumulation	Inactif, Automatique, Manuel	Pour activer l'accumulation/la totalisation
Auto Opt.*	Actif , Inactif	Pour activer l'optimisation automatique de l'APW
Enregistrement automatique de l'APW*	Actif , Inactif	Pour activer l'enregistrement automatique de l'APW
Opt. Bip	Actif , Inactif	Pour activer le bip d'optimisation
Résolution interne	Actif , Inactif	Pour activer / désactiver la résolution de comptage interne
échantillonnage intelligent	On , Inactif	Pour activer / désactiver l'échantillonnage intelligent
Référence Taille	1... 10 ...999	Définir la taille de référence
Taille de référence du verrou	Actif, Inactif	Pour activer/désactiver le paramètre de Taille de référence

Remarque : * Si la valeur de l'APW est directement entrée (sans passer par l'échantillonnage ou calculée à partir de la balance de référence (affiché comme APW (B)), cette caractéristique ne fonctionne pas.

4.2.3 Intelligent Échantillonnage

Lorsqu'il est connecté à référencer l'équilibre ou 2ème plate-forme, l'échantillonnage intelligent permet à l'utilisateur d'effectuer l'échantillonnage sans passer manuellement les plates-formes.

Lorsque l'échantillonnage à puce est active

L'échantillonnage sera toujours effectuée à partir de la balance de référence (si le solde de référence est ON).

Si le solde de référence est OFF, l'échantillonnage sera effectué à partir de la plate-forme principale.

Appuyez sur le bouton correspondant à l'icône pour effectuer l'échantillonnage avec le poids sur la balance de référence (ou plate-forme principale si le solde de référence est OFF). Les résultats de comptage seront affichés sur la plate-forme actuelle.


Lorsque l'échantillonnage à puce est inactive:

L'échantillonnage sera effectué sur la plate-forme actuelle.



Remarque: Se référer à la section 5.9.7 sur la façon de se connecter à référencer l'équilibre.


Échantillonnage à l'aide de la balance de référence

1. Placer les échantillons sur la balance de référence.
2. Entrez le numéro de pièce. Vous pouvez le faire de deux manières :

- a) Saisissez le nombre de pièces à l'aide du clavier alphanumérique et appuyez sur le bouton correspondant à l'icône  pour confirmer.



- b) Vous pouvez également appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Un écran de saisie numérique apparaît. Saisissez ensuite le nombre de pièces à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur le bouton correspondant à l'icône .

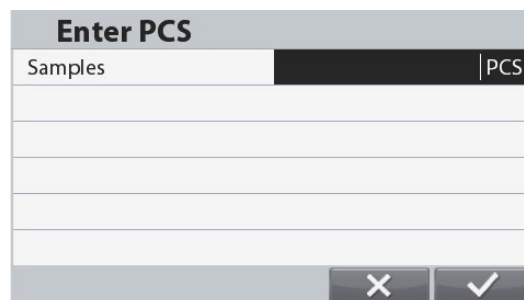

3. L'APW sera déplacé sur l'écran



Comptage à l'aide de la balance de référence

Pour compter avec la balance de référence après échantillonnage :

1. Placer les objets sur la balance de référence
2. Lisez le résultat du comptage à partir de « Balance PCS : »



4.2.4 Accumulation

Se reporter à la section 4.1.2 pour des détails sur la fonction d'accumulation.

4.2.5 Configuration des Entrées/sorties (E/S)



Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.


Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).

Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Entrée discrète 2	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Sortie discrète 1	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 2	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 3	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 4	Inactif , Surcharge, Sous-charge


Remarque : Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations.


Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.


Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône .

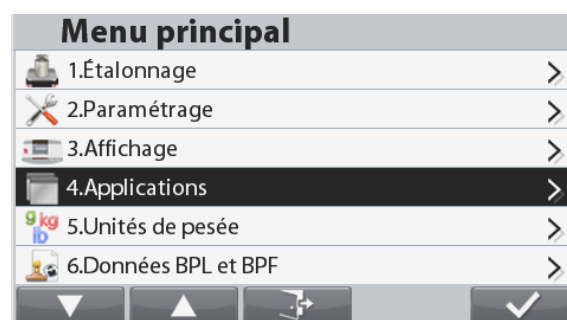

Dans le menu Mode de l'application, entrer le sous-menu **Comptage**.

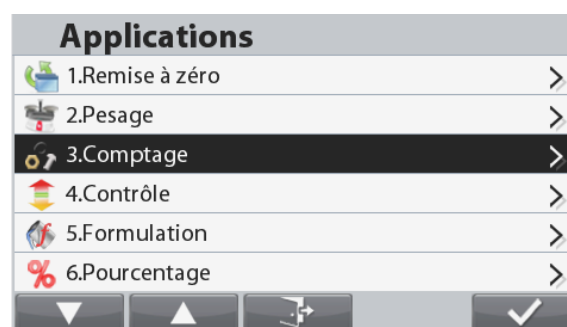

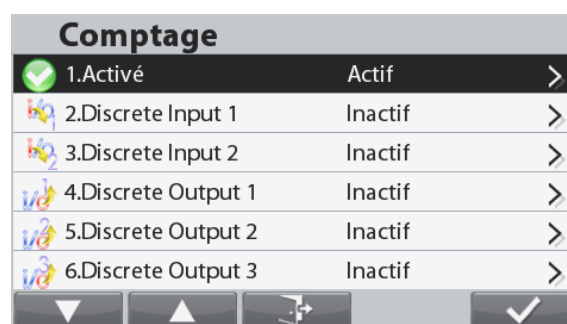

Le sous-menu Comptage s'affiche alors. Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.



Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.

4.2.6 Processus d'analyse STR

Le Ranger 7000 prend en charge l'analyse STR. Pour plus de détails, veuillez consulter [le processus de numérisation Ohaus STR](#).


Pour commuter entre **Charge supérieure/inférieure**, **Tolérance du poids cible**, **Pourcentage du poids cible**, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Si besoin, modifier la valeur en utilisant le clavier numérique et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.

Remarque :

- Les trois méthodes d'établissement des limites partagent les mêmes données.
- Lors du changement d'unité de pesée, les données seront automatiquement converties pour s'aligner sur l'unité de pesée actuelle

Modifier la limite	
Cible	50 PCS
Tolérance haute (+)	100 %
Tolérance basse (-)	98 %
▲	▼
↔	↺
↻	✓

4.3.2 Comptage de vérification

Appuyer sur le bouton de configuration  et sélectionner le Mode de vérification afin de vérifier le comptage. Placer des objets sur le plateau. L'état **Inférieur/Acceptable/Supérieur** est présenté sur la barre de progression alors que le nombre réel de pièces est présenté sur la ligne d'affichage principale.




Écran d'accueil de **VÉRIFICATION**

Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions


Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.

Définition du poids moyen des pièces (APW)

Remarque : Il est recommandé que l'APW soit supérieur à 1d. Si l'APW se trouve entre 0,05d et 1d, un écran d'avertissement s'ouvrira et la ligne d'information affichera « APW faible ». Si l'APW est inférieur à 0,05d, un écran d'erreur s'ouvrira et la valeur APW ne pourra pas être mémorisée.

Trois moyens sont offerts pour le réglage de l'APW, se reporter à la section 4.2.2 pour des instructions.


Définition des limites supérieures/inférieures

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans la **Configuration des limites**.

Remarque : Se reporter à la section 4.3.1 pour des informations sur la manière de régler les limites supérieures/inférieures.


4.3.3 Paramétrage d'une application


L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans le **Paramétrage de la configuration**.






Le **menu** Configuration est maintenant affiché.


Sélectionner un article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à , pour modifier le réglage à volonté.

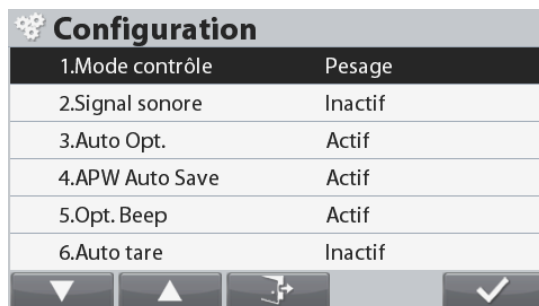Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .



L'affichage peut être commuté entre **Bloc** et **Barre**. Pour ce faire, sélectionnez **Affichage graphique** dans le menu de configuration. Appuyer sur  et ensuite sur .

ou sur  pour sélectionner.

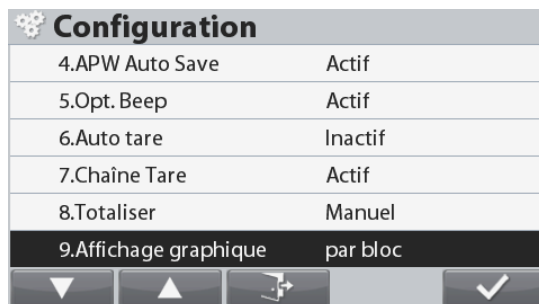

Les Configurations de vérification sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Vérifier le mode	Mode de vérification , comptage de vérification	Pour définir le Mode
Vérifier le point zéro	Actif , Inactif	Pour activer le contrôle au point zéro
Signal sonore	Inactif , Inférieur, Acceptable, Supérieur, Inférieur et Supérieur	Pour activer l'avertisseur
Auto Opt*	Actif , Inactif	Pour activer l'optimisation automatique de l'APW
Enregistrement automatique de l'APW*	Actif , Inactif	Pour activer l'enregistrement automatique de l'APW
Opt. Bip*	Actif , Inactif	Pour activer le bip d'optimisation
Tare automatique	Actif, Inactif , Acceptable	Pour activer la tare automatique « Acceptable » signifie que si le poids de l'objet se trouve dans une plage acceptable, la tare automatique sera réalisée
Tare continuelle	Actif , Inactif	Pour activer la tare continuelle
Accumulation	Inactif, Automatique, Manuel , Sur Accepter	Pour activer l'accumulation/la totalisation « Sur Accepter » signifie que si le poids de l'objet est à accepter plage, Accumulez automatique sera effectuée.
Affichage graphique	Barre, Bloc	Pour définir le type d'affichage graphique

Remarque : * Seulement disponible en mode de Comptage de vérification.

Vérification positive

Le pesage de vérification positive permet de déterminer si le matériel ajouté sur la balance se trouve dans la plage cible. Dans ce cas, les limites INFÉRIEURES et SUPÉRIEURES doivent être des valeurs positives. (La limite SUPÉRIEURE doit être plus grande ou égale à que la limite INFÉRIEURE).

Vérification négative

Le pesage de vérification négative permet de déterminer si le matériel enlevé de la balance se trouve dans la plage ciblée. Dans ce cas, les limites INFÉRIEURES et SUPÉRIEURES doivent être des valeurs négatives.

La limite INFÉRIEURE doit être plus grande ou égale à que la limite SUPÉRIEURE (par exemple : INFÉRIEURE = -10/SUPÉRIEURE = -15).

Placer l'article à peser sur la balance et appuyer ensuite sur le bouton **Tare**.

Enlever une partie de l'article jusqu'à ce qu'il se trouve dans la plage ACCEPTER.

Vérification du zéro

La vérification du zéro est utilisée pour comparer les échantillons suivants à l'échantillon initial de référence. Dans ce cas, le DÉPASSEMENT INFÉRIEUR doit être une valeur négative et le DÉPASSEMENT SUPÉRIEUR doit être une valeur positive. Placer l'article de référence sur la balance et appuyer ensuite sur le bouton **Tare**. Enlever l'échantillon de référence et placer l'article à comparer sur la plateforme de la balance pour déterminer s'il se trouve dans la plage ACCEPTER.

4.3.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)



Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.

Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**)



Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Entrée discrète 2	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Unité, Accumulation
Sortie discrète 1	Inactif , Supérieur, Inférieur, Accepter, Supérieur, Inférieur
Sortie discrète 2	Inactif , Supérieur, Inférieur, Accepter, Supérieur, Inférieur
Sortie discrète 3	Inactif , Supérieur, Inférieur, Accepter, Supérieur, Inférieur
Sortie discrète 4	Inactif , Sous, Sur, Accepter, Supérieur, Inférieur


Remarque : Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations. Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.







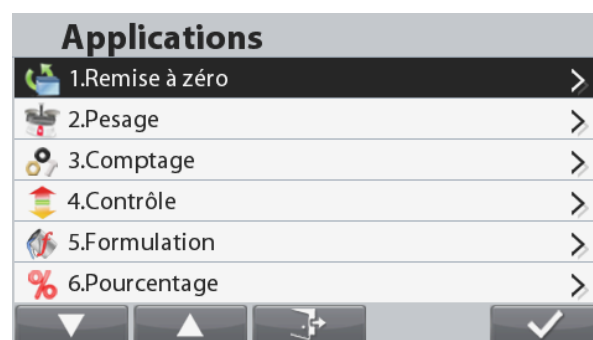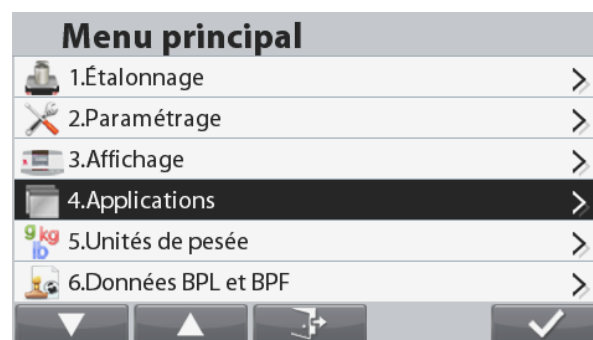



Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.

Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône .

Dans le menu Mode de l'application, entrer dans le sous-menu **Vérification**.



Le sous-menu Vérification s'affiche alors.
Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

Contrôle		
	1.Activé	Actif >
	2.Discrete Input 1	Inactif >
	3.Discrete Input 2	Inactif >
	4.Discrete Output 1	Inactif >
	5.Discrete Output 2	Inactif >
	6.Discrete Output 3	Inactif >
   		

4.4 Formulation

Utiliser cette application pour mélanger et réaliser des recettes. Le nombre de composants se situe entre 1 et 100.

La formulation détient deux modes disponibles de fonctionnement : **Formulation libre** et **Formulation de recettes**.

Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Formulation** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

4.4.1 Formulation libre (par défaut)

Ce mode de Formulation permet à l'utilisateur d'ajouter librement des composants. Une recette peut aussi être enregistrée et imprimée lorsque la formulation est terminée.



Écran d'accueil **FORMULATION**


Ligne d'affichage principale


Champs de référence

Fonctions




Icône d'application

Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer sur l'écran Introduction d'un composant.

Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier à volonté la valeur en utilisant le clavier numérique.

Si vous disposez d'une autre plateforme, vous pouvez indiquer ici quelle plateforme utiliser.





Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour confirmer toutes les valeurs et poursuivre avec la formulation.

Remarque : L'icône  n'apparaîtra que si toutes les valeurs requises ont été introduites (nom et poids cible).

Le poids cible introduit sera utilisé en tant que tare prédéfinie.

Placer le poids requis sur le plateau (ajouter du poids jusqu'à ce que la valeur affichée atteigne à nouveau zéro).


Lorsque le poids correspond à la plage de tolérance du poids

Entrée Compo.	
PN	
Nom	Comp1
Plate-forme	1
Poids	g
Tare	g
   	


cible, les chiffres d'affichage seront mis en évidence. Lorsque la valeur affichée atteint zéro, l'échelle émet un signal sonore.

Le signal de couleur indiquerait visuellement l'état de la formulation :

- Jaune : Sous l'objectif
- Vert : Atteindre l'objectif avec la tolérance
- Rouge : Au-dessus de l'objectif


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  afin de confirmer le poids du composant actuel et de continuer à ajouter d'autres composants.



Remarque : Pour terminer le processus de formulation, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Si le poids ajouté dépasse la limite de tolérance, une compensation sera réalisée conformément au paramètre de la configuration (À la fin, Arrêt, Immédiatement).

Lorsque la compensation est active (à la fin ou immédiatement), si le composant ajouté est dans la tolérance, Le signal de couleur est toujours de couleur verte.

Si un composant ajouté est en dehors de la tolérance, la balance effectuera la compensation pour les éléments suivants. Dans ce cas, la valeur affichée n'est pas le poids réel et Le signal de couleur devient rouge.


Pour terminer la formulation, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  et ajouter le dernier composant.

La formulation se terminera alors, et un écran des résultats de la formulation s'affiche.

Formulation Résultat				
Article	PN	Nom	Pds. Formu.	Pds. Actual
001		Comp1	50.0 g	88.2 g

Pour imprimer la formulation, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  ou sur le bouton .


Pour enregistrer le résultat de la formulation, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur le bouton correspondant à l'icône .


4.4.2 Formulation de la recette

S'assurer que le mode formulation est défini sur recette (consulter la section 4.4.4 pour des instructions).

La ligne d'information indiquera dorénavant « Veuillez rappeler une recette ».

Rappeler une recette depuis la bibliothèque de formulation en appuyant sur le bouton . Se reporter à la section 4.10 pour des instructions sur la manière de créer/rappeler un enregistrement de la bibliothèque.




Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  ou scanner un code à barres pour démarrer la formulation.



Le poids cible de chaque élément de la recette sera utilisé à titre de tare prédéfinie.

Placer le poids requis sur le plateau (ajouter du poids jusqu'à ce que la valeur affichée atteigne à nouveau zéro).

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  afin de confirmer le poids du composant actuel et de continuer à ajouter d'autres composants ou de scanner un autre code à barres pour le composant suivant.

Le signal de couleur indiquerait visuellement l'état de la formulation :

- Jaune : Sous l'objectif
- Vert : Atteindre l'objectif avec la tolérance
- Rouge : Au-dessus de l'objectif


Remarque : Pour terminer le processus de formulation, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Si le poids ajouté dépasse la limite de tolérance, une compensation sera réalisée conformément au paramètre de la configuration (À la fin, Arrêt, Immédiatement).


Lorsque la compensation est active (à la fin ou immédiatement), si le composant ajouté est dans la tolérance, Le signal de couleur est toujours de couleur verte.

Si un composant ajouté est en dehors de la tolérance, la balance effectuera la compensation pour les éléments suivants. Dans ce cas, la valeur affichée n'est pas le poids réel et Le signal de couleur devient rouge.

Lorsque tous les composants de la recette ont été ajoutés, la formulation se terminera alors, et un écran des résultats de la formulation s'affichera.


4.4.3 Configuration du facteur et de la tolérance

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  afin d'entrer dans l'écran des paramètres.

Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté en utilisant le clavier numérique.

Le composant **Facteur** peut être défini sur une valeur entre 0,20 et 5, avec 1 comme valeur par défaut.

La **Tolérance** peut être définie sur une valeur entre 0 et 15 %, avec 5 % comme valeur par défaut.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir à l'écran d'accueil de l'application.




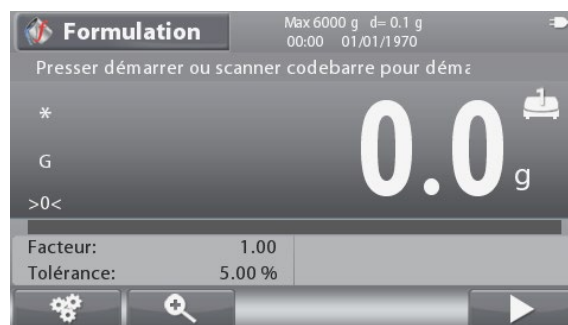
Remarque : Facteur et Tolérance ne peuvent être définis qu'après le démarrage de la formulation.

La tolérance est une valeur +/-, par exemple : Tolérance = 5 % signifie que la tolérance se situe dans la plage entre -5 % et +5%.


4.4.4 Paramétrage d'une application

L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.







Le **menu** Configuration est maintenant affiché.

Sélectionner un article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .

Configuration	
1.Mode Formulation	Libre
2.Mode Compensation	Corriger formule
3.Impr. date heure	Inactif

Les Configurations de formulation sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Mode de formulation	Libre , Recette	Pour définir le Mode
Mode de compensation	À la fin , Arrêt, immédiatement	Pour définir le mode de compensation
Date et heure d'impression	Inactif,actif	Pour activer ou désactiver l'impression de la date et de l'heure

4.4.5 Configuration des Entrées/sorties (E/S)



Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.

Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).


Remarque : Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations. Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.



Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif , Zéro, Tare, Effacement Tare, Quitter, Article suivant, Dernier article
Entrée discrète 2	Inactif , Zéro, Tare, Effacement Tare, Quitter, Article suivant, Dernier article
Sortie discrète 1	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 2	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 3	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 4	Inactif , Surcharge, Sous-charge

Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.

Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône .


Dans le menu Mode de l'application, entrer dans le sous-menu **Formulation**.

Le sous-menu Formulation s'affiche alors.
Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

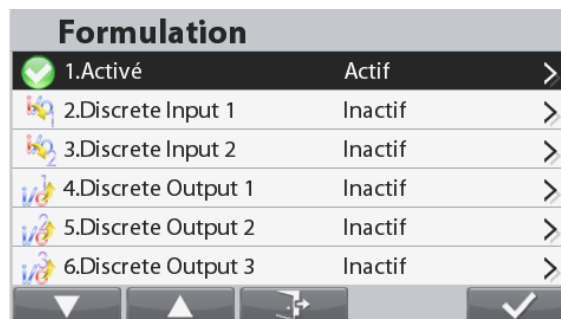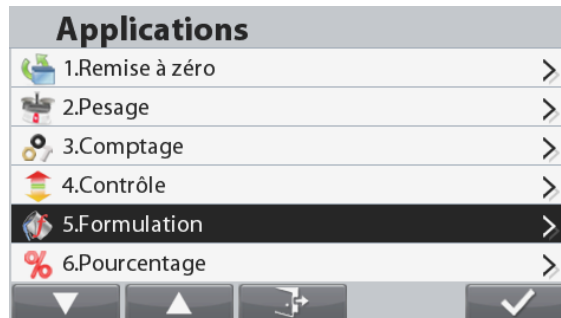

4.5 Pesage en pourcentage

Utiliser Pesage en pourcentage pour mesurer le poids d'un échantillon affiché en tant que pourcentage d'un poids de référence préétabli.

Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Pourcentage** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Déterminer un poids de référence conformément à la section 4.5.1 et placer ensuite les objets sur le plateau afin de vérifier le pourcentage.

La valeur par défaut (ou la dernière) Référence Masse est affichée.



Écran d'accueil **POURCENTAGE**


Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions

Icône d'application



Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.

4.5.1 Définition d'un Poids de référence

Trois manières sont à disposition pour établir un poids de référence :


1. Introduire la valeur pondéral de référence en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône




2. Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  afin d'entrer dans l'écran **Modification du poids de référence**.

L'écran **Modification du poids de référence** s'affiche.

Introduire la valeur désirée en utilisant le clavier numérique et


- appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône  pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil de l'application.

3. Placer le poids de référence sur le plateau et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .





4.5.2 Paramétrage d'une application


L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.

- Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.



- Le menu **Configuration** est maintenant affiché.
- Sélectionner un article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .

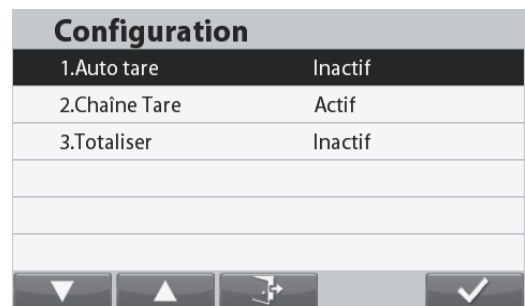

Les Configurations de pourcentage sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Tare automatique	Actif, Inactif	Pour activer la tare automatique
Tare continue	Actif , Inactif	Pour activer la tare continue
Accumulation	Inactif , Automatique, Manuel	Pour entrer dans Accumulation/Totalisation

4.6.2 Remplissage des pièces

Assurez-vous que le mode de remplissage est réglé sur Remplissage de pièces dans le menu de configuration .



Le poids cible par défaut (ou le dernier) est affiché. Placez les objets sur le plateau pour commencer.




L'écran d'accueil de Remplissage de pièces

Ligne d'affichage principale




Champs de référence

Fonctions


Remarque: Reportez-vous à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour obtenir des explications sur l'icône du bouton.


Configuration des pièces cibles et des points de consigne

Il y a trois façons d'établir le nombre de pièces cibles :

1. Placer les morceaux sur la casserole et appuyez sur le bouton  correspondant à l'icône.
2. Entrer la valeur des pièces à l'aide du clavier alphanumérique et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .
3. Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  (Point de Consigne) pour accéder à l'écran **Modifier les paramètres**.

L'écran **Modifier les paramètres** est maintenant affiché.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour basculer entre Pièces, Tolérance et Pourcentage.

Sélectionner l'élément de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône , pour modifier le paramètre comme souhaité à l'aide du clavier alphanumérique.

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'application, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône



Modifier la limite	
Cible	100 PCS
SP1	90 PCS
SP2	95 PCS







Modifier la limite	
Cible	100 PCS
Cible-SP1	10 PCS
Cible-SP2	5 PCS

Modifier la limite	
Cible	100 PCS
SP1	90.00 %
SP2	95.00 %


Fixer le poids moyen des pièces (APW)

Remarque: Il est recommandé que l'APW soit supérieur à 1d. Si la valeur de l'APW se situe entre 0,05d et 1d, un écran d'avertissement s'affiche et la ligne d'information indique "APW faible". Si le PAW est inférieur à 0,05d, un écran d'erreur s'affiche et la valeur du PAW ne peut pas être enregistrée.


Il y a trois façons de fixer l'APW :

1. Échantillonnage positif

Placer l'échantillon sur le plateau, puis saisir le nombre de pièces à l'aide du clavier alphanumérique et appuyer longuement sur le bouton correspondant

à l'icône pour confirmer .

Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton correspondant à l'icône

. Un écran de saisie numérique apparaît.

Saisir le nombre de pièces souhaité à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyer sur le bouton

correspondant à l'icône .

L'affichage revient à l'écran d'accueil.

2. Échantillonnage négatif


Placer le récipient avec les échantillons sur le plateau et tarer la balance, un NET 0 s'affiche. Retirer les échantillons du récipient ; une lecture nette négative s'affiche. Saisir la taille de l'échantillon à l'aide du clavier numérique, puis appuyer longuement sur le bouton

correspondant à l'icône . La valeur sera affichée à l'écran.

Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton correspondant à l'icône .

Un écran de saisie numérique apparaît.

Saisir le nombre de pièces souhaité à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyer sur le bouton

correspondant à l'icône .

L'affichage revient à l'écran d'accueil.

3. Entrer dans un APW connu

Saisir le poids à la pièce à l'aide du clavier alphanumérique et appuyer longuement sur le bouton


correspondant à l'icône  pour confirmer et enregistrer le poids à la pièce.

Vous pouvez également appuyer longuement sur le

bouton correspondant à l'icône .

Un écran de saisie numérique apparaît.

Saisir le poids de la pièce à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyer sur le bouton



correspondant à l'icône .



L'affichage revient à l'écran d'accueil avec la nouvelle valeur APW affichée dans le champ de référence.

Remarques:

Lorsque l'unité courante est le système métrique (g, kg), l'unité APW est le g.

Lorsque l'unité de pesage courante est l'unité impériale (lb, oz), l'unité APW est le lb.

Entrer PCS	
Échantillons	PCS
<div>   </div>	

Entrer PCS	
Échantillons	PCS
<div>   </div>	

Entrer APW	
Poids Unit	g
<div>   </div>	

Attendre et continuer


Si vous avez besoin de faire une pause après avoir commencé la pesée, vous pouvez appuyer sur le bouton




Pendant cette période, la pesée ne sera pas mise à jour. Pour continuer, appuyer à nouveau sur le bouton




Si vous devez vous arrêter après avoir commencé à peser,

vous pouvez appuyer sur le bouton . Le processus de pesée reviendra au début, mais votre résultat de pesée précédent sera conservé.

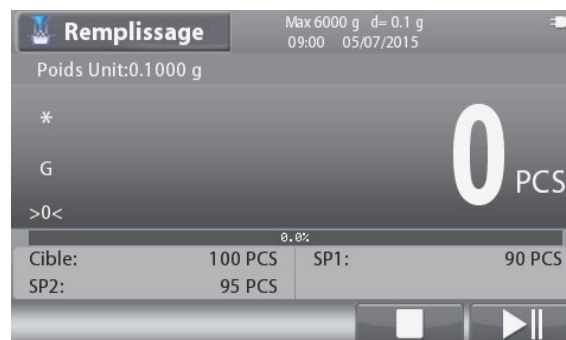

4.6.3 Paramétrage d'une application

L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.




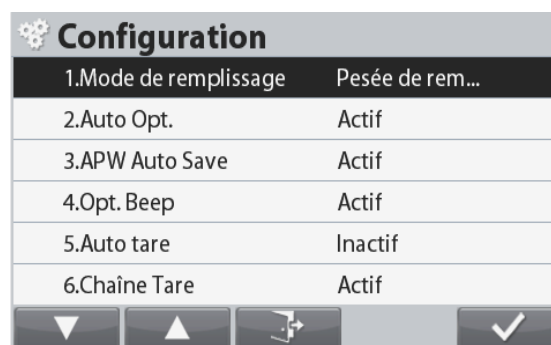
Le menu **Configuration** est maintenant affiché.

Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton

correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le

bouton correspondant à l'icône .



Les Configurations de remplissage sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Tare automatique	Actif, Inactif	Pour activer la tare automatique
Tare continue	Actif , Inactif	Pour activer la tare continue
Accumulation	Inactif , Manuel	Pour activer l'accumulation/la totalisation
Mode de remplissage	Pesage de remplissage ; comptage de remplissage	Pour sélectionner entre différents modes de remplissage.
Opt. auto.	Actif , Inactif	Pour activer l'optimisation automatique de l'APW
Sauvegarde automatique APW	Actif , Inactif	Pour permettre l'enregistrement automatique d'APW
Opt. bip	Actif , Inactif	Pour permettre le bip d'optimisation

4.6.4 Configuration des Entrées/sorties (E/S)

Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.

Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).

Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif, Zéro, Tare, Effacer Tare, Imprimer, Démarrer/Arrêter, Pause/Continuation
Entrée discrète 2	Inactif, Zéro, Tare, Effacer Tare, Imprimer, Démarrer/Arrêter, Pause/Continuation
Sortie discrète 1	Inactif , SP1, SP2, Cible, Alarme
Sortie discrète 2	Inactif , SP1, SP2, Cible, Alarme
Sortie discrète 3	Inactif , SP1, SP2, Cible, Alarme
Sortie discrète 4	Inactif , SP1, SP2, Cible, Alarme



Remarque :

La sortie sera remis à ouvrir normalement lorsque les deux SP1 et SP2 sont atteints.

Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations. Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.

Les sorties aussi ne fonctionneront que si le bouton correspondant à l'icône  a été appuyé.

Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.












Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône .












Dans le menu Mode de l'application, entrer dans le sous-menu **Remplissage**.












Le sous-menu Remplissage s'affiche alors.

Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton

correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

Menu principal	
 1.Étalonnage	>
 2.Paramétrage	>
 3.Affichage	>
 4.Applications	>
 5.Unités de pesée	>
 6.Données BPL et BPF	>
    	

Applications	
 2.Pesage	>
 3.Comptage	>
 4.Contrôle	>
 5.Formulation	>
 6.Pourcentage	>
 7.Remplissage	>
    	


Remplissage		
	1.Activé	Actif >
	2.Discrete Input 1	Inactif >
	3.Discrete Input 2	Inactif >
	4.Discrete Output 1	Inactif >
	5.Discrete Output 2	Inactif >
	6.Discrete Output 3	Inactif >
    		


4.7 Pesage dynamique


Utiliser cette application pour peser une charge instable comme un animal qui bouge. Il est possible de sélectionner trois modes différents de démarrage/réinitialisation : **Manuel** (démarrage et arrêt en appuyant sur une touche), **Semi-automatique** (démarrage automatique avec réinitialisation manuelle) et **Automatique** (démarrage et arrêt automatiques).

Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Dynamique** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour démarrer le moyennage.

Pour annuler le moyennage, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Lorsque le moyennage est terminé, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour réinitialiser.

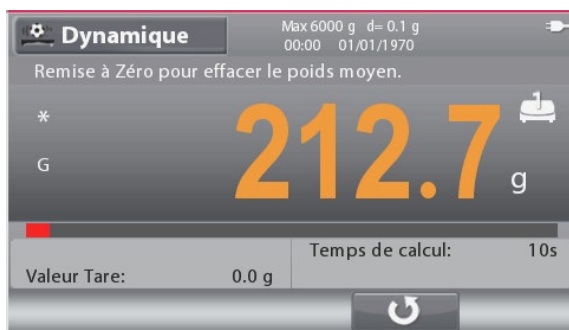

Écran d'accueil **DYNAMIQUE**


Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions




Icône d'application

Remarque : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.

4.7.1 Paramétrage d'une application

L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer sur **Configuration de l'application**.








Le menu **Configuration** est maintenant affiché.

Sélectionner un article de la liste et appuyer sur le bouton

correspondant à  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le


bouton correspondant à .


Configuration	
1.Mode dynamique	Manuel
2.Auto tare	Inactif
3.Chaîne Tare	Actif
4.Totaliser	Inactif
5.durée	10
    	

Les Configurations dynamiques sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).

Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Mode Dynamique	Manuel, Semi-automatique, Automatique,	Réglage du Mode
Tare automatique	Actif, Inactif	Pour activer la tare automatique
Tare continue	Actif , Inactif	Pour activer la tare continue
Accumulation	Inactif , Automatique, Manuel	Pour activer l'accumulation/la totalisation
Durée	1... 10 S	Réglez le temps de durée en secondes


4.7.2 Réglage de la durée moyenne

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer sur l'écran **Modification de la durée moyenne**.

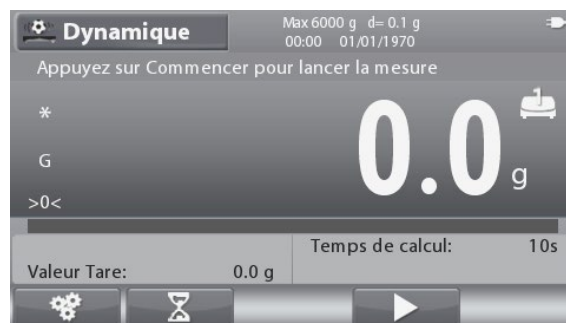

L'écran **Modification de la durée moyenne** s'affiche.



Introduire la durée moyenne en utilisant le clavier numérique et

appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier/enregistrer la valeur et revenir à l'écran d'accueil de l'application.

La durée moyenne par défaut est de 10 s.

Remarque : Lorsque la durée est définie sur 0, le premier poids stable au-dessus de 5d sera affiché.

La durée moyenne peut être définie sur une valeur entre 0 et 60.

Editer Temps de calcul	
Temps de calcul	10 s
 	

4.7.3 Configuration des Entrées/sorties (E/S)



Les E/S peuvent être personnalisées selon diverses préférences de l'utilisateur.

Les E/S sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en **Gras**).


Article	Paramétrages disponibles
Entrée discrète 1	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Démarrer, Réinitialiser
Entrée discrète 2	Inactif , Zéro, Tare, Effacement tare, Impression, Démarrer, Réinitialiser
Sortie discrète 1	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 2	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 3	Inactif , Surcharge, Sous-charge
Sortie discrète 4	Inactif , Surcharge, Sous-charge






Remarque : Les E/S ne fonctionneront que si la carte E/S en option a été installée. Se reporter à la liste des accessoires de la section 9.4 pour des informations. Cette carte E/S fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais normalement ouvertes à contacts secs qui peuvent être utilisées pour procéder aux pesages simples.








Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu principal.











Avec le bouton correspondant à l'icône , descendre dans la liste et mettre en surbrillance **Mode de l'application**. Entrer dans ce sous-menu en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône .

Dans le menu Mode de l'application, entrer le sous-menu **Dynamique**.

Le sous-menu Dynamique s'affiche alors. Sélectionner l'article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour modifier le réglage à volonté.

Menu principal			
	1.Étalonnage	>	
	2.Paramétrage	>	
	3.Affichage	>	
	4.Applications	>	
	5.Unités de pesée	>	
	6.Données BPL et BPF	>	
			

Applications		
	3.Comptage	>
	4.Contrôle	>
	5.Formulation	>
	6.Pourcentage	>
	7.Remplissage	>
	8.Dynamique	>
		

Dynamique		
	1.Activé	Actif >
	2.Discrete Input 1	Inactif >
	3.Discrete Input 2	Inactif >
	4.Discrete Output 1	Inactif >
	5.Discrete Output 2	Inactif >
	6.Discrete Output 3	Inactif >
		 


4.8 Détermination de la densité



La balance Ranger 7000 peut être utilisée pour déterminer la densité d'un objet. Deux types de détermination de la densité peuvent être réalisés :

1. Solides *plus* denses que l'eau
2. Solides *moins* denses que l'eau

Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que **Densité** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Avant de réaliser des mesures de densité, déterminer le paramétrage de l'application.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour démarrer.

Vérifier le poids de l'objet dans l'air, et à l'invite, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Vérifier le poids de l'objet à nouveau lorsqu'il est submergé dans le liquide, et à l'invite, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . La densité de l'objet sera affichée.



Écran d'accueil **DENSITÉ**


Ligne d'affichage principale

Champs de référence

Fonctions




Icône d'application

Remarques : Se reporter à la section 9.5, ou appuyer sur le bouton  pour une explication de l'icône du bouton.


4.8.1 Paramétrage d'une application


L'application peut être personnalisée selon les diverses préférences de l'utilisateur.


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans la **Configuration**.



Le menu **Configuration** est maintenant affiché.

Sélectionner un article de la liste et appuyer sur le bouton correspondant à  pour modifier le réglage à volonté.

Pour revenir à l'écran d'accueil des applications, appuyer sur le bouton correspondant à .

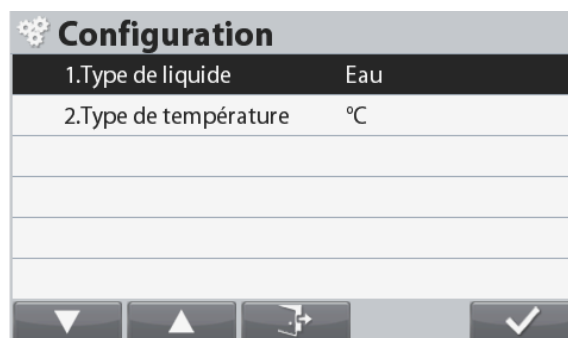

Les Configurations de détermination de la densité sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).


Article	Paramétrages disponibles	Commentaires
Type de Liquide	Eau, Autres*	Pour définir le type de liquide
Type de température	°C, °F	Pour définir le type de température

Remarque : *d'autres liquides qui ne sont pas de l'eau.

4.8.2 Configuration de la température de l'eau/de la densité du liquide


Pour définir la température de l'eau ou la densité du liquide (des liquides autres que de l'eau), veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Type de liquide : Eau

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans l'écran **Introduction de la température de l'eau**.

L'écran **Introduction de la température de l'eau** s'affiche.


Introduire la température de l'eau en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à

l'icône  pour enregistrer la valeur et revenir à l'écran précédent.



Entrer température eau	
Température eau	°C
<div> × ✓ </div>	


Type de Liquide : Autres

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer dans l'écran **Introduction de la densité du liquide**.




Entrer densité liquide	
Liquide densité	g/cc
<div> × ✓ </div>	

L'écran **Introduction de la densité du liquide** s'affiche.

Introduire la densité du liquide en utilisant le clavier numérique et appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône  pour enregistrer la valeur et revenir à l'écran précédent.


4.9.2 Fonctionnement en différentiel


Pour démarrer la pesée différentielle, suivre les instructions ci-dessous.


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour entrer sur le menu **Modification article**.




Le menu **Modification article** s'affiche.

Appuyer sur  pour ajouter un nouvel article. Un maximum de 20 articles peut être créé.

Appuyer sur , l'article en cours est sélectionné et la balance revient à l'écran principal afin de démarrer le pesage différentiel.

Appuyer sur  pour modifier le nom et les valeurs de l'article.

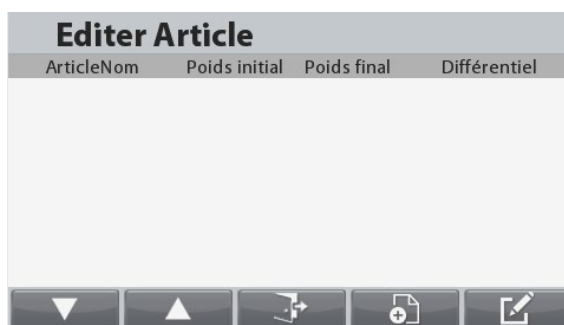


Remarque : Toutes les données seront automatiquement effacées lorsque la balance est mise hors tension.

Un article doit être sélectionné pour démarrer une opération différentielle.

4.10 Tamis de pesage

L'analyse du tamis (ou test de gradation) est une pratique ou procédure utilisée pour accéder à la distribution de la taille de particule (également appelée gradation) d'un matériel granulaire. Il peut être effectué sur tout type de matériels granulaires organiques ou non inorganiques y compris le sable, les pierres concassées et les agrégats, l'argile, le granite, le feldspath, l'asphalte, le béton, le charbon, le sol ainsi qu'une grande gamme de poudres, les grains et les semences manufacturés.

Appuyer sur  le bouton jusqu'à ce que le **Tamis** s'affiche dans la portion gauche supérieure de l'écran d'accueil.



Écran d'accueil du **TAMIS**


Ligne d'affichage principale


Champs de référence

Fonctions



Icône d'application


Remarque: Se référer à la section 9.5 ou appuyer sur le bouton  pour l'explication de l'icône du bouton.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour démarrer le tamis de pesage.




Entrer un ID d'échantillon si nécessaire.


Remarque: ID d'échantillon peut avoir jusqu'à 10 caractères alphanumériques et peut être imprimé sur le modèle de sortie.

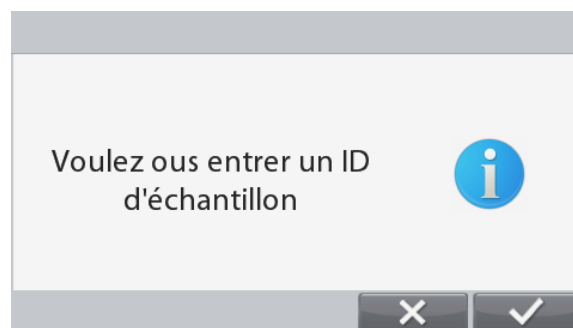


Poids, entrée manuellement, l'échantillon original comme poids de démarrage si nécessaire.

Remarque: Cet écran n'apparaîtra pas si le poids de démarrage est choisi pour le calcul dans la **Configuration**.

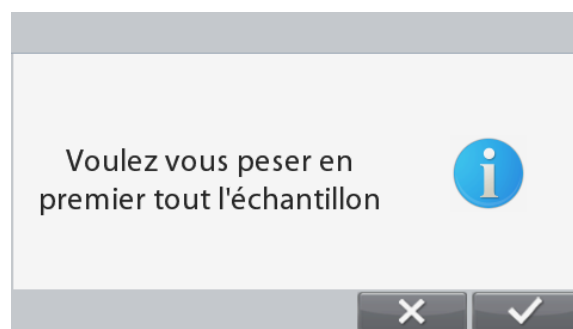


Ajouter Démarrer poids et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Alternativement, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .


Un écran d'entrée numérique s'affiche.


Entrer le poids d'entrée en utilisant le clavier alphanumérique,

appuyer ensuite sur le bouton correspondant à l'icône .




Retirer le poids original pour le traitement ou le secouement.

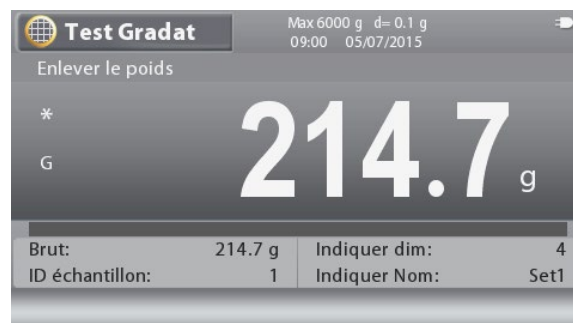


Une fois le traitement ou le tamisage terminé, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour démarrer l'analyse du tamis.



Placer le récipient sur le moule. La balance effectuera un pesage auto.

Remarque: Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour annuler le processus actuel si nécessaire.



Vider le contenu du tamis dans le récipient et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .



Une fois tous les tamis pesés, l'écran du résultat s'affiche.

Pour imprimer le résultat du tamis, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  ou le bouton .

Pour retourner à l'écran principal, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Test Gradat Résultat				
Articl	Sieve	retained	% retained	% passed
04	3mm	33.7 g	17.79%	82.21%
03	2mm	71.5 g	37.75%	44.46%
02	1mm	54.7 g	28.88%	15.58%
01	Pan	29.5 g	15.58%	0.00%

[Printer] [Home]

4.11 Bibliothèque


Lorsqu'un article est régulièrement traité, ses données peuvent être enregistrées en mémoire pour une utilisation ultérieure. Cette mémoire se réfère à la bibliothèque de la balance.

Les données suivantes sont enregistrées pour l'application utilisée:

Applicati on	PN (Référé nce)	No m	Tare prédéfinie	Poids moyen unitaire	Référen ce/ Cible Poids	Jours d'expir ation	Remarq ue	Vérification des limites	SP Points de consigne	Taille du tamis Calculer FM	Nombre maximum d'enregistrements	Plat e forme
Pesage	x	x	x			x	x				2000	
Comptage	x	x	x	x		x	x				2000	
Pourcentage	S. O.										x	
Vérification	x	x	x	x		x	x	x			2000	
Dynamique	S. O.										x	
Remplissage	x	x	x	x	x	x	x		x		2000	
Formulation	x	x	x		x	x	x				50	x
Différentiel	S. O.										x	
Densité	S. O.										x	
Tamis		x								x	30	


Remarques : La longueur maximum de la référence et du nom s'élève à 30 caractères.
Pour la bibliothèque de formulation, chaque enregistrement peut mémoriser un maximum de 30 composants.
Pour la bibliothèque tamis, chaque enregistrement peut stocker un maximum de 10 tailles.

4.11.1 Création d'un enregistrement de bibliothèque

Pour créer un enregistrement de bibliothèque, appuyer sur le bouton Bibliothèque . Les enregistrements des données demandées apparaîtront conformément au mode de l'application active (se reporter à la section 4.10 ci-dessus). Dans cet exemple, l'écran Bibliothèque de pesage est affiché.



Appuyer à nouveau sur le bouton Bibliothèque pour revenir à l'écran précédent.

Pour ajouter un enregistrement de bibliothèque, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .






L'écran **Nouvel article** de la bibliothèque s'affiche.

Créer nouvel élément 001	
PN	
Nom	
Valeur Tare	g

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône

pour revenir à l'écran Liste des bibliothèques.

Editor tamis	
Unité	
Valeur	
Calculer FM	Inactif
Valeur affichée	Pan
Valeur (mm)	0.000 mm

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône



pour introduire le numéro de référence à clavier numérique.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône



pour enregistrer le code à barres.

Répéter le processus afin d'entrer le Nom, le Poids de la tare et d'autres valeurs en utilisant le bouton

correspondant à pour descendre dans la liste.

pour descendre dans la

Tamis de pesage Les tamis en colonne peuvent être entrés indifféremment en pouces, # et tailles en mm ou cm , mais Ranger 7000 utilise les mesures en mm pour tous ses calculs.

Chaque tamis individuel peut être édité de telle sorte que l'information suivante soit associée avec le tamis:

Unité – la gradation du tamis en pouces, #, cm ou mm

Valeur – la valeur numérique pour l'unité (ex.: « 3 » pour un tamis de 3 pouces).

Calculer FM – Est ce que le tamis individuel sera utilisé pour calculer le module de finesse?

Valeur d'affichage – Comment le tamis individuel sera affiché sur la colonne du tamis dans la bibliothèque.

Valeur (mm) – La conversion de la valeur et l'unité pour le tamis en mm.

Une fois tous les tamis et au moins une colonne de tamis ajouté à la bibliothèque sous le tamis de pesage, le mode de tamis de pesage pourrait être utilisé.

4.11.2 Récupération d'un enregistrement de bibliothèque


Pour charger un enregistrement de bibliothèque depuis

l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton



L'écran de la Bibliothèque de pesage s'affiche.

Utilisez le clavier numérique pour rechercher la bibliothèque. Par exemple, clé 111 vous mènera à l'ID de bibliothèque: 111 (Si existé).

Appuyer alors sur le bouton correspondant à l'icône  pour charger les données de la bibliothèque et revenir au mode Application se rapportant à l'enregistrement de la bibliothèque.

Remarque: Numérisation d'un code à barres à deux reprises permet de récupérer la bibliothèque enregistrer directement.

Remarque: Numérisation d'un code à barres à deux reprises permet de récupérer la bibliothèque enregistrer directement.

Note : La méthode de récupération peut être configurée dans Menu principal > Configuration > Confirmation du code-barres

Activé : Cliquez sur le bouton « Rappeler »  ou scannez deux fois le code-barres pour récupérer l'enregistrement.



ou scannez deux fois le code-barres pour récupérer



Désactivé = L'enregistrement sera récupéré directement lorsque le code-barres sera scanné.

Pour plus de détails, reportez-vous au **5.4.9 Barcode Confirm**

ID	PN	Nom	Valeur Tare
001	55	123	40.0


4.11.3 Modification d'un enregistrement mémorisé en bibliothèque

Pour supprimer un enregistrement mémorisé, suivre
« Récupération d'un enregistrement de bibliothèque »
ci-dessus.

Utiliser les boutons correspondants aux icônes  et  naviguer dans la liste, puis mettre en surbrillance l'article de la bibliothèque devant être modifié. Appuyer alors sur le bouton correspondant à l'icône






L'écran Modification d'un article de la bibliothèque s'affiche.

Effectuer les changements nécessaires et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir à la liste des bibliothèques.


4.11.4 Suppression d'un enregistrement mémorisé dans la bibliothèque



Pour supprimer un enregistrement mémorisé, suivre les instructions ci-dessus de Modification de l'enregistrement mémorisé en bibliothèque.


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  Un nouvel écran s'affichera demandant une confirmation.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour supprimer l'enregistrement ou appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir à l'écran précédent.

Editer élément 001	
PN	55
Nom	123
Valeur Tare	40.0 g




A dialog box with a grey header bar containing the word "Attention" in bold. The main area is white and contains the text "Supprimer définitivement cet enregistrement ?" (Definitely delete this record?). To the right of the text is a red circular icon with a diagonal line through it, indicating a warning or prohibition. At the bottom right, there are two buttons: one with a white 'X' on a grey background and one with a white checkmark on a grey background.

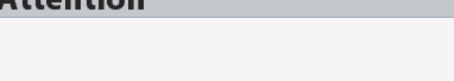4.12 Autres fonctions

4.12.1 Pesée sous la balance

La balance Ranger 7000 est équipée d'un crochet pour peser sous la balance.




ATTENTION : S'assurer que la balance est correctement soutenue afin qu'elle ne puisse ni chuter ni se détacher pendant l'utilisation des caractéristiques de pesée ci-dessous. Le non-respect de ces instructions peut être à l'origine d'un accident et de dommages à l'équipement.

Pour utiliser cette fonction, déconnecter l'alimentation de la balance et démonter ensuite le couvercle de protection de l'ouverture de la pesée sous la balance (2 vis). Le couvercle de protection est réversible pour un rangement aisé.



Avec le couvercle

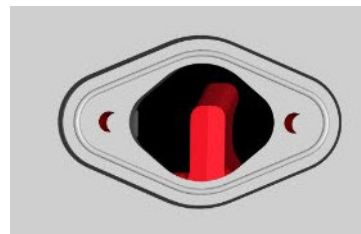

Sans le couvercle

La balance peut être supportée par des chandelles ou par toute autre méthode pratique. S'assurer que la balance est de niveau et sécurisée. Mettre la balance sous tension et utiliser un cordon ou un câble pour attacher les articles à peser.

5. PARAMÈTRES DU MENU

5.1 Navigation dans le menu

Pour accéder au menu principal, appuyer sur le bouton  de l'écran d'accueil de n'importe quelle application.



Changement des paramètres

Pour modifier un paramètre de menu, naviguer vers le paramètre conformément aux étapes suivantes :

Entrée dans le Menu

Depuis n'importe quel écran de l'application, appuyer sur le

bouton .

La liste du menu principal apparaît à l'écran.

Sélection du sous-menu


Naviguer vers le sous-menu retenu dans la liste du menu principal en utilisant le bouton correspondant à l'icône



. Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône




pour afficher les articles du sous-menu.

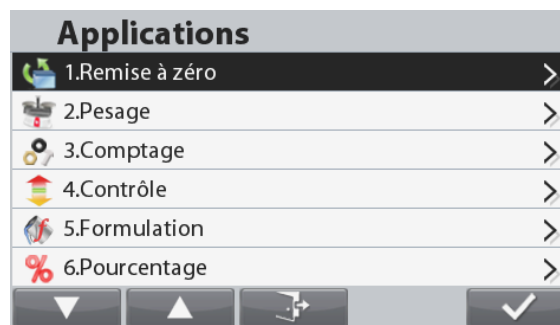

Vous pouvez également sélectionner chaque élément en appuyant sur le numéro du clavier qui correspond au numéro précédant chaque élément.


Par exemple, appuyer sur 1 sur le clavier pour sélectionner Réinitialiser.


Sélection de l'article du sous-menu

Naviguer vers l'article du sous-menu retenu en utilisant le bouton correspondant à l'icône .

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour examiner les paramètres de l'article du sous-menu.



Sélectionner le réglage.

Naviguer vers le paramètre retenu en utilisant le bouton correspondant à l'icône .

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour sélectionner le paramètre.

Vous pouvez également sélectionner chaque élément et paramètre en appuyant sur le numéro du clavier qui correspond au numéro qui les précède.

Appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran précédent.

Appuyer sur le bouton  ou sur le bouton correspondant à l'icône  pour quitter le mode de menu et revenir au mode de la dernière application active.

5.2 Menu principal

Les sélections du menu principal sont illustrées ci-dessous.



Étalonnage



Configuration



Visualisation de
l'affichage



Application
Modes



Unités de
pesage



Données
BPL et
BPF



Communications



Utilisateur



Clé de
verrouillage



Mémoire



Maintenance

5.3 Étalonnage

Les modèles R71MD offrent trois méthodes d'étalonnage :

Étalonnage du zéro, Étalonnage de la portée et Étalonnage de la linéarité.

Les modèles R71MHD offrent 5 méthodes d'étalonnage :

Étalonnage du zéro, Étalonnage de la portée, Étalonnage de la linéarité, Étalonnage interne et Étalonnage automatique.

Pendant un étalonnage, éviter de « déranger » la balance.

5.3.1 Sous-menu d'étalonnage


Modèles R71MD :



Étalonnage
du zéro



Portée
Étalonnage

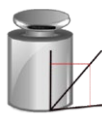

Étalonnage de
la linéarité



GEO


Modèles R71MHD :



Étalonnage
du zéro



Portée
Étalonnage

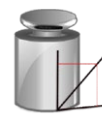

Étalonnage
de la linéarité



Étalonnage
interne



Automatique
Étalonnage



AutoCal™ Adj
(Le réglage)

5.3.2 Étalonnage du zéro

Utiliser cette méthode d'étalonnage pour régler le zéro sans affecter l'étalonnage de la portée ou celui de la linéarité.

Remarque: Calage du zéro n'est disponible sur la plate-forme 2e.

5.3.3 Étalonnage de la portée

L'étalonnage de la portée utilise deux points d'étalonnage, l'un à charge zéro et l'autre peut être choisi par l'utilisateur au moyen du clavier numérique.

La balance étant SOUS TENSION et sans charge sur le plateau, démarrer l'étalonnage de la portée pour commencer la procédure. Des valeurs d'étalonnage supplémentaires pouvant être utilisées sont présentées sur l'affichage. La meilleure précision est obtenue en utilisant la masse la plus proche de la valeur de la portée totale.

5.3.4 Étalonnage de la linéarité

L'étalonnage de la linéarité utilise deux points d'étalonnage, l'un à charge zéro et l'autre à des charges spécifiées. Consulter le tableau 5.1 pour les valeurs de la linéarité.

TABLEAU 5-1 Masses d'étalonnage

Modèle	Points d'étalonnage de la linéarité	Classe pondéral	
R71MHD3	0 kg, 1,5 kg, 3 kg	ASTM Classe 2	OIML F1
R71MHD6	0 kg, 3 kg, 6 kg	ASTM Classe 2	OIML F1
R71MHD15	0 kg, 10 kg, 15 kg	ASTM Classe 2	OIML F1
R71MHD35	0 kg, 20 kg, 35 kg	ASTM Classe 2	OIML F1
R71MD3	0 kg, 1,5 kg, 3 kg	ASTM Classe 5	OIML M1
R71MD6	0 kg, 3 kg, 6 kg	ASTM Classe 5	OIML M1
R71MD15	0 kg, 10 kg, 15 kg	ASTM Classe 5	OIML M1
R71MD35	0 kg, 20 kg, 35 kg	ASTM Classe 5	OIML M1

5.3.5 Étalonnage interne (modèles R71MHD)

L'étalonnage s'effectue au moyen de la masse interne d'étalonnage. L'étalonnage interne peut être réalisé à tout moment si la balance est de niveau et à sa température de fonctionnement.

La balance étant SOUS TENSION et sans charge sur le plateau, sélectionner **Étalonnage interne**.
La balance commence l'étalonnage.

L'affichage présente l'état et revient à l'application en cours.

Pour annuler à tout moment, appuyer sur .

5.3.6 Étalonnage automatique (modèles R71MHD)

Lorsque l'**Étalonnage automatique** est défini sur MARCHE, la balance effectue un auto-étalonnage :

- dès qu'elle détecte une variation de température de 1,5 °C
- ou toutes les 11 heures

AutoCal étalonnera automatiquement la balance (en utilisant la masse interne) chaque fois qu'une modification de la température est suffisamment significative pour affecter la précision.

5.3.7 Ajustement GEO AutoCal™ Adj (Le réglage)

Utilisez cette méthode de calibrage pour régler le point d'étalonnage de portée, sans affecter l'étalonnage de portée ou de linéarité.

Calibration Adjust peut être utilisé pour ajuster le résultat de l'étalonnage interne par +100 divisions.

Remarque: Avant de procéder à un ajustement d'étalonnage, effectuer un étalonnage interne. Pour vérifier si un réglage est nécessaire, placer une masse d'essai égale à la valeur d'étalonnage de portée sur le plateau et noter la différence (dans les divisions) entre la valeur nominale du poids et de la lecture de la balance réelle. Si la différence se situe dans une division, le réglage d'étalonnage ne soit pas nécessaire. Si la différence est supérieure à une division, le réglage de calibrage est recommandée.

Exemple:

Actual lecture pondéral: 200,014

Prévue lecture pondéral: 200,000 (valeur de la masse d'essai)

Poids différence (d): 0,014

poids Différence de chiffres: -14 (Ajuster la valeur)

Pour effectuer un réglage de l'étalonnage, touchez Réglage AutoCal à partir du menu d'étalonnage; Entrez la valeur (divisions positives ou négatives) pour correspondre à la différence constatée plus tôt dans la procédure. Réétalonner utilisant Calibration interne. Après l'étalonnage, placez la masse d'essai sur le plateau et vérifiez que la valeur de masse correspond maintenant à la valeur affichée. Sinon, répétez la procédure jusqu'à Calibration interne lecture est d'accord avec la masse d'essai.

Une fois terminé, le solde stocke la valeur de réglage et l'affichage revient à l'application en cours.

5.3.8 Ajustement GEO

Entrer dans ce sous-menu pour définir les valeurs GEO.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône



pour régler la valeur GEO.



Choisir la valeur GEO correcte et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour confirmer.

Les valeurs s'étagent entre 0 et 31.




Remarque : GEO n'est disponible qu'avec les modèles R71MD. Se reporter au tableau 9-3 pour les valeurs GEO.

5.4 Configuration

Entrer dans ce sous-menu pour personnaliser la fonctionnalité d'affichage de la balance.

5.4.1 Sous-menu de configuration de la balance

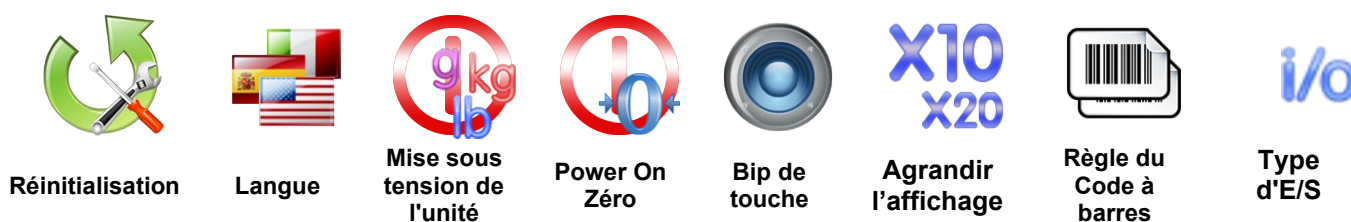

Les paramètres par défaut sont indiqués ci-dessous en caractères gras.



5.4.2 Réinitialisation

Réinitialisation de tous les paramètres aux valeurs par défaut.



= Réinitialisation



= Ne pas réinitialiser ni revenir à l'écran du menu Configuration.



5.4.3 Langue

Définir la langue affichée pour les menus et les messages présentés.

Anglais
Espagnol
Allemand
Français
Italien
Chinois
Coréen
Polonais
Portugais



5.4.4 Mise sous tension de l'unité

Définition de l'unité qui sera affichée à la mise sous tension.

Auto

Kilogramme
Livre
Gramme
Once
Livre:Once
Unité personnalisée



5.4.5 Power On Zéro

Zéro, le solde à Power On.

OFF = Inactif.
ON = Actif.



5.4.6 Bip de touche

Définir si le bipleur retentit ou non lorsqu'un bouton est enfoncé.

OFF = Inactif
ON = Actif



5.4.7 Expand Display Agrandir l'affichage

Régler la résolution d'agrandissement de l'affichage. Lorsque réglé à x 10, la résolution d'affichage sera agrandie 10 fois.

OFF
x10
x20

Exemple:

Pour le modèle 35kg x 5g:

Lorsque réglé à x10, la résolution d'affichage sera de 35kg x 0.5g.

Lorsque réglé x20, la résolution sera de 35kg x 0.2g.

Remarque :

x20 n'est pas disponible en modèle de haute résolution.

Lorsque la balance est utilisée en Métrologie légale, le réglage sera forcé sur INACTIF et ne pourra pas être modifiable.



5.4.8 Règle du Code à barres

La règle du code à barres valide un numéro de code à barres scanné. Deux règles différentes peuvent être définies. Si les deux règles sont actives, le code à barres qui correspondra à la règle 1 et à la règle 2 sera accepté par la balance.

Correspondance Règle 1

OFF = Inactif
ON = Actif

Correspondance Règle 2

OFF = Inactif
ON = Actif

Exemple 1 :

Règle Codebarre		
	1. Correspond règle 1	Actif >
	2. Règle 1
	3. Correspond règle 2	Inactif >
    		

Dans cet exemple, la règle du code à barres est définie sur Ceci signifie que tous les codes à barres d'une longueur de 8 caractères seront acceptés par la balance sans tenir compte de ce que sont les caractères individuels.

Exemple 2 :

Règle Codebarre		
	1. Correspond règle 1	Actif >
	2. Règle 155
	3. Correspond règle 2	Inactif >
  		

Dans cet exemple, la règle du code à barres est définie sur55. Ceci signifie que tous les codes à barres d'une longueur de 7 caractères et se terminant par 55 seront acceptés par la balance.


Remarque : La règle du code à barres n'est fonctionnelle qu'après connexion à un scanner de code à barres par le biais de l'hôte USB. Puisqu'il y a beaucoup de marques de scanners decodes à barres sur le marché, OHAUS testé et confirmé que ci-dessous les codes à barres, scanners de Datalogic sont compatibles avec Ranger7000 :

- Série de Heron
- Série de QuickScan
- Série Gryphon 4100
- Série Gryphon 4400

5.4.9 Confirmation du code-barres

Définissez la méthode de confirmation d'un enregistrement de bibliothèque appelé par lecture de code-barres.



Activé = Cliquez sur le bouton « Rappeler »  ou Scannez deux fois le code-barres pour récupérer l'enregistrement.

Désactivé = L'enregistrement sera récupéré directement lorsque le code-barres sera scanné.

5.4.10 Type d'E/S

Régler les paramètres de sortie du relais.

Ouvert = la sortie du relais est normalement ouverte.

Fermé = la sortie du relais est normalement fermée.



5.5 Visualisation de l'affichage

Entrer dans ce sous-menu pour personnaliser la fonctionnalité d'affichage de la balance.

Sous-menu de visualisation de l'affichage de la balance



Réinitialisation



Stabilité



Plage du zéro



Niveau du filtre



Suivi automatique du zéro



Luminosité



Réduction automatique de l'éclairage (minutes)



Veille automatique (minutes)

Les paramètres par défaut sont indiqués ci-dessous en caractères gras.



5.5.1 Réinitialisation

Réinitialisation de tous les paramètres aux valeurs par défaut.

Oui = réinitialisation

Non = ne pas réinitialiser ni revenir à l'écran du menu de visualisation de l'affichage.



5.5.2 Stabilité

Définition du niveau de variation des mesures pendant que le symbole de stabilité est actif.

0,5 division = 0,5 graduation

1 division = 1 graduation

2 divisions = 2 graduations

5 divisions = 5 graduations

Remarque : Le réglage est forcé et verrouillé sur 1 division lorsque le contacteur de sécurité est défini sur la position verrouillée.



5.5.3 Plage du zéro

Définition du pourcentage de capacité de la balance pouvant être remise à zéro.

2 %

10 %

Remarque : Le réglage est forcé et verrouillé sur 2 % lorsque le contacteur de sécurité est défini sur la position verrouillée.



5.5.4 Niveau du filtre

Définition du niveau de filtrage du signal.

FAIBLE = durée de stabilisation plus rapide avec moins de stabilité.

MOYEN = durée de stabilisation normale avec stabilité normale.

ÉLEVÉ = durée de stabilisation plus lente avec plus de stabilité.

Remarque : Le paramètre est sur le réglage en cours lorsque le contacteur de sécurité est défini sur la position verrouillée.



5.5.5 Suivi automatique du zéro

Définition de la fonctionnalité de suivi automatique du zéro.

OFF = Inactif

0,5 division = l'affichage maintient le zéro jusqu'à une variation de 0,5 graduation par seconde.

1 division = l'affichage maintient le zéro jusqu'à une variation de 1 graduation par seconde.

3 divisions = l'affichage maintient le zéro jusqu'à une variation de 3 graduations par seconde.

Remarque : Le réglage est forcé et verrouillé sur 0,5 division lorsque le contacteur de sécurité est défini sur la position verrouillée.



5.5.6 Luminosité

Réglage de la luminosité de l'affichage en utilisant le clavier numérique.
20...**80**...100



5.5.7 Réduction automatique de l'éclairage (minutes)

Permet de définir si l'éclairage de l'écran se réduit automatiquement après x secondes/minutes.

OFF = Inactif

1...30 (minutes)



5.5.8 Veille automatique (minutes)

Permet de définir si l'écran passe en veille automatique après x secondes/minutes.

OFF = Inactif

1...100 (minutes)

5.5.9 Fenêtre en haut

Définissez les informations à afficher en haut.



Capacité & graduation = Afficher uniquement la capacité & la graduation

Date et heure = Afficher la capacité & la graduation + Date & Heure

Nom d'utilisateur = Afficher la capacité & la graduation + Nom d'utilisateur


Note : Seules deux informations peuvent être affichées en haut.

5.6 Mode de l'application

L'entrée dans ce sous-menu permet d'activer ou de désactiver les applications retenues de la balance. Une seule application peut être exécutée à la fois.


Remarque : L'utilisation de chaque application est décrite en détail dans la section 4.

5.6.1 Activation/désactivation d'une application

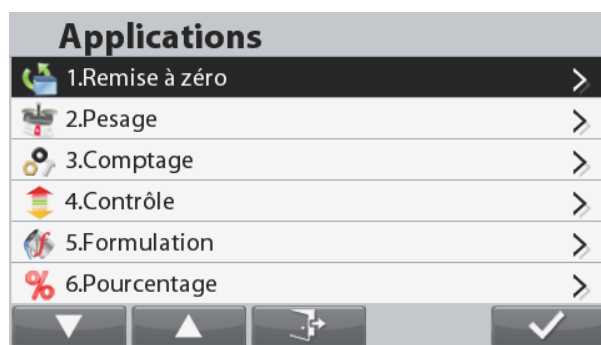

Mettre en surbrillance l'application en appuyant sur les boutons

correspondants aux icônes   et appuyer ensuite

sur le bouton correspondant à l'icône  pour accéder au sous-menu sélectionné.

Sur l'écran de l'option Article, entrer dans le menu **Actif** pour l'activer ou la désactiver.

Une fois qu'une application est active, elle peut être choisie en appuyant sur le bouton

Applications jusqu'à ce que son icône apparaisse dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

L'état de l'élément de menu en cours s'affiche : **OFF** = Inactif, **ON** = Actif

5.7 Unités de pesage

Entrer dans ce sous-menu pour activer les unités de mesure désirées.

Remarque : Conformément aux réglementations nationales, la balance peut ne pas inclure certaines des unités de mesure répertoriées.

5.7.1 Sous-menu des unités



kg

lb

g

oz

lb:oz



Réinitialisation

kilogramme

livre

gramme

once

livre:once

Unité
personnalisée

Remarques : Le paramètre est verrouillé lorsque le contacteur de sécurité est réglé sur verrouillé.

Unité personnalisée

Utiliser chaque unité personnalisée pour afficher un poids dans une unité de mesure alternative. L'unité personnalisée est définie en utilisant un facteur de conversion qui correspond au nombre d'unités personnalisées par kilogramme exprimées selon une notation scientifique (Facteur x 10[^] exposant).

Facteur

Définir le facteur de conversion à l'aide des touches numériques.

Des paramètres de 0.1000000 à 1.9999999 sont disponibles. Le paramètre par défaut est **1.0000000**.

Exposant

Définition du multiplicateur de facteur

-3 = diviser le facteur par 1000 (1×10^{-3})

-2 = diviser le facteur par 100 (1×10^{-2})

-1 = diviser le facteur par 10 (1×10^{-1})

0 = multiplier le facteur par 1 (1×10^0)

1 = multiplier le facteur par 10 (1×10^1)

2 = multiplier le facteur par 100 (1×10^2)

Chiffre le moins significatif

Définition de la graduation

Les paramètres 0.5, 1, 2, 5, 10, 100 sont disponibles.

Le nom de l'unité personnalisée utilise un maximum de 3 caractères.

Remarque: La fonction unité personnalisée est verrouillée en position Arrêt lorsque l'interrupteur de sécurité est sur la position verrouillée.

5.7.2 Réinitialisation

Pour réinitialiser les paramètres de l'unité sur les valeurs usine par défaut, sélectionner Réinitialiser et confirmer ensuite par Oui ou par Non.

5.7.3 Activation/Désactivation d'une unité



Sélectionner l'unité désirée et appuyer ensuite sur le bouton

correspondant à l'icône  et choisir ensuite Oui ou Non.

L'état de l'élément de menu en cours s'affiche.

OFF = Inactif

ON = Actif

Unités de pesée		
	1.Remise à zéro	>
kg	2.Kilogramme	Actif >
lb	3.Livre	Actif >
g	4.Gramme	Actif >
oz	5.Once	Actif >
lb:oz	6.Livre:Once	Actif >
   		

5.8 Données BPL et BPF

Entrer dans ce menu pour définir les données des Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et des Bonnes pratiques de fabrication (BPF).



Réinitialisation



Format de la date



Date



Format de l'heure



Heure



Identification du projet



ID de la balance

Sous-menu des données BPL



5.8.1 Réinitialisation

Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut. Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut.



5.8.2 Format de la date

Définition du format de la date de la balance.

MMJJAAA = Mois, Jour, Année
JJMMAAAA = Jour, Mois, Année
AAAAMMJJ = Année, Mois, Jour



5.8.3 Date

Définition de la date en cours en utilisant le clavier alphanumérique.



5.8.4 Format de l'heure

Définition du format de l'heure de la balance.

24 H = format 24 heures (défaut)
12 H = format 12 heures



5.8.5 Heure

Réglage de l'heure en cours.



5.8.6 Identification du projet

Définition de l'ID du projet en utilisant le clavier alphanumérique.



5.8.7 ID de la balance

Définissez l'ID d'échelle en utilisant le clavier alphanumérique.

5.9 Communications

Entrer dans ce menu pour définir les méthodes de communication externe ainsi que les paramètres d'impression.

Les données peuvent être émises vers une imprimante ou vers un PC (voir la section 6.5 pour la chaîne de sortie).

Les paramètres usine par défaut sont indiqués en caractères gras.

Sous-menu Communication



RS232



USB

Le choix d'un élément affiche un autre niveau de menu (RS232 présenté) :



Configuration



Configuration de l'impression

Le choix d'un élément de paramètres affiche encore un autre niveau de menu ; les paramètres de l'appareil dépendent du port COM choisi (RS232 présenté).

Menu Configuration : (RS232 présenté)

**5.9.1 Réinitialisation**

Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut. Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut.

**5.9.2 Débit en bauds**

Définition du débit en bauds (bits par seconde).

300
600
1200
2400
4800
9600
19200

**5.9.3 Parité**

Définition du nombre de bits de données, du bit d'arrêt et de la parité.

7, parité paire = 7 bits de données, parité paire
7, parité impaire = 7 bits de données, parité impaire
7 sans parité = 7 bits de données, sans parité
8 sans parité = 8 bits de données, sans parité

**5.9.4 Bits d'arrêt**

Définition du nombre de bits d'arrêt.

1 BIT
2 BITS

**5.9.5 Établissement de liaison**

Définition de la méthode de contrôle du débit.

AUCUN = pas d'établissement de liaison
XON-XOFF = Protocole XON/XOFF de liaison
MATÉRIEL = Établissement de liaison matériel (menu COM1 seulement)

ASCII

5.9.6 Commande alternative

Entrer dans ce sous-menu pour définir un caractère de commande différent pour les commandes P (Imprimer), T (Tare) ou Z (Zéro).

**5.9.7 Balance de la Référence**

Off = ne pas se connecter à la référence équilibre

On = connecter à référencer l'équilibre

Remarque: Utilisez la balance de référence pour effectuer l'échantillonnage avec l'équilibre de haute résolution en mode de comptage.

Veuillez-vous assurer que la balance est déjà allumée avant de connecter Ranger 7000.

Commande alternative de l'impression

Définition du caractère de commande alternatif de l'impression.

Tous les choix sont disponibles entre A(a) et Z(z), à l'exception de T et Z. Le réglage par défaut est **P**.

Commande alternative de la tare

Définition du caractère de commande alternatif de la tare.

Tous les choix sont disponibles entre A(a) et Z(z), à l'exception de P et Z. Le réglage par défaut est **T**.

Commande alternative du zéro

Définition du caractère de commande alternatif du zéro.

Tous les choix sont disponibles entre A(a) et Z(z), à l'exception de P et T. Le réglage par défaut est **Z**.

Menu de configuration de l'impression : (RS232 présenté)

**5.9.8 Réinitialisation**

Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut. Réinitialisation sur les paramètres usine par défaut.

**5.9.9 Poids stabilisé seulement**

Définition des critères d'impression.

OFF = les valeurs sont immédiatement imprimées, quelle que soit la stabilité.

ON = les valeurs ne sont imprimées que lorsque les critères de stabilité sont satisfaits.

SICS

5.9.10 SICS

Off = désactiver la commande MT-SICS

On = activer la commande MT-SICS



5.9.11 Options d'impression

Définir les critères d'impression.

données PC = Impression sur un PC

SF40A = Imprimer les données sur l'imprimante SF40A

ZEBRA = Imprimer les données sur l'imprimante ZEBRA



5.9.12 Impression automatique

Définition de la fonctionnalité automatique d'impression

Mode d'impression Auto

OFF = Inactif

ON STABLE = l'impression se produit chaque fois que les critères de stabilité sont satisfaits.

INTERVALS = l'impression a lieu à des intervalles définis.

ACCEPTER = L'impression intervient à chaque fois que les critères de stabilité et la plage de validation sont respectés.

CONTINUOUS = l'impression se produit continuellement.

Lorsque ON STABLE est sélectionné, définir l'intervalle de durée en utilisant le clavier numérique.

LOAD = impression si la charge affichée est stable.

LOAD ZERO = impression si la charge affichée ou le zéro est stable.

Lorsque INTERVAL est sélectionné, définir l'intervalle de durée en utilisant le clavier numérique.

Des réglages de 1 à 50000 secondes sont disponibles.

Remarque: Appuyer sur le bouton imprimer lorsque l'intervalle a été sélectionnée et le résultat d'impression sera immédiatement affiché.

Continu

OHAUS = Compatibilité avec les produits OHAUS qui nécessitent en temps réel poids dat

MT standard = Compatibilité avec les produits METTLER TOLEDO qui nécessitent en temps réel les données pondéral

Checksum

Off = inactif

On = actif

Sortie en continu standard

Un caractère de somme de contrôle peut être actif ou inactif avec une sortie en continu. Les données comprennent 17 ou 18 octets comme sur le Tableau 5-1.

Les données pondéral non significatifs et les chiffres de données de tare seront transmis sous forme d'espace. Le mode de sortie en continu est compatible avec les produits OHAUS nécessitant des données de pesée en temps réel. Le Tableau 5-1 indique le format d'une sortie en continu standard.

Tableau 5-1 : Format standard de sortie en continu

Tableau 3-1 : Format standard de sortie en continu																		
Caractère	1	État ²			Poids indiqué ³						Poids de la tare ⁴							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Données	STX ¹	SB-A	SB-B	SB-C	MSD	-	-	-	-	LSD (chiffre le moins significatif)	MSD	-	-	-	-	LSD (chiffre le moins significatif)	CR ⁵	CHK ⁶

Remarques sur les formats de sortie en continu :

1. Caractère ASCII de début de texte (02 hex) toujours transmis.
2. Octets d'état A, B et C. Reportez-vous aux Tableaux Tableau 5-2, Tableau 5-3, et Tableau 5-4 pour des détails sur la structure.
3. Poids affiché. Le poids brut ou le poids net. Six chiffres sans symbole décimal. Les zéros à gauche non significatifs sont remplacés par des espaces.
4. Poids de la tare. Six chiffres pour les données de pesée de la tare. Pas de décimale dans le champ.
5. Caractère de retour de chariot ASCII <CR> (Hex 0D).
6. La somme de contrôle n'est transmise que si elle est active dans la configuration. La somme de contrôle permet de détecter des erreurs de transmission de données. La somme de contrôle représente le 2e complément aux 7 bits de droite de la somme binaire de tous les caractères précédant le caractère de la somme de contrôle, y compris les caractères <STX> et <CR>.

Les Tableaux Tableau 5-2, Tableau 5-3 et Tableau 5-4 détaillent les octets d'état pour une sortie en continu standard.

Tableau 5-2: Définitions du bit de l'octet d'état A

Bits 2, 1 et 0			
2	1	0	Emplacement du symbole décimal

0	0	0	XXXXXX00
0	0	1	XXXXXX0
0	1	0	XXXXXXX
0	1	1	XXXXX.X
1	0	0	XXXX.XX
1	0	1	XXX.XXX
1	1	0	XX.XXXX
1	1	1	X.XXXXXX
Bits 3 et 4			
4	3	Code de version	
0	1	X1	
1	0	X2	
1	1	X5	
Bit 5			Toujours = 1
Bit 6			Toujours = 0

Tableau 5-3: Définitions du bit de l'octet d'état B

Bits d'état	Fonction
Bit 0	Brut = 0, Net = 1
Bit 1	Signe, Positif = 0, Négatif = 1
Bit 2	Hors plage = 1 (surcapacité ou sous zéro)
Bit 3	Déplacement = 1, stable = 0
Bit 4	lb = 0, kg = 1 (reportez-vous aussi à l'octet d'état C, bits 0, 1, 2)
Bit 5	Toujours = 1
Bit 6	Zéro non capturé après mise en marche = 1

Tableau 5-4: Définitions du bit de l'octet d'état C

Bits 2, 1 et 0			Description des poids
2	1	0	
0	0	0	lb ou kg, sélectionné par l'octet d'état B, bit 4
0	0	1	grammes (g)
0	1	0	tonnes métriques (t)
0	1	1	onces (oz)
1	0	0	non utilisé
1	0	1	non utilisé
1	1	1	tonnes
1	1	1	pas d'unité
Bit 3			Demande d'impression = 1
Bit 4			Extension des données x 10 = 1, Normal = 0
Bit 5			Toujours = 1
Bit 6			Toujours = 0



5.9.13 Imprimer les données de Cal

Définir la fonctionnalité d'impression automatique des données de calibrage.

Inactif = désactivé

Actif = activé

Remarque : une fois activées, les données d'étalonnage seront imprimées automatiquement lorsque vous lancerez l'étalonnage.



5.9.14 Modèle Sélectionner

Ce sous-menu est utilisé pour définir le format de sortie des données vers une imprimante ou un ordinateur.

Simple = n'imprime que le résultat et l'unité


Personnalisé 1 = format d'impression personnalisé. S'il n'est pas personnalisé, un modèle simple sera utilisé

Personnalisé 2 = format d'impression personnalisé. S'il n'est pas personnalisé, un modèle simple sera utilisé

Personnalisé 3 = format d'impression personnalisé. S'il n'est pas personnalisé, un modèle simple sera utilisé

Personnalisé 4 = format d'impression personnalisé. S'il n'est pas personnalisé, un modèle simple sera utilisé

ZEBRA = Modèle prédéfini

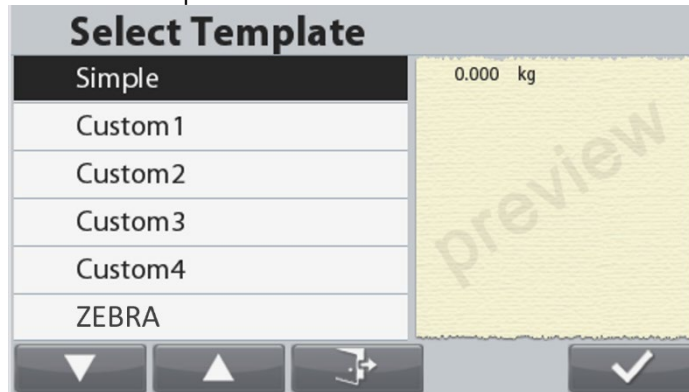


5.9.15 Modification d'un modèle

Ce sous-menu est utilisé pour modifier les modèles d'impression. Chaque modèle supporte jusqu'à 50 champs de données pour définir le format du résultat des données.



Pour formater un modèle, sélectionner premièrement le numéro du champ (entre 1 et 50). Une fenêtre du contenu s'affiche pour le champ sélectionné.

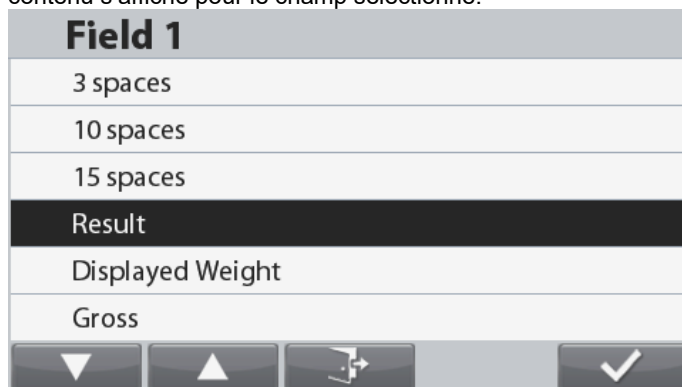

Item	Length
3 spaces	3
10 spaces	10
15 spaces	15
Date	10

Item	Length
Numéro de lot	40
Remarque	40
String 1	Up to 40
String 2	Up to 40

Displayed Weight	23
Displayed Number	13
End of Template	0
Imprimer la date d'expiration	40
Gross	23
User ID	Up to 12
Net	23
New Line (<CR><LF>)	2
Information	No fixed length
Project ID	Up to 40
Serial Number	10
Scale ID	Up to 40
Result	23 or 29 (Check mode)
Mode	Up to 14
PN	Up to 30
ID	40
Numéro de bon de travail	40

String 3	Up to 40
String 4	Up to 40
String 5	Up to 40
String 6	Up to 40
String 7	Up to 40
String 8	Up to 40
String 9	Up to 40
String 10	Up to 40
Tare	23
Time	5 or 8 (12 hour format)
Alibi ID	6
Accumulation	No fixed length
Library ID	4
Library Name	Up to 30
Input status	2(00)
Output status	4(1111)

Voir la section 6.6 pour les échantillons d'imprimés.

Finir un modèle

Pour finir un modèle, une fin du champ de modèle doit être incluse. Tous les champs après la fin du champ de modèle doivent être ignorés. Si un champ est choisi comme fin du modèle, sera annulé de ce champ tel qu'indiqué ci-dessous.

Field 2
Displayed Weight
Gross
Net
Tare
New Line
End of Template
▼ ▲ ↩ ✓

Edit Template Simple

✓ Field 1 >

Field 2 >

Field 3 >

Field 4 >

Field 5 >

Field 6 >

0.000 kg

preview

▼

▲

↺↻

✓



5.9.16 Modifier une série

Jusqu'à 10 séries pourraient être modifiés en utilisant le clavier alphanumérique.

5.9.17 Transferts données

Résultats du pesage de sortie directement vers une application PC. Le paramétrage est facile sans requérir à un logiciel supplémentaire.

Remarque : La fonction de transfert des données n'est pas prise en charge avec Windows® 7. OHAUS offre le logiciel SPDC pour les utilisateurs de Windows 7.

- OFF** = ne pas imprimer.
ON = imprimer les paramètres spécifiés.

Cliquer sur le menu Démarrer de Windows XP et ensuite sur « Paramètres » –> ouvrir **Panneau de configuration**.

Cliquez deux fois sur **Options d'accessibilité** du panneau de configuration.



Sélectionner l'onglet **Général** dans Options d'accessibilité.

Cocher **Utilisation des touches série** et cliquer sur le bouton **Paramètres**.

Sélectionner le **Port série** et définir le **Débit en bauds** sur **9600**.



Après la sélection, cliquer sur **OK** pour fermer le paramétrage des touches série.
Fermer le panneau de configuration.


Exécuter Excel® pour ouvrir une feuille de calcul vide. Cliquer sur la cellule dans laquelle les données doivent être placées.

À ce stade, si la balance envoie des données vers le PC par le port RS232, les données seront introduites dans la cellule et le curseur se déplacera automatiquement vers la cellule verticale suivante.

Remarque : Si la valeur du pesage est un nombre négatif, définir la cellule cible au format TEXTE. Sinon, Excel ne la distinguera pas comme un nombre négatif.

5.10 Utilisateur

Saisir pour afficher et modifier les paramètres de l'utilisateur.

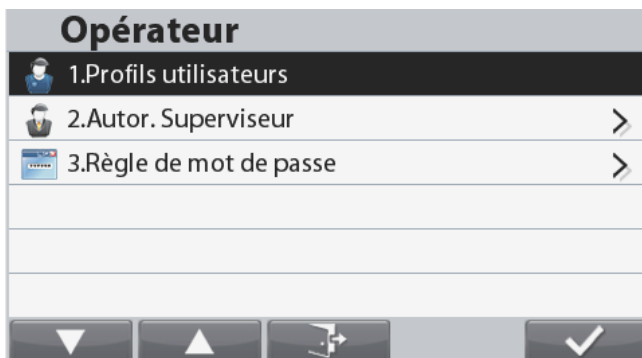

5.10.1 Profils des utilisateurs

Création des utilisateurs avec nom d'utilisateur et mot de passe.

Écran utilisateur

Profils utilisateurs		
ID	Opérateur	Rôle
01	01	Administrateur
02	02	Utilisateur

Fonctions

Le profil de l'utilisateur est utilisé pour enregistrer les paramètres spécifiques de l'utilisateur dans le menu

Au total, 50 profils d'utilisateurs peuvent être enregistrés dans le système de fichiers

Nom d'utilisateur longueur maximale : 32

Longueur maximale du mot de passe : 32

Autorités utilisatrices

Types d'utilisateurs

- a) Administrateur
- b) Contrôleur
- c) Opérateur
- d) Invité


Remarques :

Le premier utilisateur est toujours l'administrateur

Si aucun utilisateur n'a été créé, se connecter en tant qu'administrateur.


L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer tous les utilisateurs. Le superviseur peut ajouter, modifier et supprimer des opérateurs. L'opérateur n'a pas le droit d'ajouter, de modifier ou de supprimer un utilisateur, et ce rôle ne peut que rappeler la bibliothèque.

Compte de visiteur :


La connexion en tant que visiteur s'effectuera directement en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône , aucun mot de passe n'est requis.


Le visiteur peut examiner, mais sans pouvoir les modifier, les paramètres du menu général. Tous les menus sont verrouillés. Le visiteur peut modifier les configurations des applications, mais sans pouvoir ajouter/modifier des enregistrements de bibliothèque.


Écran de connexion

Appuyer longuement sur le bouton  pour démarrer l'écran de Connexion Utilisateur afin de modifier l'utilisateur. Une ouverture de session est aussi obligatoire pendant la mise sous tension.

UserLogin	
User	Authority
668	Aministrator


Pour une connexion en tant qu'administrateur, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône . Un écran de connexion s'affiche avec un champ de mot de passe. Introduire le mot de passe associé au compte.






Si un mot de passe erroné est introduit, un écran d'erreur s'affichera. Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir à l'écran de connexion.


Pour une connexion en tant qu'invité, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Remarque : si aucun utilisateur n'a été créé, aucune connexion n'est requise et l'ouverture de session s'effectue en tant qu'administrateur.

Creating a new user

Pour créer un nouvel utilisateur, appuyez sur le bouton correspondant à l'icône .

Nouvel opérateur03	
Rôle:	Administrateur
Nom:	
Mot de passe:	
Confirmer Mot de passe:	
<div>      </div>	

Sélectionner le rôle de l'utilisateur, puis entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir à l'écran de connexion.

Suppression d'un utilisateur


Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez l'utilisateur à supprimer dans la liste et appuyez sur le bouton correspondant à l'icône .






Profils utilisateurs		
ID	Opérateur	Rôle
01	01	Administrateur
02	02	Utilisateur










Dans l'écran de l'utilisateur à modifier, appuyez sur le bouton correspondant à l'icône .

Editer Opérateur01	
Rôle:	Administrateur
Nom:	01
Mot de passe:	*****
Confirmer Mot de passe:	*****
<div>      </div>	

Une fenêtre de confirmation apparaît.

Opérateur	
<p>Supprimer définitivement cet opérateur ?</p> 	
<div>   </div>	

Appuyez sur le bouton correspondant à l'icône  pour supprimer l'utilisateur en permanence ou  pour annuler la suppression et revenir à l'écran principal de profils utilisateur.

5.10.2 Autorité de surveillance

L'utilisateur admin peut définir l'autorité du superviseur comme suit :

Article	Paramètres disponibles (les paramètres par défaut sont en gras)
Calibration	Inactif , Actif
Date et heure	Inactif , Actif
Configuration	Inactif , Actif
Communication	Inactif , Actif
Mémoire	Inactif , Actif
Bibliothèque	Inactif , Actif
Maintenance	Inactif , Actif

5.10.3 Règle du mot de passe

Le mot de passe a une durée de validité. Une notification de changement de mot de passe apparaîtra 15 jours avant la période de validité du mot de passe. Si la période de validité a expiré, l'utilisateur doit changer le mot de passe immédiatement après s'être connecté.


La longueur du mot de passe doit être supérieure à la "longueur minimale" et inférieure à 32.

Le mot de passe présente trois complexités.

Complexité	Caractère du mot de passe
Numérique	Numérique
Alpha numérique	Chiffres & lettres
Correspondance	Chiffres, lettres minuscules et majuscules

5.11 Clé de verrouillage

Ce menu permet de verrouiller l'accès à certaines clés. Lorsque vous sélectionnez ACTIF pour une sélection, la pression de la touche associée sera ignorée.

Si vous sélectionnez "Verrouiller toutes les clés", vous perdrez la fonction de toutes les clés. Dans ce genre de situation, si vous souhaitez rétablir les paramètres, appuyez longuement sur la touche  pendant 10 secondes pour entrer dans le menu et le réinitialiser.

Article	Paramètres disponibles (les paramètres par défaut sont en gras)
Réinitialiser	Non /Oui
Verrouiller toutes les clés	Inactif , Actif
Verrouiller la clé zéro	Inactif , Actif
Verrouiller la clé de tare	Inactif , Actif
Verrouiller la clé de mode	Inactif , Actif
Verrouiller la clé d'impression	Inactif , Actif
Verrouiller la touche Menu	Inactif , Actif
Verrouiller la clé de l'unité	Inactif , Actif
Verrouiller la clé programmable	Inactif , Actif
Verrouiller la clé de la bibliothèque	Inactif , Actif

5.12 Mémoire

5.12.1 Log Memory

La mémoire du journal vous permet de vérifier l'historique des mises à jour du logiciel, les informations sur l'indicateur et le journal du système.

Toutes les modifications apportées aux réglages de l'indicateur seront enregistrées dans un fichier journal du système (3 000 enregistrements maximum), par exemple chaque impression de données, changement de date/heure, changement de réglage de l'indicateur, action d'étalonnage, connexion/déconnexion de l'utilisateur, création/modification/suppression du compte de l'utilisateur, etc. Ces fichiers journaux du système peuvent être consultés et exportés sur une clé USB.

Ces fichiers journaux du système peuvent être consultés et exportés sur une clé USB. Ils peuvent également être visualisés par le logiciel ScaleMate.



Activer la mémoire du journal

La mémoire du journal est « Désactivée » par défaut. Pour activer la mémoire du journal,

1. Accédez au menu principal > Mémoire > Mémoire du journal > Système du journal
2. Sélectionnez « Activé ».

Note : La mémoire du journal enregistre uniquement les données lorsque le journal système est sur « Activé ».

Exporter le journal vers une clé USB

1. Connectez votre périphérique USB. L'icône  apparaît.
Remarque: Cette icône n'est visible que lorsqu'un périphérique USB est connecté.
2. Appuyez sur le bouton  pour exporter les enregistrements.

Effacer les enregistrements du journal

Remarque: Les enregistrements ne peuvent être effacés qu'après l'exportation du journal vers une clé USB.

Une fois le journal exporté vers la clé USB, l'icône apparaît. Appuyez sur le bouton pour effacer les enregistrements du journal.

5.12.2 Mémoire USB

Mémoire USB est utilisé pour stocker les lectures pondéral pour référence future.
Dans le menu de mémoire USB, définir l'état sur Actif pour activer cette fonctionnalité.



En connectant un lecteur flash USB à l'échelle les lectures pondéral peuvent désormais être stockés directement sur le lecteur flash USB.

Le format des données envoyées au lecteur flash dépend de la configuration de la communication USB, s'il vous plaît se référer au chapitre 5.9 pour plus de détails.

Les données seront stockées dans le lecteur flash dans l'emplacement suivant:

SYSTEM\DATA

Un nouveau fichier sera créé mensuel (un fichier txt stocke sortie les données d'un mois entier ...)

 201606.TXT	2016/6/28 14:26
 201607.TXT	2016/7/7 14:25

5.12.3 Mémoire Alibi

Remarque : Ce menu n'est visible que si l'option matérielle de la mémoire Alibi a été installée.

La mémoire Alibi est utilisée pour stocker l'historique de la pesée à titre de référence.


Chaque enregistrement Alibi contient une ID d'enregistrement, la valeur du poids net, la valeur du tare, et l'heure et la date.

Entrer dans l'élément de menu Vérification des enregistrements pour examiner les enregistrements.

Remarques :


Le nombre maximum d'enregistrements s'élève à 262112.


Lorsque la mémoire est pleine et qu'un autre enregistrement est stocké, le premier enregistrement sera automatiquement supprimé. À ce stade, un message d'avertissement apparaîtra, demandant la confirmation de l'utilisateur.

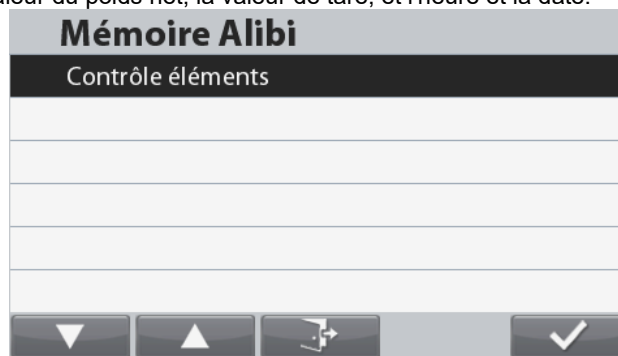


Le dernier enregistrement introduit est toujours affiché en haut de la liste.

Utiliser les boutons correspondant aux icônes pour naviguer dans la liste.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  afin de localiser un enregistrement en introduisant son n° d'identification.

Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour imprimer une plage d'enregistrements.


Appuyer sur le bouton correspondant à l'icône  pour revenir au menu précédent.

Remarque : seul le poids stable peut être imprimé dans la mémoire alibi. Le poids stable n'est enregistré dans la mémoire alibi qu'en appuyant manuellement sur le bouton d'impression.

Alibi mémoire Option Conseil Installation

ÉTAPE 1. Ouverture du module terminal**A) retrait du Terminal de la base.**

1. Éteindre et débrancher l'échelle principale.
2. détacher le terminal à écran de la base en pressant les deux boutons en même temps que voir la photo ci-dessous. Après l'appui sur la borne vers soi (vers l'extérieur) jusqu'au Terminal est détachée de la base comme indiqué ci-dessous.

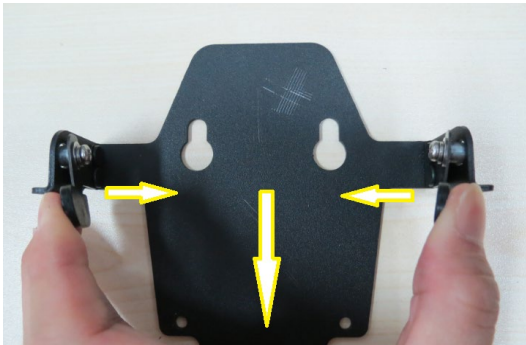**B) débrancher un câble de base de la borne.**


Débranchez le câble de base de la borne.

C) démontage du boîtier Terminal.




Mettez la borne autour. Il y a 4 vis situées sous les couvertures en caoutchouc aux 4 coins du carter inférieur. Retirez ces caches en caoutchouc, et vous serez en mesure de localiser et enlever les 4 vis cachées.



Après avoir retiré les vis qui sont fixer le carter en bas avec le haut de la page boîtier Retournez le module terminal. Après que soulevez soigneusement le carter supérieur, n'enlevez pas le boîtier supérieur éloigner complètement le carter bas parce que le clavier Terminal superposition nappe et le câble ruban de TFT écran sont encore attachées à la carte de circuit imprimé principal Terminal.

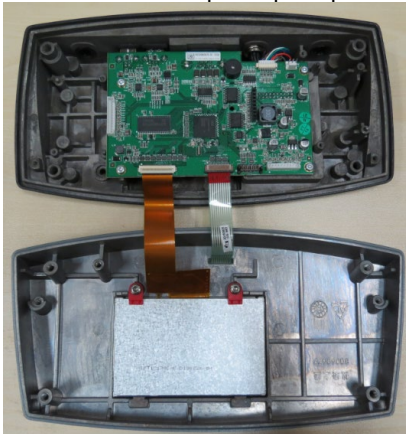

ÉTAPE 2. Insérez la carte mémoire Alibi dans la fente, comme indiqué ci-dessous ; s'assurant que les broches et pied en plastique sont tous correctement insérés.

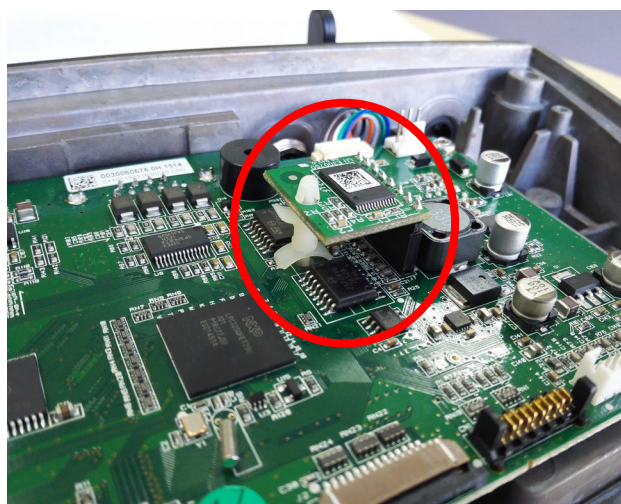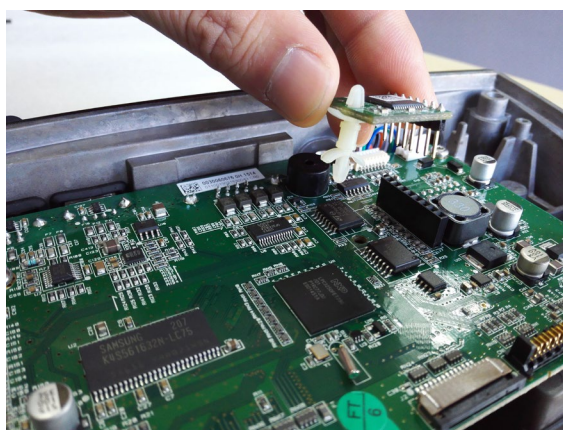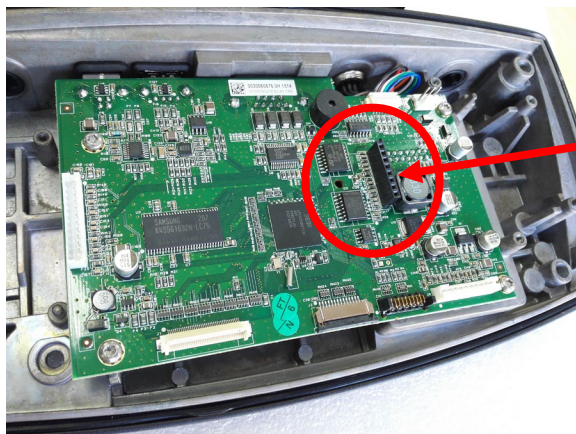

5.13 Maintenance



Exportation
de la
bibliothèque



Exportation
du profil de
l'utilisateur



Importation
des lecteurs
de la
bibliothèque



Importation
du profil de
l'utilisateur

Remarque : L'importation/l'exportation ne sont fonctionnelles que si l'utilisateur courant est un administrateur.

Sous-menu Maintenance



5.13.1 Exportation de la bibliothèque
Exportation de la bibliothèque vers une clé USB.



5.13.2 Exportation du profil de l'utilisateur
Exportation du profil utilisateur vers une clé USB.



5.13.3 Importation des lecteurs de la bibliothèque
Importation de la bibliothèque depuis une clé USB.



5.13.4 Importation du profil de l'utilisateur
Importation du profil de l'utilisateur depuis une clé USB.
Remarque : Les utilisateurs existants seront remplacés lors de l'importation des utilisateurs.

6. COMMUNICATIONS SÉRIE

6.1 Commandes de l'interface

Les commandes répertoriées sur le tableau suivant seront reconnues par la balance.

Les commandes SICS peuvent également être actif dans la configuration du menu, s'il vous plaît se référer à la section 5.9.10 pour les détails.

Commande	Fonction
IP	Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable)
P	Impression du poids affiché (stable ou instable)
CP	Continuel
SP	Impression si stable.
xS	0S : Mettre hors service l'élément de menu « Stable seulement » et permettre une impression hors stabilité. 1S : Mettre en service l'élément de menu « Stable seulement » et imprimer uniquement avec stabilité.
xP	Impression d'intervalle x = intervalle d'impression (1 à 50000 s), 0P met hors service l'impression automatique.
Z	Similaire à l'appui sur la touche Zéro.
T	Similaire à l'appui sur la touche Tare.
xT	Téléchargement de la valeur de la tare en grammes (valeurs positives seulement). L'envoi de 0T efface la tare (si autorisé).
PU	Impression des unités en cours : kg, g, lb, oz, lb:oz, t
xU	Set scale to unit x: 1=kg, 2=lb, 3=g, 4=oz, 5=lb:oz
xM	Régler la balance sur le mode x. 1= Pesage, 2= Comptage, 3= Vérification, 4= Formulation, 5= Pourcentage, 6= Remplissage, 7= Dynamique, 8= Densité, 9= Différentiel. M permettra d'avancer jusqu'au prochain mode actif.
PSN	Imprimer le numéro de série.
CU xxx	Définir la limite inférieure (uniquement en mode vérification) où « xxx » est la valeur dans l'unité de pesée actuelle. <ul style="list-style-type: none"> En mode de vérification de pesée, les unités sont g/oz/lb, oz/kg/lb En mode de vérification de comptage, l'unité est en pcs
CO xxx	Définir la limite supérieure (uniquement en mode vérification) où « xxx » est la valeur dans l'unité de pesée actuelle. <ul style="list-style-type: none"> En mode de vérification de pesée, les unités sont g/oz/lb, oz/kg/lb En mode de vérification de comptage, l'unité est en pcs
x#	Set Comptage APW (x) en grammes. (Uniquement dans le mode de comptage ou Checkcounting, doit avoir stocké APW)
P#	Imprimer Comptage ou en mode Checkcounting APW.
x%	Poids du mode pourcentage défini de référence (x) en grammes. (Doit avoir un poids de référence stocké)
P%	Imprimer Pourcentage du poids de référence de mode.
PV	Version : impression du nom, de la version logicielle et de LFT MARCHE (si LFT est définie sur MARCHE).
H x « texte »	Entrez le contenu de la chaîne, x = nombre String (1-10), "texte" = texte de la chaîne jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
∖EscR	Réinitialisation globale afin de réinitialiser tous les menus sur les valeurs par défaut d'usine.
SNS x	Changement de plateforme : x = 1, 2
SetSP xxx xxx xxx	Définissez les cibles SP1 et SP2 séquentiellement dans l'unité de pesée actuelle. <ul style="list-style-type: none"> En mode de remplissage par poids, les unités sont g/oz/lb, oz/kg/lb En mode de remplissage par pièces, l'unité est en pcs
DM « texte »	Entrez le contenu de la chaîne, « texte » = chaîne de texte jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Le message sera affiché sur l'écran principal.
DC	Fermez le message
SetEpMsg1 texte	Pour configurer un message de service. Entrez le contenu de la chaîne, « texte » = chaîne de texte jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
SetEpMsg2 texte	Pour configurer un message de service. Entrez le contenu de la chaîne, « texte » = chaîne de texte jusqu'à 40 caractères alphanumériques.

MT-SICS Commande

	Commande	Fonction
Niveau 0	I0	Consultation de toutes les commandes SICS
	I1	Enquête du niveau SICS et les versions SICS
	I2	Demande de données à grande échelle
	I3	Interrogation de la version du logiciel d'échelle
	I4	Demande de numéro de série
	S	Envoyer valeur pondéral stable
	SI	Envoyer une valeur pondéral immédiatement
	SIR	Envoyer une valeur pondéral à plusieurs reprises
	Z	Zéro la balance
	ZI	zéro immédiatement

Niveau 1	D	Écrire un texte en affichage
	DW	Affichage du poids
	T	Tare
	TA	valeur Tare
	TAC	Effacer la tare
	TI	tarer immédiatement
Niveau 2	C2	Calibrer avec le poids de calibrage externe
	C3	Calibrer avec le poids de calibrage interne
	I10	Renseignez-vous ou un ensemble ID d'échelle
	I11	Renseignez-vous du type d'échelle
	P101	Imprimez valeur pondéral stable
	P102	Imprimez valeur pondéral actuelle immédiatement
	SIRU	Envoyer une valeur pondéral dans l'unité courante immédiatement et répéter
	SIU	Envoyer une valeur pondéral dans l'unité courante immédiatement
	SNR	Envoyer valeur pondéral stable et répétez après chaque changement pondéral
	SNRU	Envoyer valeur pondéral stable dans l'unité actuelle et répéter après chaque changement pondéral
Niveau 3	SRU	Envoyer une valeur pondéral dans l'unité et répétition en cours
	SU	Envoyer valeur pondéral stable dans l'unité actuelle
	LST	Envoyer les réglages de menu
	M01	Mode de pesée
	M02	paramètre de stabilité
	M03	fonction Autozéro
	M19	Envoyer poids de calibrage
	M21	Renseignez-vous définir l'unité / poids
	PRN	Imprimez à chaque interface de l'imprimante
	RST	Redémarrer
	SFIR	Envoyer une valeur pondéral immédiatement et répéter rapidement
	SIH	Envoyer une valeur pondéral immédiatement en haute résolution
	SWU	Mettez l'unité pondéral
	SX	Envoyer enregistrement de données stable
	SXI	Envoyer fiche de données immédiatement
	SXIR	Envoyer enregistrement de données immédiatement et répéter
	U	Mettez l'unité pondéral

6.2 Interface RS232

RS232 (DB9) Connexion des broches


Broche 2 : Ligne de transmission de la balance (TxD)

Broche 3 : Ligne de réception de la balance (RxD)

Broche 5 : Signal de masse

Broche 7 : Prêt à envoyer (établissement de liaisons) (CTS)

Broche 8 : Demande d'envoi (établissement matériel de liaisons) (RTS)

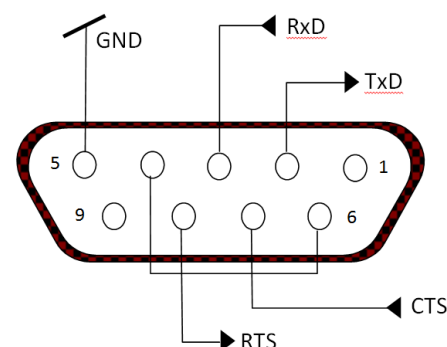

Utiliser le port RS-232 intégré pour une connexion vers un ordinateur ou vers une imprimante.

6.2.1 Connexion à un ordinateur

Connecter l'ordinateur au moyen d'un câble série standard (direct).

Utiliser HyperTerminal ou un logiciel semblable de terminal pour tester les communications avec l'ordinateur.

Configurer HyperTerminal de la manière suivante :

Choisir Nouvelle connexion, « connexion en utilisant » COM1 (ou un port COM disponible).

Sélectionner Baud = 9600 ; Parité = 8 Aucune ; Bit de Stop = 1 ; Établissement d'une liaison = Aucun. Cliquer sur OK.

Choisir Propriétés/Paramètres, puis Paramétrage ASCII. Cocher les cases, comme illustré :
(Envoi fin de lignes... Caractères tapés en écho... Retour à la ligne...)

Vérifier la communication en appuyant sur le bouton Impression Si HyperTerminal est correctement configuré, la valeur sur l'écran sera affichée dans la fenêtre.

6.2.2 Connexion à une imprimante série

Connecter le câble fourni avec l'imprimante au port RS-232 de la balance.

S'assurer que les réglages de communication de la balance et de l'imprimante correspondent.

Test de communication de l'imprimante en appuyant sur le bouton Impression. Si la balance et l'imprimante sont correctement configurées, la valeur sur l'affichage sera imprimée.

Interface USB du dispositif



USB hôte

Dispositif USB

Le kit d'interface USB OHAUS reste la solution unique au problème de connexion d'une balance à un ordinateur en utilisant l'USB (Universal Serial Bus). Les dispositifs USB sont classés selon des catégories telles que des lecteurs de disques, des caméras numériques, des imprimantes, etc. Les balances n'ont pas de classification communément utilisée, c'est pourquoi l'interface USB d'Ohaus utilise une interface générique basée sur l'interface série RS232 standard.

Les données sont envoyées de la balance vers un ordinateur au format USB. Les données USB sont dirigées vers un *port virtuel*. Ce port apparaît alors comme un port RS232 pour le programme d'application.

Lors de l'envoi d'une commande depuis un ordinateur vers la balance, le programme d'application envoie une commande vers le *port virtuel* comme s'il s'agissait d'un port RS232. L'ordinateur dirige alors la commande depuis le *port virtuel* vers le connecteur USB de l'ordinateur sur lequel la balance est connectée. Le port reçoit le signal USB et réagit à la commande.

Le kit d'interface USB comprend un CD avec les pilotes logiciels afin de créer le port USB virtuel nécessaire sur l'ordinateur.

6.2.3 Spécifications du système

- PC fonctionnant sous Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP ou Windows 7
- Port USB disponible (type A, 4 broches, femelle)

6.2.4 Connexion USB

Le port USB de la balance se termine par un connecteur B femelle à 4 broches de type USB.

Un câble USB (type B/mâle vers type A/mâle) est nécessaire (non fourni).

1. S'assurer que la balance est sous tension et fonctionne correctement.
2. Mettre l'ordinateur sous tension, et vérifier que le port USB est actif et fonctionne correctement.
3. Brancher le connecteur USB du câble dans le connecteur USB de l'ordinateur et dans celui de la balance. Windows détectera un dispositif USB et l'assistant Nouveau matériel sera initialisé.

6.2.5 Installation du logiciel du port virtuel

1. Insérer le CD fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur.

Les diverses versions de Windows présentent des étapes légèrement différentes lors du chargement des pilotes se trouvant sur le CD. Dans toutes les versions, l'assistant Nouveau matériel vous guidera au cours des étapes requises afin de sélectionner le pilote se trouvant sur le CD.

2. Après avoir cliqué sur Terminé, le port virtuel doit être prêt à l'utilisation.

Windows ajoute généralement le port virtuel en séquence après le numéro de port COM le plus élevé. Par exemple, sur un PC équipé avec 4 ports COM, le port virtuel deviendra COM5.

Lors de l'utilisation de l'interface USB avec des programmes qui limitent le nombre de désignations de ports COM (par exemple, Ohaus MassTracker n'autorise que COM1, 2, 3 et 4), il peut s'avérer nécessaire d'attribuer un de ces numéros de port au nouveau port virtuel.



Exemple de l'assistant Matériel de Windows XP

Ceci peut être réalisé dans Paramètres des ports de l'utilitaire Gestionnaire de périphériques se trouvant sur le panneau de configuration de Windows.

6.3 USB hôte

L'hôte USB peut être utilisé pour connecter un scanner de codes à barres et une clé USB à la Ranger 7000.

6.4 Format de l'impression

Chaîne de sortie d'impression pour les unités g, kg, lb, oz :

APPLICATION VÉRIFICATION :

Champ	Poids	Espace	Unité	Espace	Stabilité	Espace	T/N/G/PT	Espace	État de la application	Caractères de terminaison
Longueu	11	1	5	1	1	1	2	1	6	2

NON-APPLICATION VÉRIFICATION :

Champ	Poids	Espace	Unité	Espace	Stabilité	Espace	T/N/G/PT	Caractères de terminaison
Longueu	11	1	5	1	1	1	2	2

Poids - Jusqu'à 11 caractères, justifié à droite, - à gauche immédiate du caractère le plus significatif (si négatif).

Unité - Jusqu'à 5 caractères, justifié à droite. Si l'unité dans le menu d'impression de contenu a été réglé sur OFF, l'unité sera supprimée dans la chaîne pondéral et remplacé par des espaces.

Stabilité - caractère "?" Est imprimé sinon stable. Si le poids est un espace est imprimé.

T / N / G / PT - "T" est imprimé pour un poids de tare, "N" imprimé si le poids est le poids net, 'G' ou rien imprimé si le poids est un poids brut, «PT» est imprimé si le poids de la tare est pré-set Tare.

État de la demande (pour Check) - Correction à 6 caractères. état d'affichage comme "Under",
"Accepter" et "Over" pour le contrôle pesée.

Finalisation Caractère (s) - caractère de fin (s) imprimé selon le réglage du menu FEED.

Chaîne de sortie d'impression pour l'unité lb:oz

Champ	Poids1	Espace	Unité1	Espace	Poids2	Espace	Unité2	Espace	Stabilité	Espace	G/N	Espace	Message	Caractères de terminaison
Longueu	4	1	2	1	7	1	2	1	1	1	1	1	5	2

- La chaîne de sortie d'impression est fixée à 28 caractères.
- Chaque champ Espace correspond à un espace de délimitation utilisé en tant que séparation avec les autres champs.
- Le champ Poids1 est composé de 4 caractères justifiés à droite. Si la valeur est négative, le caractère - est situé immédiatement à gauche du chiffre le plus significatif.
- Le champ Unit1 contient deux caractères justifiés à gauche.
- Le champ Poids2 est composé de 7 caractères justifiés à droite.
- Le champ Unit2 contient 2 caractères justifiés à gauche.
- Le champ Stabilité contient 1 caractère. Un espace est imprimé si la valeur du poids est stable. Un ? s'imprime si la valeur du poids n'est pas stable.
- Le champ G/N contient 1 caractère. G est imprimé pour un poids brut. N est imprimé pour un poids net
- Le champ Message contient 5 caractères justifiés à gauche

Remarque : Le retour chariot du caractère de terminaison et l'interligne sont ajoutés à l'impression.

6.5 Exemples d'impression

Setup dans le menu	Imprimez
{String 1} {New Line} {String 2} {New Line} {String 3} {New Line} {New Line} {Time} {3 spaces} {3 spaces} {Date} {New Line} {ID} {New Line} {Result} {New Line} {New Line} {String 4} {New Line} {String 5} {New Line} {End of template}	OHAUS CORPORATION 7 Campus Drive Suite 310 10:01 04/22/2016 50 500.0 g Signature _____ Verified by _____

Setup dans le menu	Échantillon de l'imprimé du tamis
{String 9} {New Line} {String 10} {New Line} {String 11} {New Line} {String 12} {New Line} {String 13} {New Line} {New Line} {String 15}{User ID} {New Line} {String 16}{Project ID} {New Line} {String 17}{Scale ID} {New Line} {Date } {3 spaces} { Time } {New Line} {String 18}{Mode} {New Line} {New Line} {Result}{New Line} {New Line} {String 19} {New Line} {String 20} {New Line} {End of template}	***** OHAUS Corporation 7 Campus Drive Ste 310 Parsippany NJ 07054 www.ohaus.com 1.800.672.7722 User ID:OHAUS Project ID:Troy Hills Mall Parking Lot Scale ID:Ranger 28544655383 03/31/2017 14:03 Mode:Sieve Sample ID: 1234567890 DATA Start Weight: 511.0 g Size Measured Weight * 5cm 353.7 g * 20mm 112.6 g Pan 39.3 g ----- * used in FM calculation Weight Lost: 5.4 g Weight Lost %: 1.06% End Weight: 505.6 g ANALYSIS Size Retained Passed 5cm 69.96% 30.04% 20mm 22.27% 7.77% Pan 7.77% 0.00% Size Acc. % retained 5cm 69.96% 20mm 92.23% Pan 100.00% Size Acc. Wt. retained 5cm 353.7 g 20mm 466.3 g Pan 505.6 g Fineness Modulus: 1.62 Signature: _____ Verified by: _____

String 9: *****
String 10: OHAUS Corporation
String 11: 7 Campus Drive Ste 310
String 12: Parsippany NJ 07054
String 13: www.ohaus.com 1.800.672.7722
String 15: User ID:
String 16: Project ID:
String 17: Scale ID:
String 18: Mode:
String 19: Signature: _____
String 20: Verified by: _____

7. MÉTROLOGIE LÉGALE

Lorsque la balance est utilisée dans une application commerciale ou légalement contrôlée, elle doit être configurée, inspectée et scellée conformément à la réglementation locale des poids et mesures. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que toutes les conditions légales pertinentes sont satisfaites.

7.1 Réglages

Avant de procéder à l'inspection et au plombage, réaliser les étapes suivantes dans l'ordre :

1. Vérifier que les paramètres du menu satisfont à la réglementation locale des poids et mesures.
2. Le menu des unités doit être consulté. Vérifier que les unités sous tension satisfont à la réglementation locale des poids et mesures.
3. Effectuer un étalonnage conformément à la section 5.
4. Mettre le contacteur de sécurité sur la position verrouillée.

7.2 Vérification

L'agent de service agréé ou l'agent officiel des poids et mesures doit exécuter la procédure de vérification.

7.3 Plombage

Une fois la balance vérifiée, elle doit être plombée afin d'interdire un accès non détecté aux paramètres contrôlés conformément à la loi. Avant de plomber le dispositif, s'assurer que le contacteur de sécurité se trouve sur la position Verrouillée.

Si le plombage s'effectue avec un fil, il doit être passé à travers les orifices de la vis et de la languette de sécurité, comme illustré.

S'il s'agit d'un sceau en papier, placer ce dernier par-dessus la face plate de la vis, comme illustré.

A. Base



Déverrouillé



Verrouillé avec un sceau en papier



Verrouillé avec un sceau filaire

B. Terminal



Déverrouillé



Verrouillé avec un sceau en papier



Verrouillé avec un sceau filaire

Remarque : Seul le terminal doit être scellé si une deuxième balance est attachée à la deuxième carte A/D en option.

8. MAINTENANCE

8.1 Étalonnage

Vérifier périodiquement l'étalonnage en plaçant un poids précis sur la balance et en observant le résultat. Si un étalonnage est nécessaire, le réaliser conformément aux explications de la section 5.

8.2 Informations

Les informations sont disponibles depuis n'importe quelle application et leur accès s'effectue en appuyant sur le bouton



Les données suivantes sont disponibles pour l'application utilisée :

Application	Statistiques	Accumulation	Généralités État	Aide	Icônes Explication
Pesage	X	X	X	X	X
Comptage		X	X	X	X
Pourcentage		X	X	X	X
Vérification		X	X	X	X
Dynamique		X	X	X	X
Remplissage		X	X	X	X
Formulation			X	X	X
Différentiel			X	X	X
Densité			X	X	X
Tamis					

Appuyer sur le bouton pour accéder à la zone **Informations**.

Utiliser les boutons correspondants aux icônes et pour naviguer parmi les divers écrans Informations.

Remarque : Pour revenir à l'écran Accueil de l'application depuis la zone d'information, appuyez sur .

Pour effacer les données, utiliser les boutons correspondants aux icônes et pour sélectionner l'article devant être effacé, appuyer ensuite sur .

Un message d'avertissement apparaît, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône pour confirmer la suppression.

Pour annuler la suppression, appuyer sur le bouton correspondant à l'icône .

Accumulate Result

Number of Samples : 0
Total : 0.0 g
Average : 0.0 g
Minimum : 0.0 g
Maximum : 0.0 g
Range : 0.0 g

Warning

Clear the Accumulate Data?

8.3 Nettoyage



Déconnecter la balance Ranger 7000 de l'alimentation avant de la nettoyer.
S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du terminal ou de la base.

Nettoyer la balance à des intervalles réguliers.

Les surfaces du boîtier peuvent être nettoyées avec un chiffon non pelucheux, légèrement trempé dans de l'eau ou dans un détergent doux.

Attention : Ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques puissants, d'ammoniac ou d'agents de nettoyage abrasifs.

8.4 Dépannage

TABLEAU 8-1. DÉPANNAGE

Codes d'erreur	Description	Cause
Erreur EEP	Erreur de somme de contrôle EEPROM	Données EEPROM corrompues.
Mise sous tension en surcharge	Erreur à la mise sous tension	Affichage du poids supérieur à la limite du zéro de mise sous tension.
Mise sous tension en sous-charge	Erreur à la mise sous tension	Affichage du poids inférieur à la limite du zéro de mise sous tension.
Surcharge	Erreur de dépassement supérieur de plage	Affichage du poids supérieur à la limite de surcharge.
Sous-charge	Erreur de dépassement inférieur de plage	Affichage du poids inférieur à la limite de sous-charge.
Erreur de Tare	Erreur Tare hors limite	Taré sur une unité mais après commutation vers une autre unité, la valeur de la tare dépasse le maximum.
Dépassement de capacité de l'affichage	Dépassement de capacité de l'affichage	Le poids dépasse 6 chiffres.
Aucun étalonnage	Erreur des données d'étalonnage	Les données d'étalonnage n'existent pas.
-----	Message occupé	Affiché pendant le réglage de la tare, du zéro, de l'impression.
--NON--	Message suite à action non autorisée	Fonction non exécutée.
Erreur d'étalonnage	Erreur d'étalonnage	La valeur d'étalonnage est en dehors des limites autorisées.
Référence basse	Avertissement pondéral de référence faible	Poids moyen d'une pièce trop faible. (Avertissement :
Erreur de référence	Message Poids de référence inacceptable	Poids de référence trop petit. Le poids sur le plateau est trop petit pour définir un poids de référence valide.

8.5 Informations de maintenance

Si la section de dépannage n'aide pas à résoudre le problème, contacter un technicien agréé Ohaus. Visiter le site Web à l'adresse www.ohaus.com pour localiser le bureau Ohaus le plus proche de chez vous. Un spécialiste des produits Ohaus est à disposition pour vous aider.

8.6 Mises à jour du logiciel

Ohaus améliore continuellement le logiciel de ses balances. Pour obtenir la version la plus récente, contacter un représentant Ohaus agréé ou Ohaus Corporation.

9. DONNÉES TECHNIQUES

9.1 Spécifications

Conditions d'ambiance

- Utilisation en intérieur seulement
- Altitude : Jusqu'à 2000 m
- Plage de température spécifiée : 10 °C à 30 °C (modèles R71MHD3/6/15/35)
-10 °C à 24 °C (modèles R71MD3/6/15/35)
- Humidité : humidité relative maximum à 80 % avec des températures jusqu'à 30 °C
avec diminution linéaire jusqu'à 50 % de l'humidité relative à 40 °C
- Variations secteur de +/- 10 % de la tension nominale
- Catégorie d'installation II
- Degré de pollution : 2
- Fonctionnement assuré à température ambiante entre 5 °C et 40 °C

Matériaux

- Boîtier base : fonte d'aluminium peinte
- Boîtier du terminal : fonte d'aluminium peinte
- Plateau de pesage : Acier inoxydable 304

TABLEAU 9-1. SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	R71MHD3	R71MHD6	R71MHD15	R71MHD35
Capacité	3000 g	6000 g	15 000 g	35 000 g
Lisibilité d	0,01 g	0,02 g	0,1 g	0,1 g
Lisibilité approuvée	0,1 g	0,2 g	1 g	1 g
Reproductibilité (écart type)	0,01 g	0,02 g	0,1 g	0,1 g
Linéarité	± 0,02 g	± 0,04 g	± 0,2 g	± 0,2 g
Unités de pesage	gramme, kilogramme, once, livre, livre:once			
Applications	Pesage, Comptage de pièces, Pesage par pourcentage, Pesage de contrôle, Pesage dynamique, Remplissage, Formulation, Pesage différentiel, Densité, Tamis			
Durée de stabilisation typique	Dans la seconde			
Protection contre les surcharges sans danger	150 % de capacité			
Affichage	Afficheur graphique TFT ACL			
Dimensions de l'affichage	4,3 po			
Rétro-éclairage	DEL blanche			
Communication	RS-232, USB			
Alimentation	Alimentation en entrée : 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz			
Classe d'approbation	II			
Dimensions de la plateforme	210 x 210 mm 8,3 x 8,3 po		377 x 311 mm 14,8 x 12,2 po	
Dimensions du boîtier (Largeur x Profondeur x Hauteur)	267 x 118 x 72 mm 10,5 x 4,6 x 2,8 po			
Dimensions de la base du terminal (Largeur x Profondeur x Hauteur)	280 x 280 x 114 mm 11 x 11 x 4,5 po		377 x 311 x 128 mm 14,9 x 12,2 x 5 po	
Dimensions après assemblage (Largeur x Profondeur x Hauteur)	280 x 420 x 114 mm 11 x 11 x 4,5 po		377 x 467 x 128 mm 14,9 x 18,4 x 5 po	
Poids net	7,2 kg/16 lb		10,9 kg/24 lb	
Poids à l'expédition	9,2 kg/20,3 lb		14,4 kg/31,7 lb	
Dimensions d'expédition	605 x 405 x 244 mm 23,8 x 15,9 x 9,6 po		665 x 525 x 330 mm 26,2 x 20,7 x 13 po	


TABLEAU 9-2. SPÉCIFICATIONS (suite)

MODÈLE	R71MD3	R71MD6	R71MD15	R71MD35	R71MD60
Capacité	3000 g	6000g	15 000g	35 000 g	60000 g
Lisibilité d	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Lisibilité approuvée	0,5 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Reproductibilité (écart type)	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Linéarité	± 0,1 g	± 0,2 g	± 0,4 g	± 1 g	± 2 g
Unités de pesage	gramme, kilogramme, once, livre, livre:once				
Applications	Pesage, Comptage de pièces, Pesage par pourcentage, Pesage de contrôle, Pesage dynamique, Remplissage, Formulation, Pesage différentiel, Densité, Tamis				
Durée de stabilisation typique	Dans la seconde				
Capacité de surcharge sans danger	150 % de capacité				
Affichage	Afficheur graphique TFT ACL				
Dimensions de l'affichage	4,3 po				
Rétro-éclairage	DEL blanche				
Communication	RS-232, USB				
Alimentation	Alimentation en entrée : 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz				
Classe d'approbation	III				
Dimensions de la plateforme	280 x 280 mm 11 po x 11 po		377 x 311 mm 14.8 x 12,2 po		
Dimensions du terminal (Largeur x Profondeur x Hauteur)	267 x 118 x 72 mm 10,5 x 4,6 x 2,8 po				
Dimensions de la base du terminal (Largeur x Profondeur x Hauteur)	280 x 280 x 114 mm 9,4 x 9,4 x 4,5 po		377 x 311 x 128 mm 14,9 x 12,2 x 5 po		
Dimensions après assemblage (Largeur x Profondeur x Hauteur)	240 x 420 x 114 mm 17,4 x 16,5 x 4,5 po		377 x 467 x 128 mm 14,9 x 18,4 x 5 po		
Poids net	6,8 kg/15 lb		9,9 kg/21,8 lb		
Poids à l'expédition	8,5 kg/18,7 lb		13,4 kg/29,5 lb		
Dimensions d'expédition	605 x 405 x 244 mm 23.8 x 15.9 x 9.6 po		665 x 525 x 330 mm 26.2 x 20.7 x 13 po		

9.2 Schémas et dimensions

Dimensions de la balance complètement assemblée

A. Grande

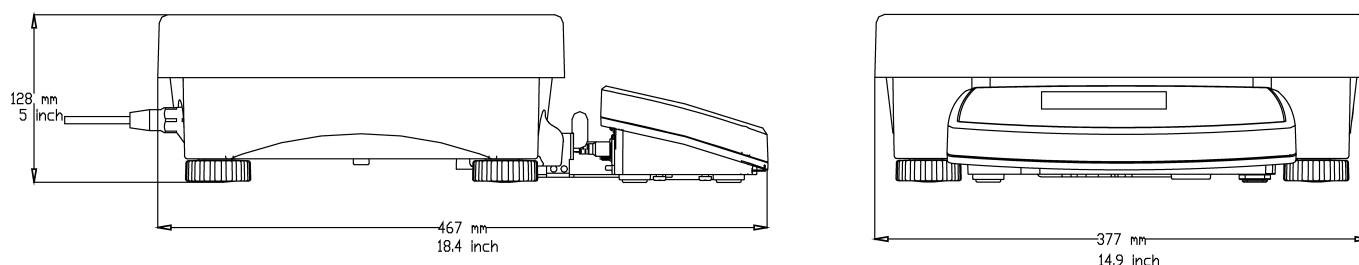

B. Petite

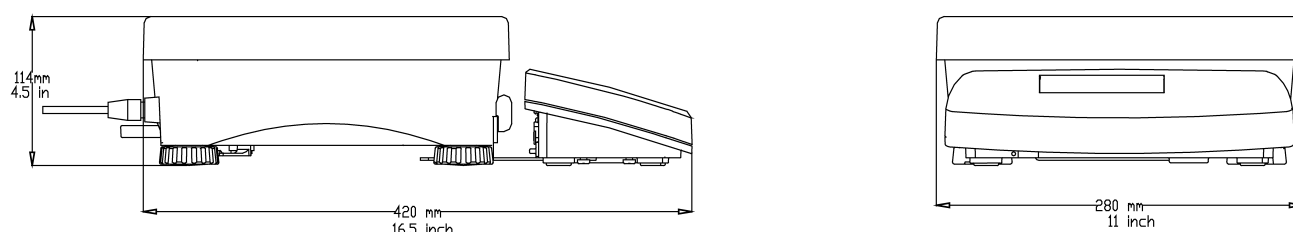


Figure 9-1. Dimensions de la RANGER 7000

9.3 Tableau des valeurs GEO

Pour les instruments de pesage vérifiés par le fabricant, la valeur GEO indique le pays ou la zone géographique pour laquelle l'instrument est vérifié. La valeur GEO définit dans l'instrument (p. ex., Geo 18) apparaît brièvement après branchement ou est spécifié sur une étiquette.

Remarque : Les valeurs GEO ne sont applicables que pour les modèles R71MD3, R71MD6, R71MD15 et R71MD35.

TABLEAU 9-3. CODES GEO

		Hauteur en mètres										
		0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
		325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
		Hauteur en pieds										
		0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
		1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730
Latitude		Valeur GEO										
0°00'	5°46'	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5°46'	9°52'	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9°52'	12°44'	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12°44'	15°06'	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15°06'	17°10'	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17°10'	19°02'	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19°02'	20°45'	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20°45'	22°22'	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22°22'	23°54'	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23°54'	25°21'	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25°21'	26°45'	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26°45'	28°06'	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28°06'	29°25'	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29°25'	30°41'	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30°41'	31°56'	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31°56'	33°09'	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33°09'	34°21'	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34°21'	35°31'	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35°31'	36°41'	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36°41'	37°50'	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37°50'	38°58'	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38°58'	40°05'	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40°05'	41°12'	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41°12'	42°19'	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42°19'	43°26'	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43°26'	44°32'	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44°32'	45°38'	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45°38'	46°45'	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46°45'	47°51'	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47°51'	48°58'	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48°58'	50°06'	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50°06'	51°13'	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51°13'	52°22'	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52°22'	53°31'	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53°31'	54°41'	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54°41'	55°52'	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55°52'	57°04'	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57°04'	58°17'	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58°17'	59°32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59°32'	60°49'	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60°49'	62°00'	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62°00'	63°30'	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63°30'	64°55'	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64°55'	66°24'	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66°24'	67°57'	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67°57'	69°35'	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69°35'	71°21'	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71°21'	73°16'	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73°16'	75°24'	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75°24'	77°52'	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77°52'	80°56'	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80°56'	85°45'	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85°45'	90°00'	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

9.4 Options

TABLEAU 9-4. OPTIONS


























DESCRIPTION	RÉFÉRENC E
Kit de batteries rechargeables, EX HiCap, R71	30041295
Accessoire : Kit de tour, R71	30095408
Accessoire : Deuxième RS232, R71	30100893
Accessoire : Kit de deuxième plateforme, R71	30097590
Accessoire : E/S discrètes, R71	30097591
Accessoire : Kit Ethernet, R71	30100894
Kit d'option de mémoire alibi, T71, R71	80500503
Accessoire : Câbles d'extension 9 mètres, R71	30101495
Accessoire : En couverture de l'utilisation, R71	30135320
Accessoire : Câble RS232 pour l'équilibre de référence	30057595
Affichage auxiliaire, AD7-RS	30472064
Câble, RS232, IBM 9P	80500525

9.5 Liste des icônes des boutons

TABLEAU 9-5. ICÔNES DES BOUTONS

APPLICATION DE PESAGE			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Pesage		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Accumulation manuelle		Rappel de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Quitter (utilisé dans les bibliothèques)		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)		Définir un identifiant de pesée
APPLICATION DE COMPTAGE			
	Paramétrage des configurations du mode Comptage		Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Définition du poids moyen d'une pièce (APW) par nombre d'échantillons		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	ENT PMP (Poids moyen d'une pièce) valeur directement		Rappel de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Accumulation manuelle		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Quitter (utilisé dans les bibliothèques)		Set APW par pré-réglée taille de référence
APPLICATION VÉRIFICATION			
	Paramétrage des configurations du mode Vérification		Quitter (utilisé dans les bibliothèques)
	Modification de la vérification des limites		Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Définition du poids moyen d'une pièce (APW) par nombre d'échantillons		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	ENT PMP (Poids moyen d'une pièce) valeur directement		Rappel de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Accumulation manuelle		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Changement de méthode d'entrée de Vérification des limites		

TABLEAU 9-5. ICÔNES DES BOUTONS (suite)

APPLICATION DENSITÉ			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Densité		Introduction de la densité du liquide
	Acceptation du poids actuel		Démarrage
	Définition de la température de l'eau		Annuler
APPLICATION REMPLISSAGE			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Remplissage		Changement de méthode d'entrée des points de consigne
	Définition de la valeur d'entrée ou poids en cours sur le plateau en tant que cible		Quitter (utilisé dans les bibliothèques)
	Définition de la valeur de la cible, du point de consigne1 et du point de consigne2		Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Arrêt		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Démarrage		Rappel de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Accumulation manuelle		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Appuyer brièvement pour régler la valeur de la cible, du point de consigne 1 et du point de consigne 2 ; Appuyer longtemps pour saisir un APW connu ou pour confirmer l'APW connu saisi par le clavier.		Appuyer brièvement pour définir comme cible la valeur d'entrée ou le poids/pièces actuel sur le plateau. Appuyer longtemps pour saisir le nombre de pièces souhaité sur le plateau ou pour confirmer le nombre de pièces saisi par le clavier.
	Attendre ou continuer		
APPLICATION DYNAMIQUE			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Dynamique		Démarrage
	Définition de la durée moyenne		Annuler



	Accumulation manuelle		Réinitialisation
---	-----------------------	--	------------------

TABLEAU 9-5. ICÔNES DES BOUTONS (suite)











































APPLICATION DIFFÉRENTIEL			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Différentiel		Acceptation du poids actuel
	Modification des articles		Réinitialisation
APPLICATION POURCENTAGE			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Pourcentage		Accumulation manuelle
	Définition du poids de référence		
APPLICATION FORMULATION			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode Formulation		Impression des résultats de la formulation
	Définition du facteur		Visualisation de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Démarrage		Modification du nom de l'enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Rappeler l'enregistrement sélectionné (utilisé dans la bibliothèque)		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Réinitialisation		Revenir à l'écran précédent
	Composant suivant		Aller à l'écran suivant
	Dernier composant		Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Quitter (utilisé dans les bibliothèques)		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Enregistrement des résultats de la formulation en tant que nouvelle recette		




TABLEAU 9-5. ICÔNES DES BOUTONS (suite)

ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Hôte		
	Connexion		
	Plage d'impression		

TAMIS			
ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
	Paramétrage des configurations du mode tamis		Visualisation de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Entrée démarrer le poids manuellement		Modification du nom de l'enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Démarrage		Suppression de l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Impression des résultats du tamis		Revenir à l'écran précédent
	Acceptation du poids actuel		Aller à l'écran suivant
	Annuler		Ajout d'un enregistrement (utilisé dans les bibliothèques)
	Rappeler l'enregistrement sélectionné (utilisé dans la bibliothèque)		Modifier l'enregistrement sélectionné (utilisé dans les bibliothèques)
	Quitter (utilisé dans les bibliothèques)		

10. CONFORMITÉ


La conformité aux normes suivantes est indiquée par le marquage correspondant sur le produit.

Repère	Normes
	Ce produit est conforme aux normes harmonisées applicables des directives européennes 2011/65 / UE (RoHS), 2014/30 / UE (CEM), 2014/35/UE (LVD) et 2014/31/UE (NAWI). La déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à www.ohaus.com/ce .
	EN 61326-1
	UL Std. No. 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Appareils de pesage vérifiés

Lorsque l'appareil est utilisé dans le commerce ou en mode légalement contrôlé, il doit être mis en place, vérifié et scellé en conformité avec la réglementation locale concernant les poids et mesures. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que toutes les exigences légales applicables sont satisfaites.

Les appareils de pesage vérifiés sur le lieu de fabrication portent la marque métrologique supplémentaire suivante sur la plaque signalétique.

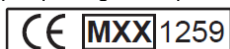

Les appareils de pesage à vérifier en deux étapes ne portent pas de marque métrologique supplémentaire sur la plaque signalétique. La seconde étape de validation de conformité doit être effectuée par un service des poids et mesures agréé. Si une réglementation nationale limite la période de validité de la vérification, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'actualisation de la vérification de l'appareil auprès de l'autorité agréée.

Comme les vérifications varient suivant les juridictions, l'utilisateur devra prendre contact avec l'organisme agréé local afin de s'informer.

Remarque FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre des interférences dangereuses lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner des hautes fréquences et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, il peut générer des interférences préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de générer des brouillages préjudiciables, auquel cas l'utilisateur se verra dans l'obligation de rectifier la situation à ses frais.

Remarque d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Enregistrement ISO 9001

Le système de management en vigueur pour la production de cet appareil est certifié ISO 9001.

Mise au rebut

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), cet appareil peut ne pas être mis au rebut comme des ordures ménagères. Ceci est également valable pour les pays en dehors de l'UE, selon leurs impératifs spécifiques. La directive 2006/66/EC sur les batteries introduit de nouveaux impératifs à partir de septembre 2008 sur le retrait des batteries d'un équipement destiné au rebut dans tous les États membres de l'Union européenne. Pour être conforme à cette directive, cet appareil a été conçu pour un retrait sans danger des batteries aussitôt sa fin d'utilisation par une installation de traitement des déchets.

Veuillez mettre au rebut ce produit conformément à la réglementation locale au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, contacter l'autorité responsable ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil change de propriétaire (pour des raisons personnelles ou professionnelles), cette consigne doit lui être communiquée.

Pour les instructions de rejet et recyclage en Europe, merci de consulter le site www.ohaus.com/weee.

Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l'environnement.

Garantie limitée

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison et pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, OHAUS s'engage, sans frais de votre part, à réparer ou à sa discrétion, à remplacer toutes les pièces déterminées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, fret payé d'avance, à OHAUS. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi des dommages suite à un accident ou un mésusage, a été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contient des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou après une maintenance ou une modification apportée par des techniciens autres que ceux d'OHAUS. En l'absence d'une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par OHAUS Corporation. En aucun cas, OHAUS Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où les lois régissant les garanties varient d'un état ou d'un pays à un autre, veuillez contacter OHAUS ou votre revendeur local agréé OHAUS pour de plus amples informations.



Ohaus® et Ranger® sont des marques déposées ou des marques de commerce de Ohaus Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows® et Excel® sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ohaus Corporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
Tél. : +1 (973) 377-9000
Fax : +1 (973) 944-7177

Avec des bureaux dans le monde entier.
www.ohaus.com



Réf. 30125494 H ©2023 Ohaus Corporation, tous droits réservés.